

# Maxi Sky 2

## Transportige istuvast asendist



1



Asetage tõstelina ümber patsiendi. Peatoega tõstelina puhul veenduge, et see ulatuks patsiendi pea peale.

2




Minge tõstuki juurde. Asetage tõsteraam õlgade kõrgusele ja piisavalt lähedale, et õlarihmad kinnitada.

3




Klambriga tõstelina

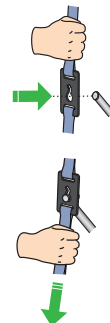

Enne patsiendi tõstmist kinnitage ja sulgege sulguril olev klamber.




Aasadega tõstelina

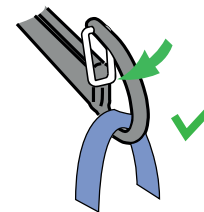


Asetage kinnitusaas konksule. Veenduge, et turvavöö oleks suletud.

4

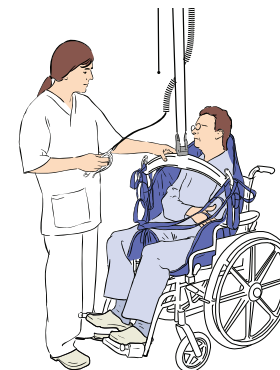


Ühendage tõstelina aasad või klambrid tõsteraamiga.

5

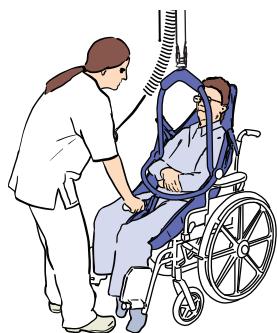


DPS-tõsteraami ja klambriga tõstelina jaoks kallutage tõsteraami jalaklambrate kinnitamiseks.

6

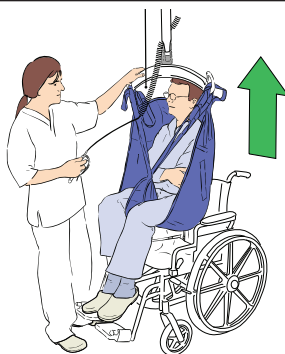

Tõstke patsient üles.

7

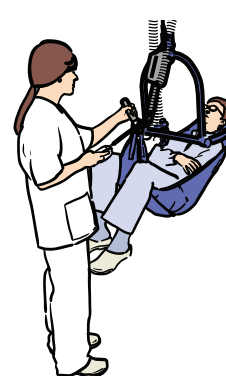

Liigutage patsienti.

8



Langetage, kuni pinge kaob. Eemaldage aasad või klambrid.

## Transportige horisontaalasendist

1




Asetage tõstelina  
patsiendi alla keskele.  
Peatoega tõstelina puhul  
veenduge, et see ulatuks  
patsiendi pea peale.

2



Paigutage tõstuk patsiendi kohale.

3

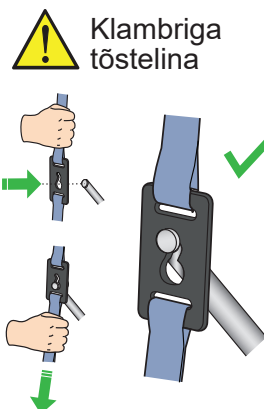

Enne patsiendi tõstmist kinnitage ja sulgege sulguril olev klamber.




Asetage kinnitusaas  
konksule. Veenduge,  
et turvavöö oleks  
suletud.

4




Ühendage tõstelina aasad või klambrid tõsteraamiga. Kinnitage õla- ja seejärel jalarihmad.

5

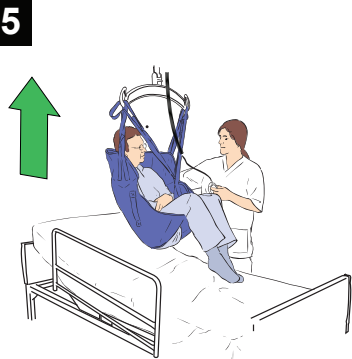


Tõstke patsient üles.

6

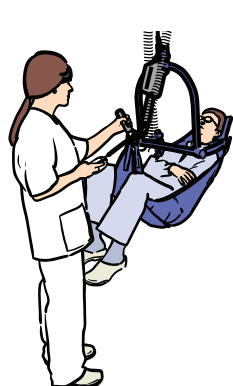


Liigutage patsienti.

7

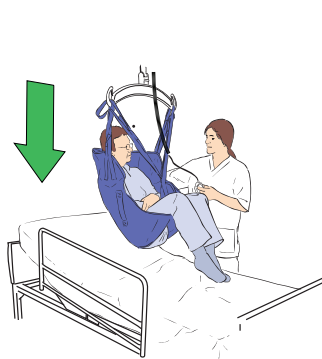

Langetage patsient uuele  
asukohale.

8

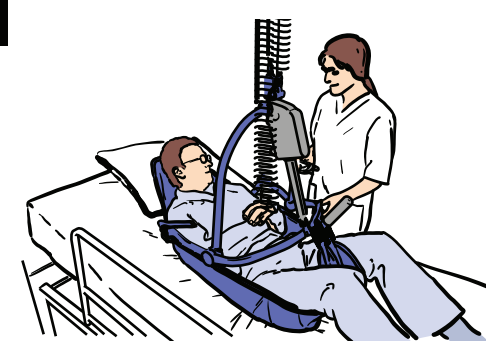

Eemaldage aasad või klambrid, kui patsiendi kaal on täielikult toetatud.


## Ümberpaigutamine – liigutage voodis üles




Asetage tõstelina patsiendi alla ja paigutage tõstuk patsiendi kohale.




Aasadega tõstelina  
Asetage kinnitusaas konksule. Veenduge, et turvavöö oleks suletud.

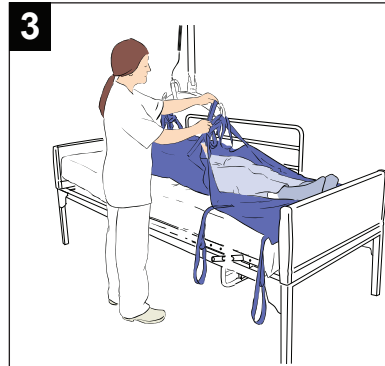

Kinnitage võimalikult palju tõstelina aasid tõsteraami külge. Alustage aasdest peapoolses otsas.

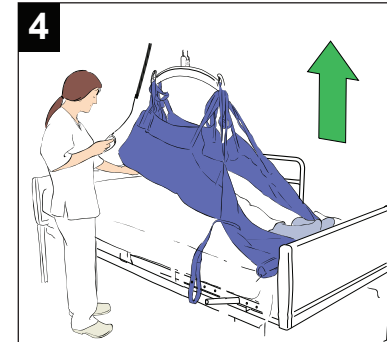


Tõstke, kuni puusad on toetatud, ja liikuge üles.

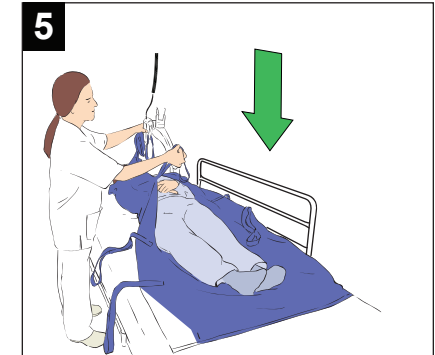

Langetage patsient uuele asukohale ja eemaldage kõik aasad.


## Ümberpaigutamine – voodi keeramine

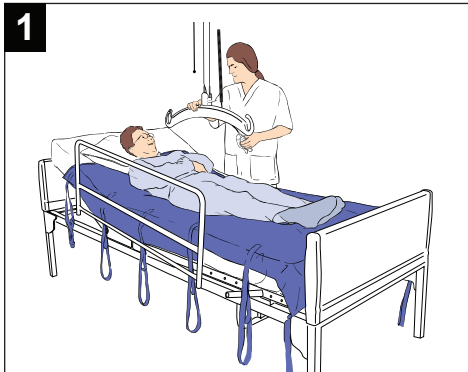


Asetage tõstelina patsiendi alla ja paigutage tõstuk patsiendi kohale.




Aasadega tõstelina  
Asetage kinnitusaas konksule. Veenduge, et turvavöö oleks suletud.

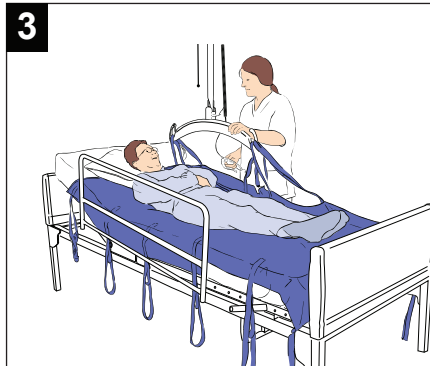

Kinnitage võimalikult palju tõstelina aasid ühelt küljelt tõsteraamile. Alustage aasdest peapoolses otsas.

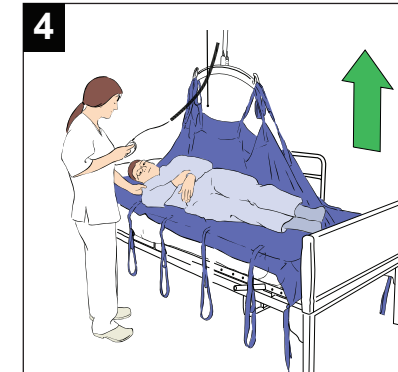

Tõstke, kuni patsient keeratakse soovitud asendisse.

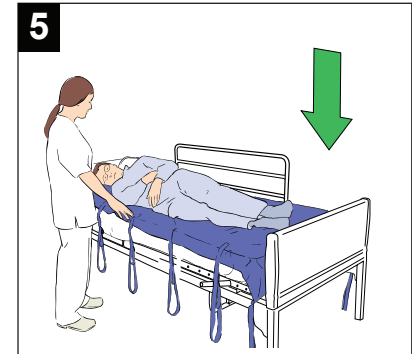

Langetage, kuni pinget kaob, ja eemaldage kõik aasad.


## Transportige patsienti horisontaalasendis

1



Asetage tõstelina patsiendi alla, veendudes, et tuvastate tõstelina peapoolse otsa.

2

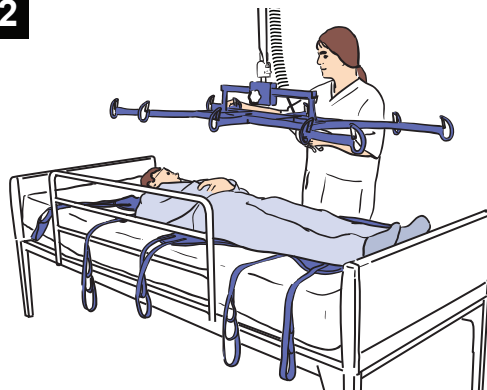


Paigutage tõstuk patsiendi kohale.

3




Aasadega tõstelina

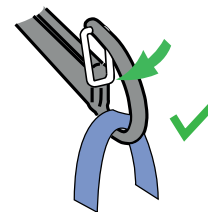


Asetage kinnitusaas konksule. Veenduge, et turvavöö oleks suletud.

4

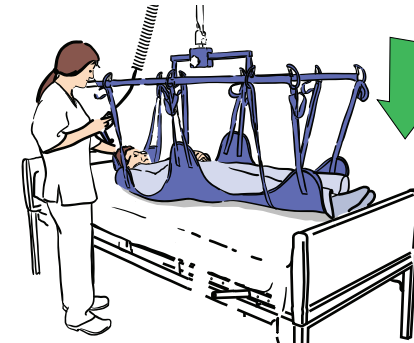


Langetage ettevaatlikult kanderaam ja joondage raami keskosa patsiendi nabaga. Kinnitage kõik tõstelina aasad.

5

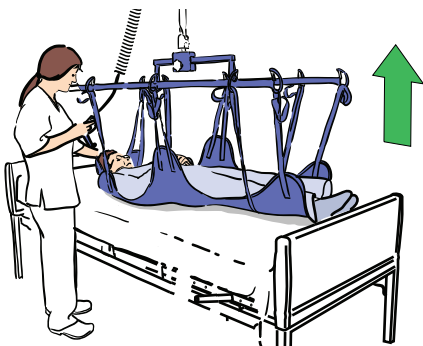


Tõstke ja liigutage patsient voodist eemale.

6

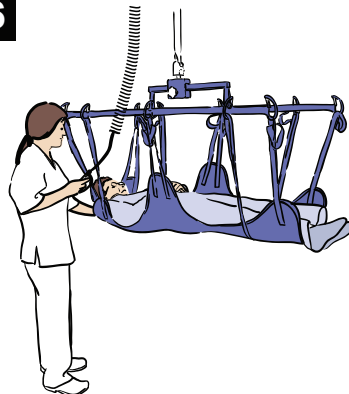


Liigutage patsienti.

7

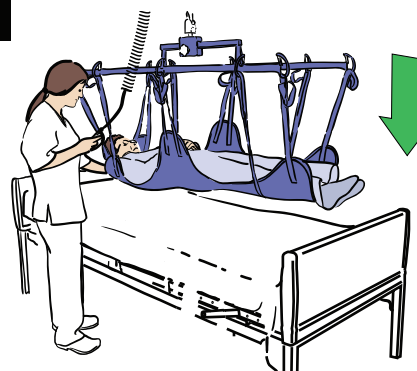

Langetage patsient uuele asukohale ja eemaldage kõik aasad.

8

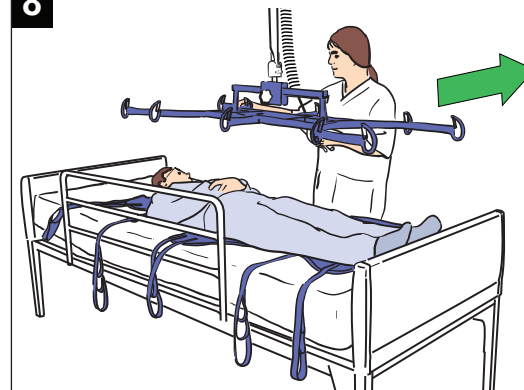

Liigutage raam patsiendist eemale.

