

Maxi Sky 2

Přesun z polohy vsedě



1



Umístěte vak okolo pacienta/klienta. U vaku s opěrkou hlavy dbejte na to, aby dosahovala až k temeni hlavy pacienta/klienta.

2




Přistupte ke zvedáku. Závěsné rameno umístěte v úrovni ramen tak, aby bylo dostatečně blízko pro připojení ramenních popruhů.

3




Klipový vak

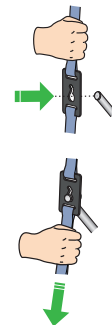

Připojte klip a zajistěte kolíkem před zvedáním pacienta/klienta.




Poutkový vak

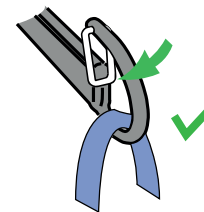


Na hák zavěste připojovací poutko. Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zajištěná.

4

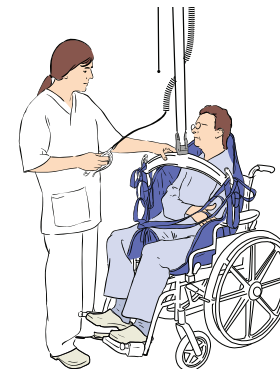


Poutka nebo klipy vaku připojte k závěsnému ramenu.

5

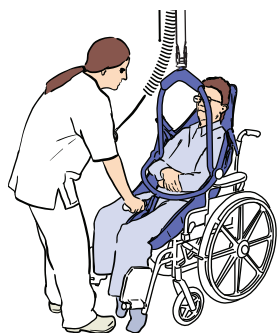


Při použití závěsného ramena s DPS a klipového vaku závěsné rameno nakloňte, aby bylo možné připnout nožní klipy.

6

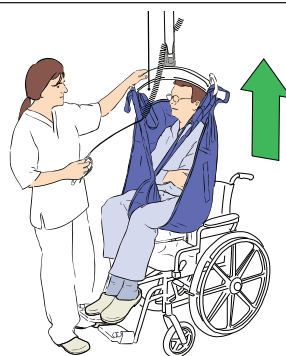


Zvedněte pacienta/klienta.

7

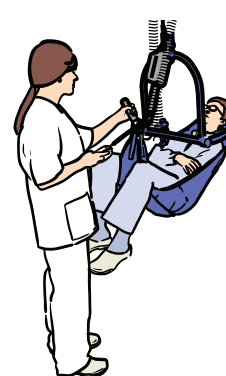

Přesuňte pacienta/klienta.

8

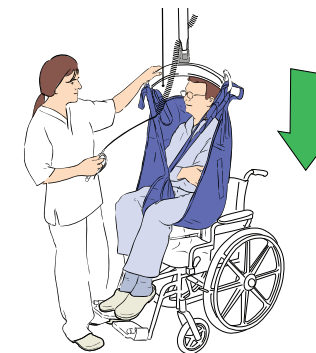

Spouštějte, dokud se neuvolní napětí. Odpojte poutka nebo klipy.

Přesun z polohy na zádech

1




Vak položte do středu pod pacienta/klienta. U vaku s opěrkou hlavy dbejte na to, aby dosahovala až k temeni hlavy pacienta/klienta.

2



Zvedák umístěte nad pacienta/klienta.

3

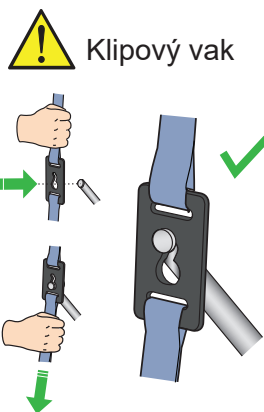

Připojte klip a zajistěte kolíkem před zvedáním pacienta/klienta.




Na hák zavěste připojovací poutko. Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zajištěná.

4




Poutka nebo klipy vaku připojte k závěsnému ramenu. Nejprve připněte ramenní popruhy a poté nožní.

5

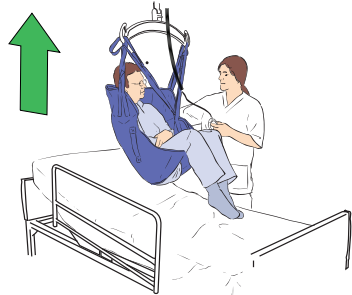


Zvedněte pacienta/klienta.

6

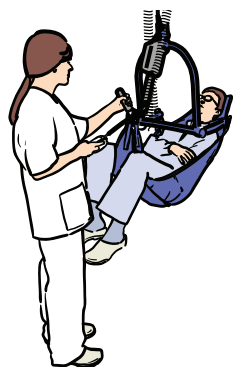


Přesuňte pacienta/klienta.

7

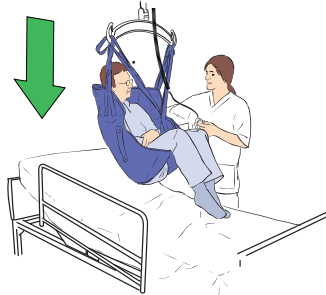

Spusťte pacienta/klienta na nové místo.

8

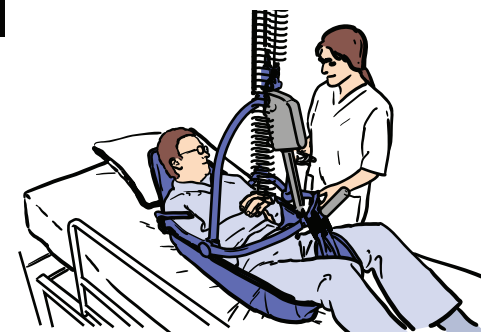

Když má tělesná váha pacienta/klienta plnou oporu, odpojte poutka nebo klipy.

Polohování – přesun na lůžku

1



Vak položte pod pacienta/klienta a zvedák umístěte nad pacienta/klienta.

2

⚠ Poutkový vak



Na hák zavěste připojovací poutko. Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zajištěná.

3



Na závěsné rameno připněte co nejvíce poutek vaku. Začněte poutky v hlavové části.

4



Zvedejte, dokud nejsou plně podepřeny boky, a poté přesuňte.

5



Spusťte pacienta/klienta na nové místo a odpojte všechna poutka.

Polohování – otáčení na lůžku

1



Vak položte pod pacienta/klienta a zvedák umístěte nad pacienta/klienta.

2

⚠ Poutkový vak




Na hák zavěste připojovací poutko. Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zajištěná.

3




Na jednu stranu závěsného ramena připněte co nejvíce poutek vaku. Začněte poutky v hlavové části.

4

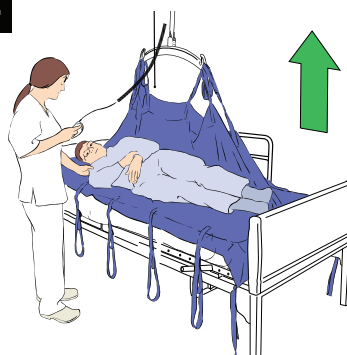

Zvedejte, dokud se pacient/klient neotočí do požadované polohy.

5

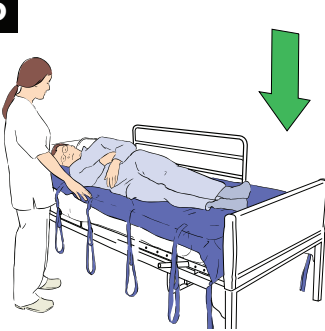

Spouštějte, dokud se neuvolní napětí, a odpojte všechna poutka.


Přesun pacienta/klienta v poloze na zádech

1



Vak položte pod pacienta/klienta a dbejte na správnou orientaci hlavové části vaku.


2

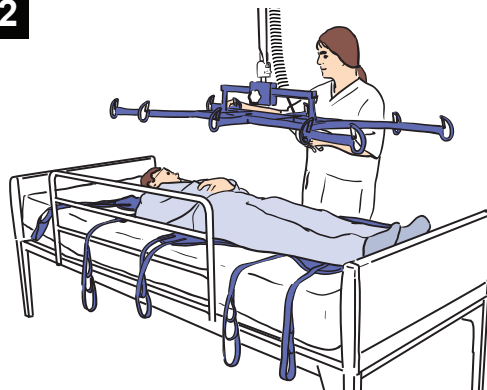

Zvedák umístěte nad pacienta/klienta.


3

! Poutkový vak

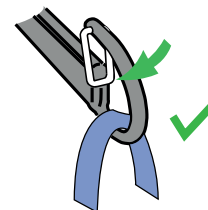


Na hák zavěste připojovací poutko. Ujistěte se, že je bezpečnostní západka zajištěná.

4

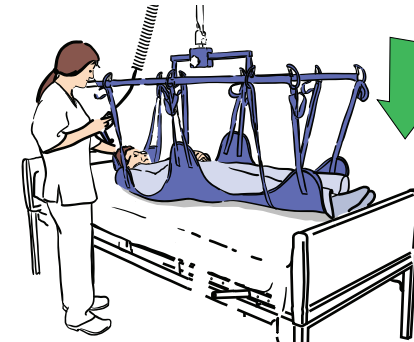


Opatrně snižte rám lehátka a jeho střed vyrovnejte s pupkem pacienta/klienta. Připojte poutka vaku.

5

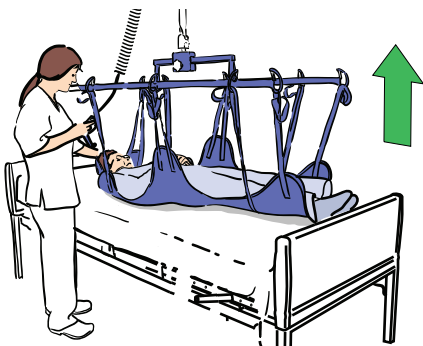


Zvedněte pacienta/klienta a přemístěte ho z lůžka.

6

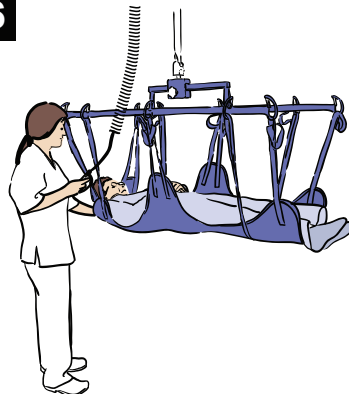


Přesuňte pacienta/klienta.

7

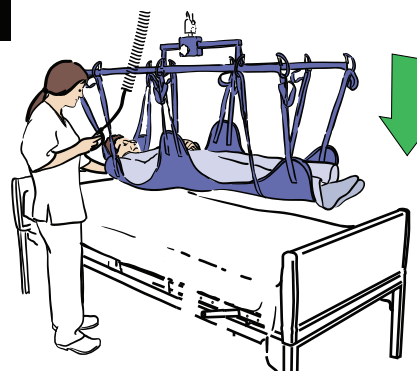

Spusťte pacienta/klienta na nové místo a odpojte všechna poutka.

8

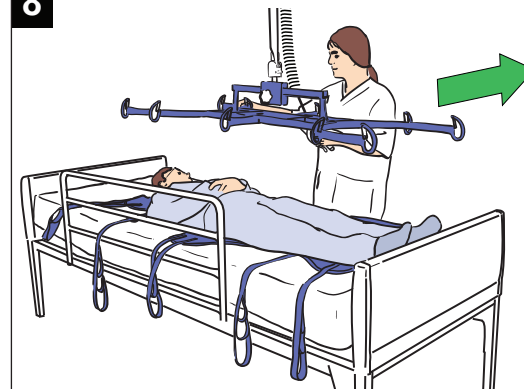

Rám přesuňte dále od pacienta/klienta.

