


Bolero



Nødstop




Nødsænkning og -hævning

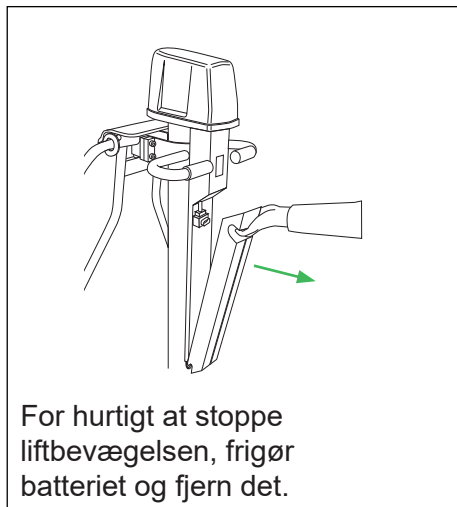


Manuel hævnning og sænkning

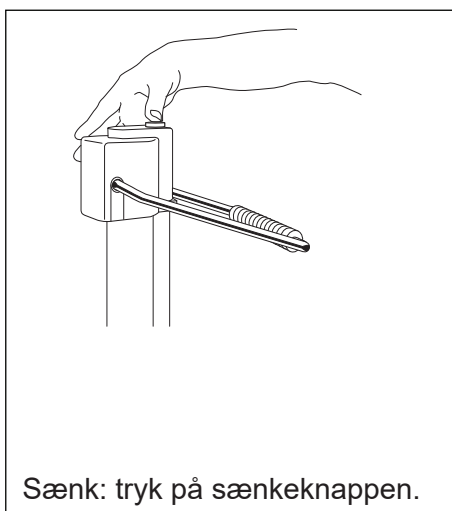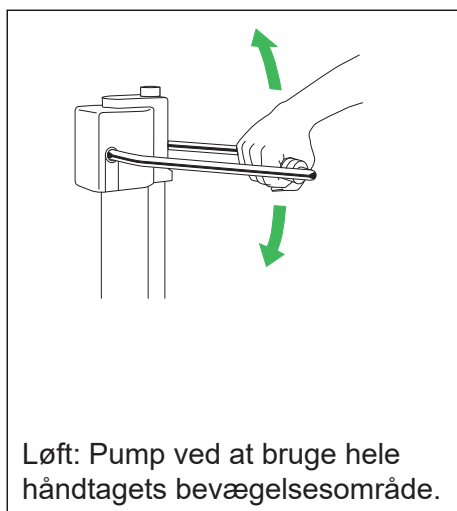


Elektrisk hævnning og sænkning

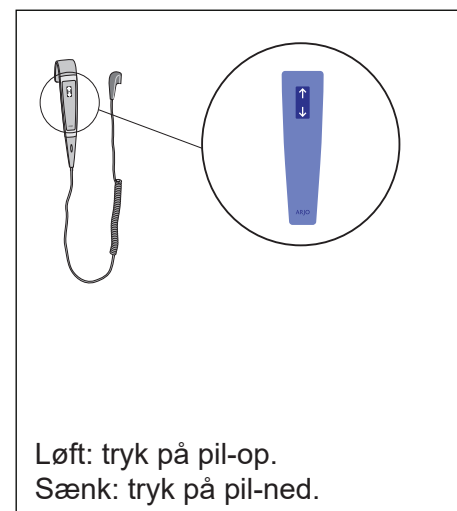

Bremser

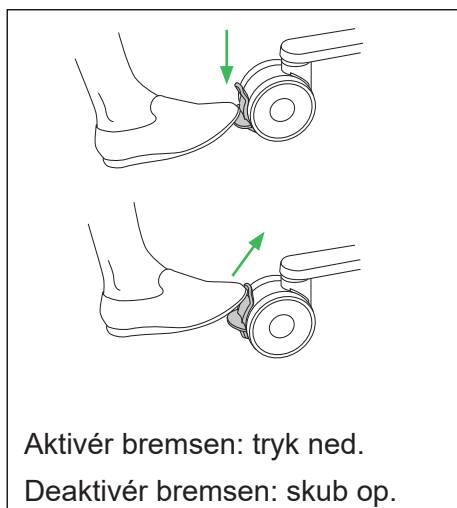

Ryglæn

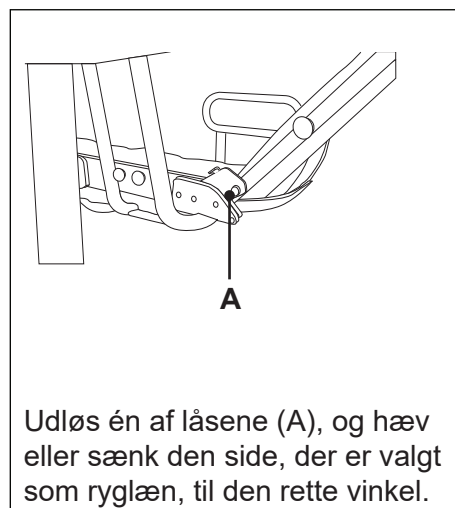


Håndtag




Fastgøring af madrassen

1

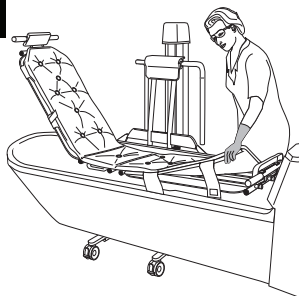


Start altid med kanten af sidebåndet, når madrassen skal fastgøres eller løsnes.

2

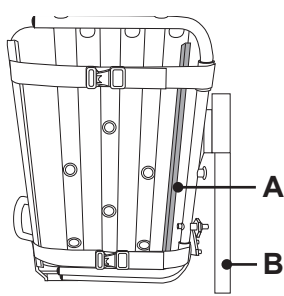

Fastgør sidebåndene (A) rundt om den side af båren, der er ud for hydrauliksøjlen (B). Tryk med håndfladen langs sidebåndet.


3

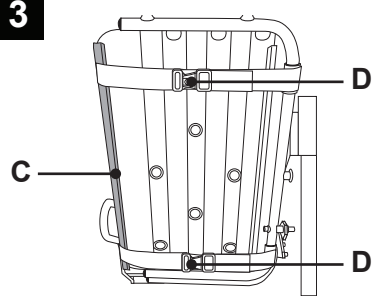

Stræk madrassen, og fastgør det andet sidebånd (C). Fastgør madrassen med spænderne (D).


Justering af bårens længde

1

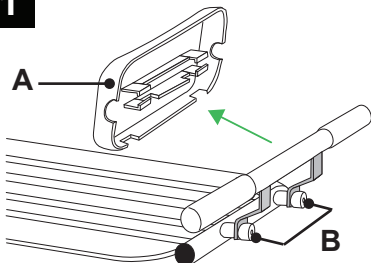

Afmonter hoved- eller fodstøtten (A), og skru skrue (B) ud.

2

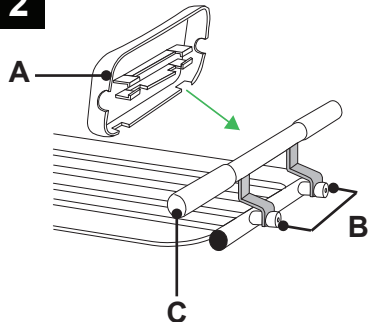

Drej forflytningshåndtaget (C) 180°. Fastgør hoved- eller fodstøtten (A), og stram skrue (B).

