



Penghenti darurat

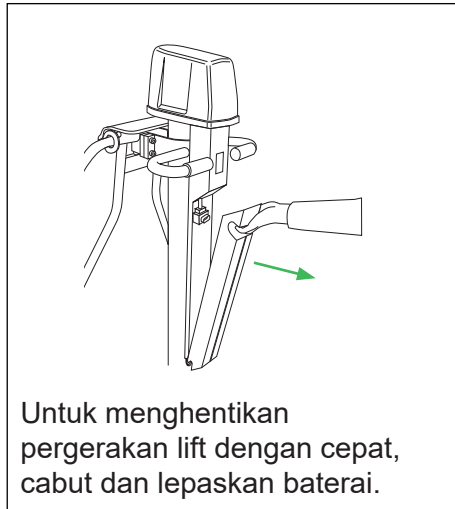


Tinggi dan rendah darurat

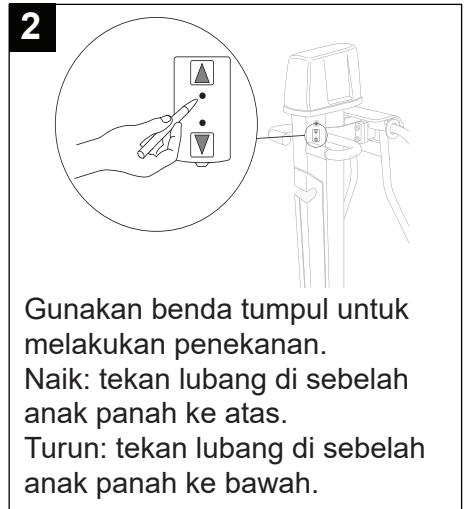


Menaikkan dan menurunkan secara manual



Menaikkan dan menurunkan secara elektrik

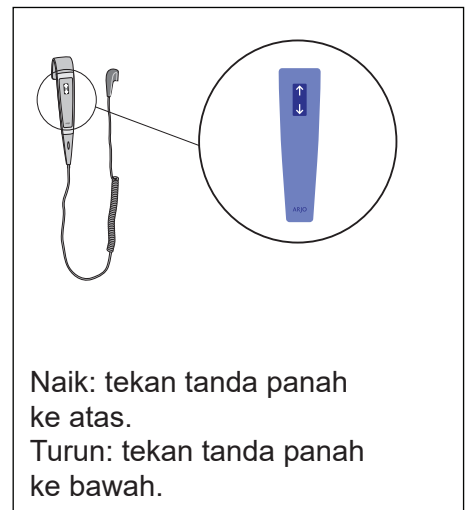


Rem

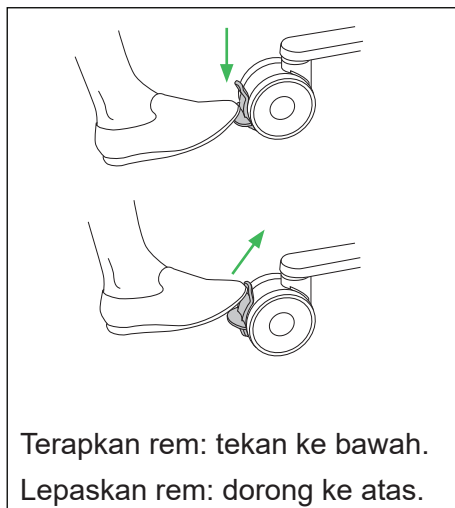

Sandaran Punggung




Pegangan Tangan

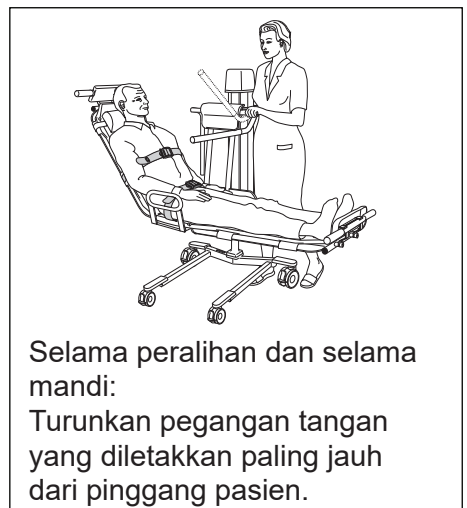


Pasangkan kasur

1

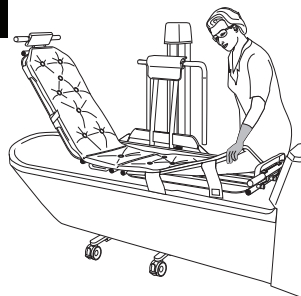


Selalu mulailah dari tepi sisi samping saat memasang atau melepaskan kasur.

2

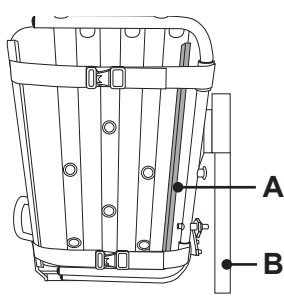

Pasangkan sisi samping (A) di sekeliling sisi tandu di sebelah pilar hidrolik (B). Tekan dan seret telapak tangan di sepanjang sisi samping untuk mengencangkannya.


3

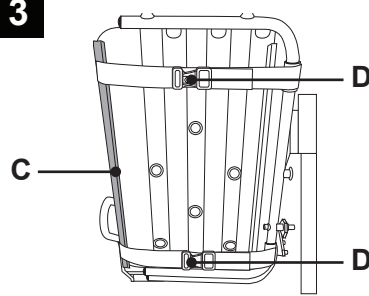

Tarik kasur dan pasang sisi samping lainnya (C). Pasang kasur pada tempatnya dengan pengunci cepat (D).


Penyesuaian panjang tandu

1

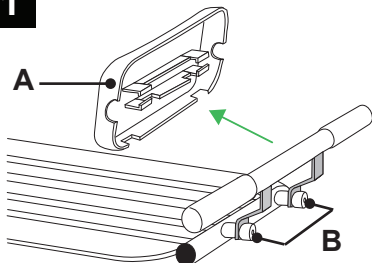

Lepaskan penopang kepala atau kaki (A) dan longgarkan sekrupnya (B).

2

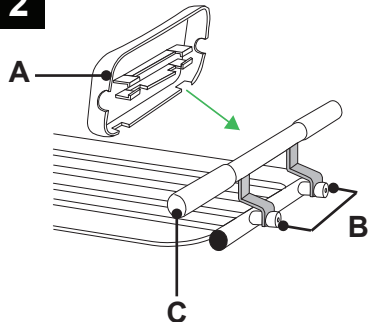

Putar pegangan pemindah (C) 180°. Kencangkan penopang kepala atau kaki (A) dan sekrupnya (B).

