


# Maxi Twin


## Transfer z krzesła

1

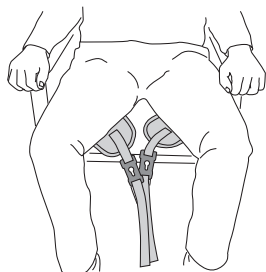

Umieścić nosidło wokół pacjenta w taki sposób, aby osłaniało dolną część pleców a oparcie pod głowę znalazło się za głową. Pociągnąć każdy pas nożny i umieścić pod udami.

2

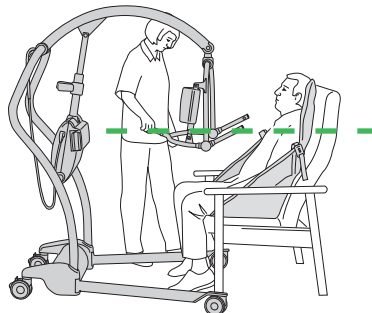


Ustawić podnośnik przed pacjentem. W razie potrzeby rozłożyć nogi podnośnika. Ustawić ramę na wysokości ramion.

3


**Nosidło pętlowe**

**Nosidło zaciskowe**

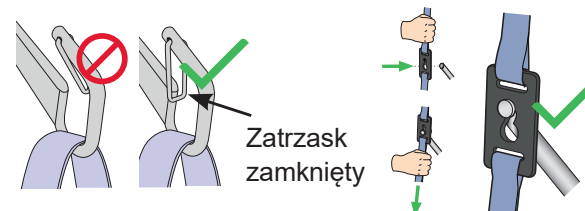

Połączyć zaciski nosidła lub pętle z ramą we właściwych miejscach.

4

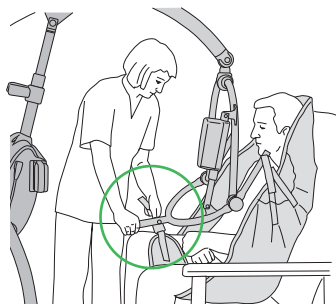

Podnoszenie za pomocą ramy DPS: nacisnąć uchwyt do regulacji pozycji i założyć zaciski pasa.

5



Ryzyko upadku



Ryzyko uwięzienia

Upewnić się, że nie są założone hamulce. Przed podniesieniem pacjenta sprawdzić, czy nosidło jest zabezpieczone.




Przy pomocy pilota podnieść pacjenta, ustawić uchwyt do regulacji pozycji pacjenta w taki sposób, aby pacjent znalazł się w pozycji półleżącej w nosidle.

*Dalsze kroki na następnej stronie*


## Transfer z krzesła (ciąg dalszy)

6

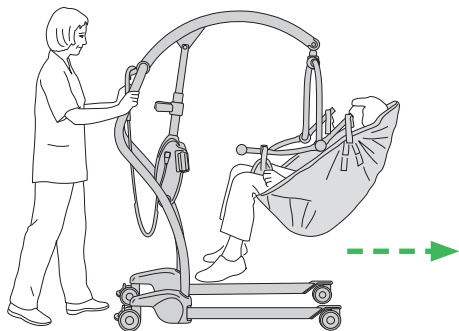


Złożyć nogi podstawy i przenieść pacjenta.

7

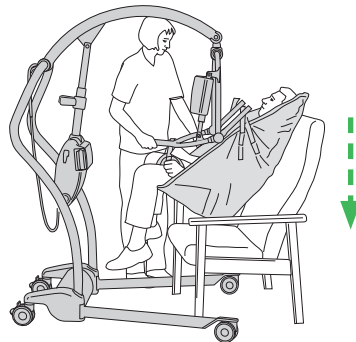

Opuścić pacjenta i umieścić go w wygodnej pozycji, ustawiając odpowiednio uchwyt do regulacji pozycji.


8

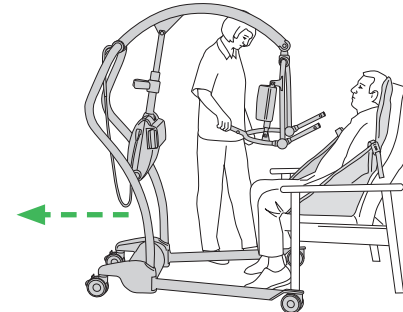

Odłączyć nosidło od ramy.  
Odsunąć podnośnik, upewniając się wcześniej, że nogi i tułów pacjenta nie dotykają podnośnika.  
Wyjąć nosidło spod pacjenta.


## Przenoszenie z łóżka

1

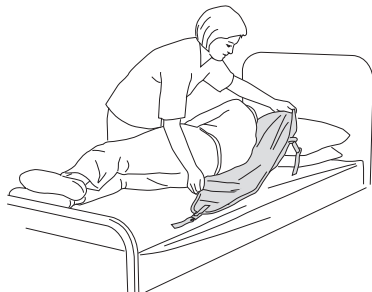


Przetoczyć pacjenta na swoją stronę. Złożyć nosidło w połowie i ułożyć za plecami pacjenta.

2

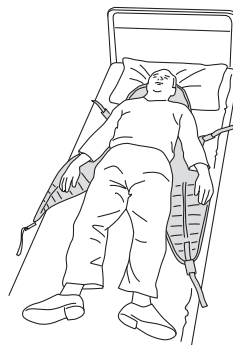

Ustawić nosidło w taki sposób, aby plecy pacjenta zostały centralnie przysunięte do nosidła.

3

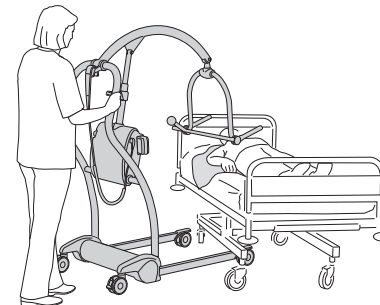


Przysunąć do łóżka otwartą część ramy w kierunku klatki piersiowej pacjenta.

*Dalsze kroki na następnej stronie*

## Transfer z łóżka (ciąg dalszy)


4

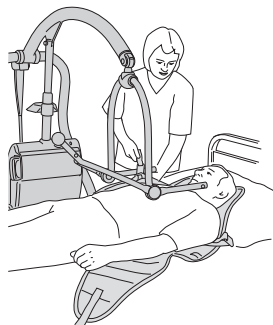


Ustawić ramę tuż nad pacjentem. Nachylić ramę, tak aby ucha elementu podtrzymującego barki można było połączyć z nosidłem.

5

Nosidło pętlowe

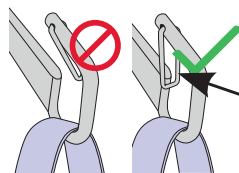


Nosidło zaciskowe

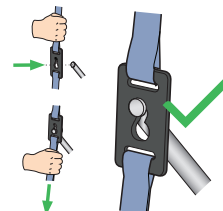

Zatrask zamknięty

Połączyć zaciski nosidła lub pętle z ramą we właściwych miejscach.

6

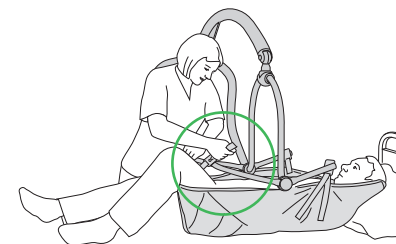

Podnoszenie za pomocą ramy DPS: Segmenty nożne powinny się znaleźć pod udami. Nacisnąć uchwyt do regulacji pozycji i założyć zaciski pasa.


7



Ryzyko upadku




Ryzyko uwięzienia

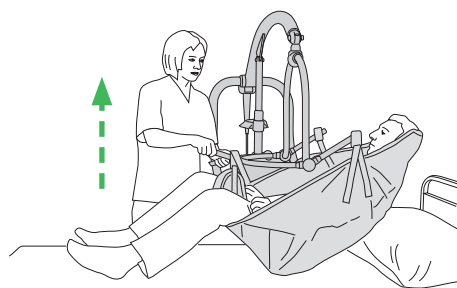

Upewnić się, że nie są założone hamulce. Przed podniesieniem pacjenta sprawdzić, czy nosidło jest zabezpieczone.


Podnieść pacjenta przy użyciu pilota i ustawić go w komfortowej pozycji. Przenieść pacjenta.

8

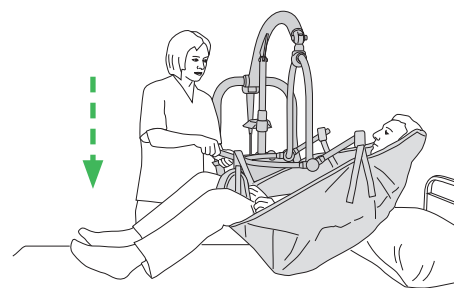

Podczas powrotu do łóżka: używając uchwytów do podnoszenia nosidła, ustawić pacjenta nad łóżkiem. Nie ciągnąć za nosidło. Użyć pilota do obniżenia pacjenta.

9

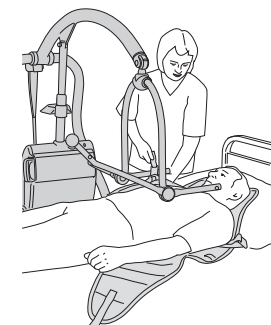

Odłączyć nosidło od ramy. Odsunąć podnośnik, upewniając się wcześniej, że nogi i tułów pacjenta nie dotykają podnośnika. Wyjąć nosidło spod pacjenta.

