


# Maxi Twin


## 의자에서 환자 이송

1

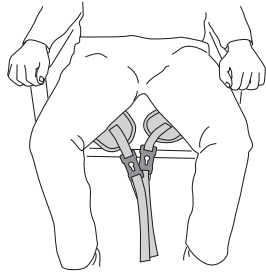

환자 주위에 슬링을 배치하여 슬링은 등 아래 부분을 감싸고 머리 지지대는 머리 뒷 부분을 감싸도록 합니다. 다리를 각각 당겨 허벅지 아래에 놓습니다.

2

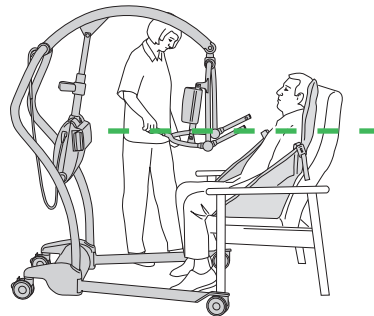


환자의 앞에 리프트를 놓습니다. 필요 시, 새시 다리를 벌리십시오. 스프레더 바를 어깨 높이로 조정하십시오.

3


루프 슬링

클립 슬링

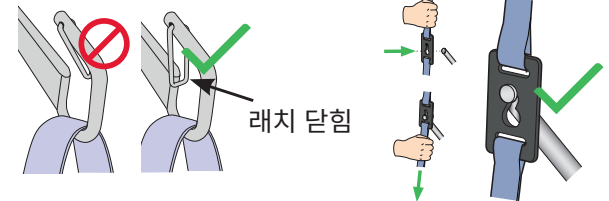

슬링 부착 클립 또는 루프를 스프레더 바의 적당한 지점에 연결합니다.

4

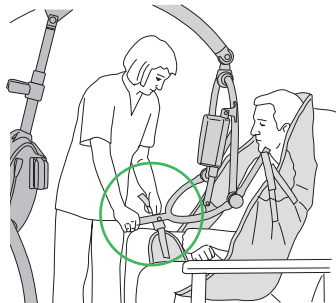

DPS 스프레더 바를 사용한 리프트의 경우: 위치 조정 핸들을 아래로 눌러 다리끈 클립을 장착합니다.

5



낙상 위험



걸릴 위험

브레이크가 적용되지 않았는지 확인합니다. 환자를 들어 올리기 전에 슬링이 고정되어 있는지 확인하십시오.




핸드셋 제어장치를 사용하여 환자를 들어 올리고, 위치 조정 핸들을 환자가 슬링에 비스듬히 누울 때까지 조정합니다.

다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨


## 의자에서 환자 이송(계속)

6

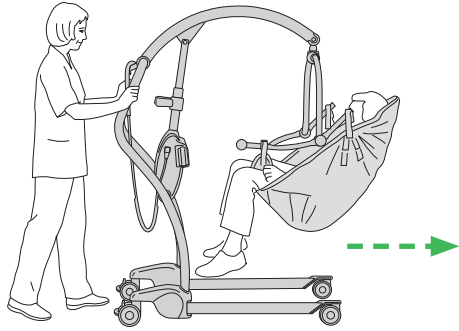


새시 다리를 모으고 환자를 이송합니다.

7

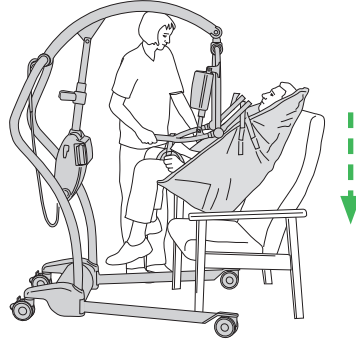

환자를 하강시키고 위치 조정 핸들을 조정하여 환자가 적절한 자세를 취하도록 하십시오.


8

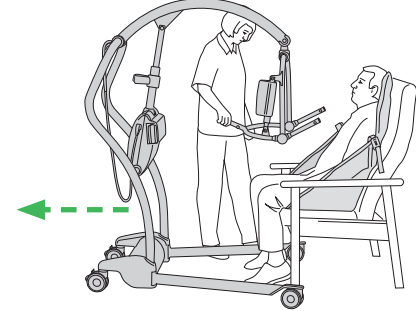

슬링을 스프레더 바에서 분리합니다.  
리프트를 제거하고, 환자의 발과 몸이 리프트에서 떨어졌는지 확인합니다.  
환자로부터 슬링을 분리하십시오.

## 침대에서 환자 이송

1

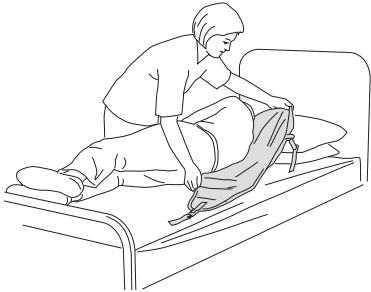


환자가 귀하를 향하여 구르도록 합니다. 슬링을 반으로 접고 환자의 등 뒤에 놓습니다.

2



슬링을 위치시켜 환자가 슬링의 중앙으로 다시 구르도록 합니다.

3

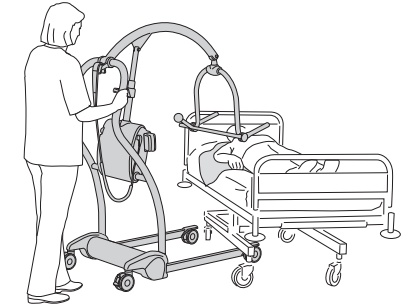


스프레더 바의 입구 부분을 환자의 가슴으로 향하게 하여 침대에 접근합니다.

다음 페이지에서 이후 단계가 계속됨

## 침대에서 환자 이송(계속)


4

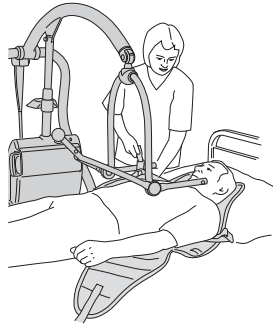

스프레더 바를 환자의 바로 위에 놓습니다. 어깨 부착 러그가 슬링에 연결될 수 있을 때까지 스프레더 바를 기울입니다.


5

루프 슬링

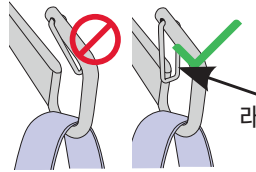

래치 닫힘

클립 슬링

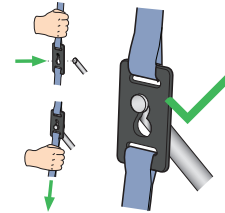

슬링 부착 클립 또는 루프를 스프레더 바의 적당한 지점에 연결합니다.

6



DPS 스프레더 바를 사용한 리프트의 경우: 다리부분을 허벅지 아래로 가져와야 합니다. 위치 조정 핸들을 아래로 눌러 다리끈 클립을 장착합니다.


7



낙상 위험




걸릴 위험

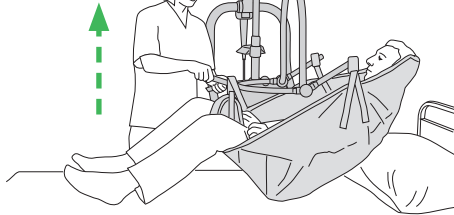

브레이크가 적용되지 않았는지 확인합니다. 환자를 들어 올리기 전에 슬링이 고정되어 있는지 확인하십시오.


핸드셋 제어장치를 사용하여 환자를 들어 올린 다음 환자를 편안한 위치로 조정합니다. 환자를 운반하십시오.

8

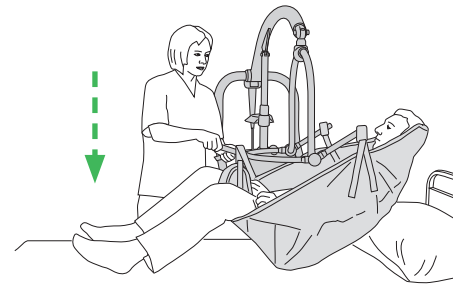

침대로 돌아갈 경우: 슬링 리프트 핸들을 사용하여 환자를 침대 위에 위치시킵니다. 슬링을 당기지 마십시오. 핸드셋 제어장치를 사용하여 환자를 내려놓습니다.

9

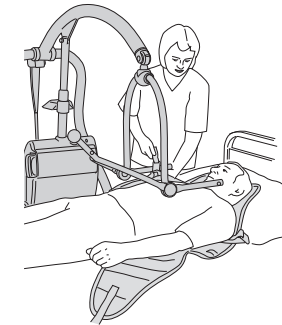

슬링을 스프레더 바에서 분리합니다. 리프트를 제거하고, 환자의 발과 몸이 리프트에서 떨어졌는지 확인합니다. 환자로부터 슬링을 분리하십시오.

