


„Maxi Twin“


Perkėlimas nuo kėdės

1

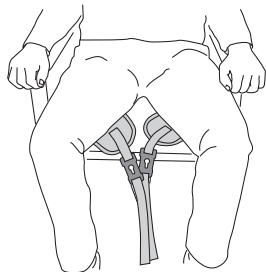

Apgaubkite pacientą nešykle, kad nešyklė dengtų paciento nugaros apačią, o galvos laikiklio dalis dengtų galvą. Pastumkite kiekvieną koją laikančiąją dalį ir pakiškite po kiekvieną koją.

2

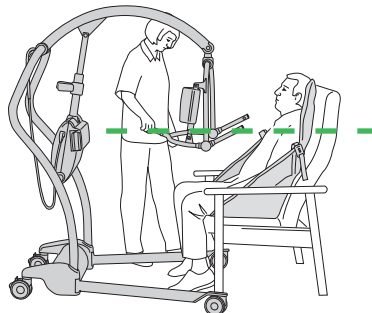


Pastatykite keltuvą prieš pacientą. Jei reikia, išskėskite važiuoklės kojas. Skėtiklį nuleiskite į pečių aukštį.

3


Kilpinė nešyklė

Nešyklė su spaustukais

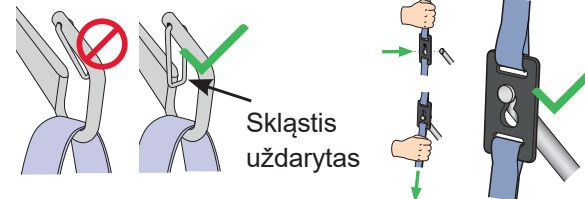

Pritvirtinkite nešyklės sagtis ar kilpas prie atitinkamų tvirtinimo vietų ant skėtiklio.

4

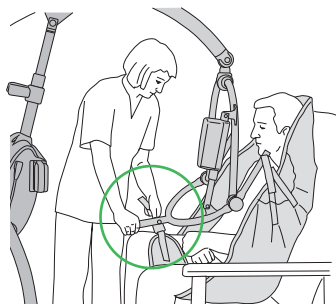

Keltuvuose su DPNS skėtikiu: nuspauskite žemyn padėties nustatymo rankeną ir pritvirtinkite kojų diržo spaustukus.

5



Nukritimo
rizika



Išstigimo
rizika

Patikrinkite, ar neįjungti stabdžiai. Prieš keldami pacientą įsitikinkite, kad nešyklė pritvirtinta.




Naudodami rankinio valdymo pultą pakelkite pacientą ir reguliuokite padėties nustatymo rankeną, kol pacientas atsiloš nešyklėje.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus


Perkėlimas nuo kėdės (tęsiny)

6

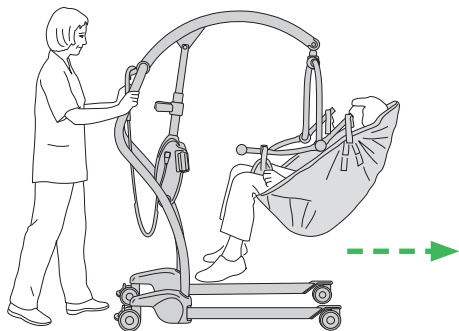


Suglauskite važiuoklės kojas ir gabenkite pacientą.

7

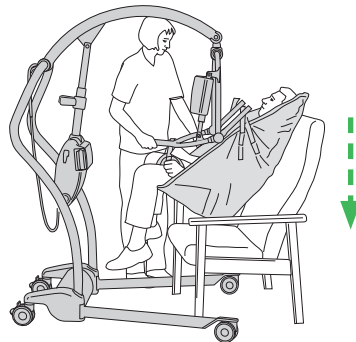

Nuleiskite pacientą ir padėties nustatymo rankeną nustatykite taip, kad pacientas atsidurtų tinkamoje padėtyje.


8

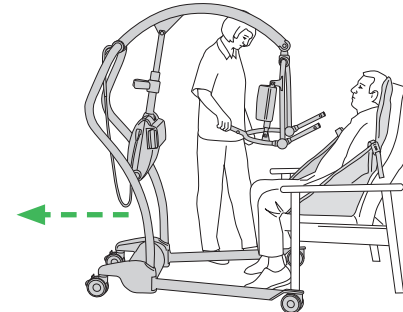

Atkabinkite nešyklę nuo skėtiklio. Atitraukite keltuvą įsitikinę, kad paciento pėdos ir kūnas jam netrukdo. Ištraukite iš po paciento nešyklę.


Perkėlimas nuo lovos

1

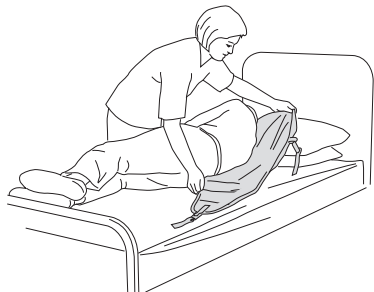


Paverskite pacientą link savęs. Sulenkite nešyklę per pusę ir patieskite ją už paciento nugaros.

2

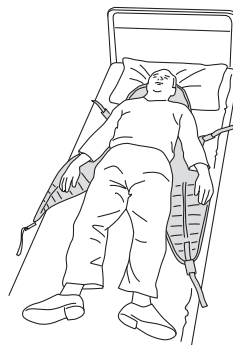

Nešyklę patieskite taip, kad atgal atverstas pacientas gulėtų per jos vidurį.

3

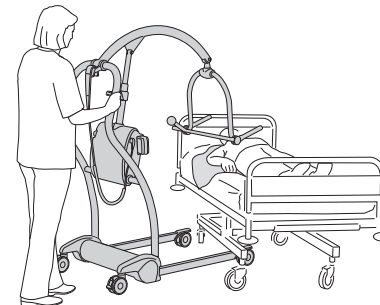


Priartėkite prie lovos su atverta skėtiklio puse link paciento krūtinės.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

Perkėlimas nuo lovos (tęsinys)


4

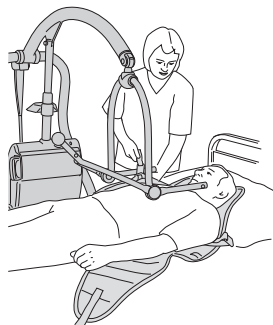

Skėtiklį nustatykite taip, kad jis būtų tiesiai virš paciento. Palenkite skėtiklį žemyn, kad prie nešyklės būtų galima prikabinti pečių tvirtinimo kilpas.


5

Kilpinė nešyklė

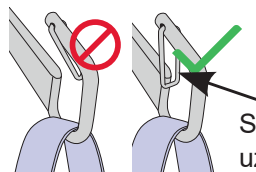

Skląstis uždarytas

Nešyklė su spaustukais

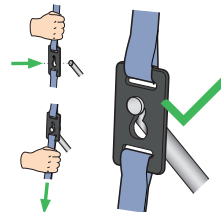

Pritvirtinkite nešyklės sagtis ar kilpas prie atitinkamų tvirtinimo vietų ant skėtiklio.

6



Keltuvuose su DPNS skėtikliu: Kojas laikančias dalis reikia pakisti po šlaunimis. Nuspauskite žemyn padėties nustatymo rankeną ir pritvirtinkite kojų diržo spaustukus.


7



Nukritimo rizika




Įstrigimo rizika

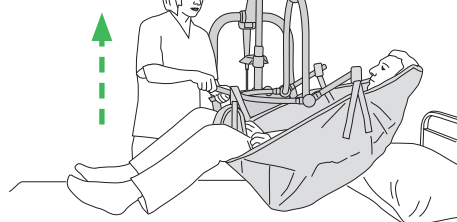

Patikrinkite, ar neįjungti stabdžiai. Prieš keldami pacientą įsitikinkite, kad nešyklė pritvirtinta.


Kelkite pacientą reguliuodami rankinio valdymo pultu ir nustatykite patogią jam padėtį. Perkelti pacientą.

8

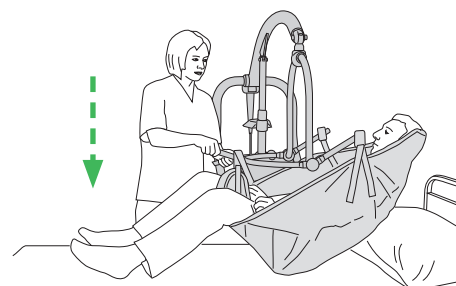

Grąžinant į lovą: nešyklės kėlimo rankenomis pakreipkite pacientą virš lovos. Nešyklės netraukite. Reguluodami rankinio valdymo pultu nuleiskite pacientą.

9

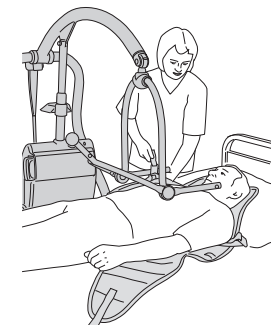

Atkabinkite nešyklę nuo skėtiklio. Atitraukite keltuą įsitikinę, kad paciento pėdos ir kūnas jam netrukdo. Ištraukite iš po paciento nešyklę.

