



FD1800, FD1805

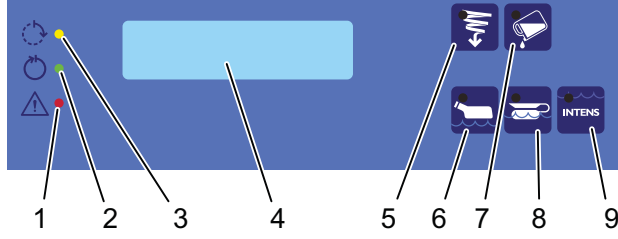

FD1810

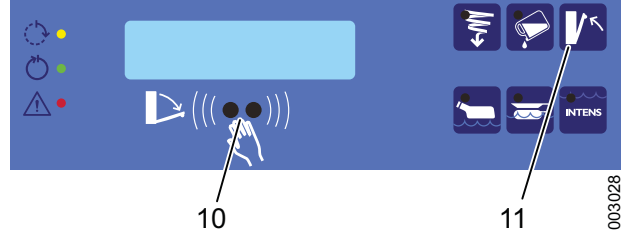

	Fonksiyon
1	Kırmızı: Hata bildirimi. Ekranda bir hata mesajı gösterilir.
2	Yeşil: Program tamamlandı. Kapak açıldığında ışık söner ve kısa bir süre için ekranda bir pencerede program özeti gösterilir, örneğin maksimum sıcaklık.
3	Yanıp sönen sarı: Program sona erdirilebilir. Sarı: Program çalışıyor. Ekran o anki durumu gösterir, örneğin temizlik aşaması ve sıcaklık.
4	Ekran. Servis teknisyeni ekranda görüntülenecek bilgiyi girebilir.
5	Tazyikli durulama seçme düğmesi.
6	Az kirli malzemeler için ekonomik program seçimi düğmesi.
7	Temizlik maddesi seçme düğmesi (opsiyonel).
8	Normal kirli malzemeler için normal program seçimi düğmesi.
9	Yoğun kirli malzemeler için yoğun program seçme düğmesi.
10	Kapağı açmak/kapatmak ve önceden seçilen programı başlatmak için IR sensörü (opsiyonel).
11	Kapağı açma/kapatma düğmesi (opsiyonel).

Kod	Açıklama	İşlem
U1	Kireç çözücü seviyesi düşük	Kireç çözücü ekleyin.
U2	Deterjan seviyesi düşük	Deterjan ekleyin (opsiyonel).
U3	Parlatıcı seviyesi düşük	Parlatıcı ekleyin (opsiyonel).
U6	İnceleme gerekiyor	Yetkili servis personeli ile iletişime geçin.
U7	Yüksek malzeme sıcaklığı uyarısı	Malzemelerin soğumasını bekleyin.
U8	Harici iletişim	Harici iletişim kesildi.
U9	Eylemsizlik uyarısı	Makine 72 saat boyunca kullanılmadı. Malzeme temizliği için kullanmadan önce makineyi içi boşken bir programda bir kez çalıştırın.
H1	Kireç çözücü bitmiş	Kireç çözücü ekleyin.
H3	Parlatıcı bitmiş	Parlatıcı ekleyin.
H6	Kapak açıkken çalışma denemesi	Kapağı kapatın (makine yeniden başlamayı deneyecektir). Hata tekrarlanırsa, yetkili servis personeli ile iletişime geçin.
H7	Düşük pil	Yetkili servis personeli ile iletişime geçin.

F ile başlayan hata kodları için bkz. Kullanım Talimatları.