




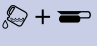





- |                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Geltona: Procesas vyksta       | 6. Taupymo programa                                            |
| 2. Žalia: Procesas baigtas        | 7. Įprasta programa                                            |
| 3. Raudona: įspėjimas apie klaidą | 8. Intensyvi programa<br>(S-608: krepšelio naikinimo programa) |
| 4. Ekranas                        | 9. Dezinfekavimo priemonė                                      |
| 5. Kraštų apiplovimas             |                                                                |

**NOTE! Jei pasirodo gedimo kodas F, kvieskite techninės priežiūros specialistą. Kai dega raudona lemputė ir rodomas gedimo kodas F, nemėginkite atidaryti dangčio jėga.**

	Funkcija
	Blykčiojanti geltona lemputė: programą galima nutraukti. Geltona: vykdoma programa. Ekrane rodoma einamoji būseną, pavyzdžiui, plovimo fazė ir temperatūra.
	Žalia: programa baigta. Lemputė užgesa visiškai atidarius dangtį ir ekrane trumpai rodoma programos suvestinė, pavyzdžiui, maksimali proceso temperatūra
	Raudona: įspėjimas apie klaidą. Ekrane rodomas klaidos pranešimas.
	Taupymo programos pasirinkimo mygtukas: plauti nedaug užterštus daiktus, pavyzdžiui, šlapimo buteliukus.
	Įprastos programos pasirinkimo mygtukas: plauti įprastai užteršus daiktus.
<b>INTENS</b>	Intensyvios programos pasirinkimo mygtukas: plauti ypač užterštus daiktus. S-608: maišelio naikinimo programos pasirinkimo mygtukas.
	Mygtukų kombinacija programai su plovimo priemone bendro daugkartinio naudojimo priemonėms, pavyzdžiui, rankų dubenims pasirinkti.
	Mygtukų kombinacija programai su valymo priemone labai nešvariems daiktams, pavyzdžiui, žaizdų perrišimo instrumentams pasirinkti.
	Svarbu! Be dezinfekavimo! Mygtukas, skirtas įjungti kraštų apiplovimą. Kraštų plovimo negalima pradėti paspaudus pedalą.
	Paspaudus pedalą, įjungiama pasirinkta programa. Kai programa baigta ir dangtis šiek tiek praviras, pedalas jį atidaro iki galo.