




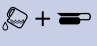





- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Жълто: Процес в действие    | 6. Икономична програма  |
| 2. Зелено: Процесът е завършил | 7. Нормална програма  |
| 3. Червено: Отчитане на грешка | 8. Интензивна програма (S-608: програма за унищожаване на пликчета) |
| 4. Дисплей                     | 9. Почистващ препарат   |
| 5. Промиване на рамката        |   |

**ЗАБЕЛЕЖКА! Ако се покаже код на грешка F, свържете се със сервизния персонал. Когато червеният светоиндикатор свети и се показва код на грешка F, не отваряйте капака със сила.**

	Функция
	Премигване в жълто: Програмата може да бъде прекратена. Жълто: Изпълнява се програма. На дисплея се показва текущият статут, например фазата на почистване и температурата.
	Зелено: Програмата е завършена. Светоиндикаторът изгасва, когато капакът е напълно отворен и за кратко време на дисплея се показва информация за програмата в прозореца, например максималната температура.
	Червено: Отчитане на грешка. На дисплея се изписва съобщение за грешката.
	Бутон за избиране на икономична програма за слабо замърсени изделия, например шишета за урина.
	Бутон за избиране на нормална програма за нормално замърсени изделия.
<b>INTENS</b>	Бутон за избиране на интензивна програма за силно замърсени изделия. S-608: Бутони за избор на програма за унищожаване на пликчета.
	Комбинацията от бутони за избор на програма с детергент за изделия с общо предназначение, например купи.
	Комбинацията от бутони за избор на програма с детергент за силно замърсени изделия, например инструменти, използвани при превръзка на рани.
	Забележка! Без дезинфекция! Бутон за стартиране на промиване на рамката. Промиването на рамката не може да бъде стартирано посредством крачния педал.
	Крачният педал стартира избраната програма. Когато програмата приключи и капакът бъде леко отворен, крачният педал го отваря напълно.