




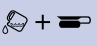





001443

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Сары: Процесс іске қосылуда | 6. Үнемдеу бағдарламасы |
| 2. Жасыл: Процесс аяқталды | 7. Қалыпты бағдарлама |
| 3. Қызыл: Қате көрсеткіші | 8. Қарқынды бағдарлама (S-608: Қапшық бұзғыш бағдарламасы) |
| 4. Экран | 9. Жуғыш құрал |
| 5. Периметрі бойынша шаю | |

ЕСКЕРТПЕ! F ақау коды пайда болса, сервис маманына хабарласыңыз. Қызыл шам жанып, F ақау коды көрсетілген кезде, қақпақты күшпен ашпаңыз.

| | Функция |
|---|--|
|  | Сары түс жыпылықтайды: Бағдарлама тоқтатылады. Сары: Бағдарлама орындалуда. Экран ағымдағы күйді көрсетеді, мысалы, тазалау фазасын және температураны. |
|  | Жасыл: Бағдарлама аяқталды. Қақпақ толық ашылған кезде жарық өшеді және қысқа уақытта экран терезедегі бағдарлама мәліметтерін көрсетеді, мысалы, ең жоғары температура. |
|  | Қызыл: Қате көрсеткіші. Экран қате туралы хабарды көрсетеді. |
|  | Аз ластанған заттарға арналған, мысалы несеп бөтелкелері үшін, үнемдеу бағдарламасын таңдау түймесі. |
|  | Қалыпты ластанған заттарға арналған қалыпты бағдарламасын таңдау түймесі. |
| INTENS | Қатты ластанған заттарға арналған қарқынды бағдарламасын таңдау түймесі. S-608: Қапшықты бұзғыш бағдарламасын таңдау түймесі. |
|  | Затты, мысалы қолға арналған ыдыстарды жалпы айналдыру үшін жуғыш құралмен бағдарламаны таңдау түйме тіркесімі. |
|  | Қатты ластанған заттар, мысалы жарақатты таңуға арналған құралдар үшін жуғыш құралмен бағдарламаны таңдау түйме тіркесімі. |
|  | Ескертпе! Зарасыздандырусыз! Периметрі бойынша шаюды бастау түймесі. Периметрі бойынша шаюды басқышпен бастау мүмкін емес. |
|  | Басқыш таңдалған бағдарламаны іске қосады. Бағдарлама аяқталып, қақпағы аздап ашылған кезде, басқыш қақпақты толығымен ашады. |