



FD1800, FD1805

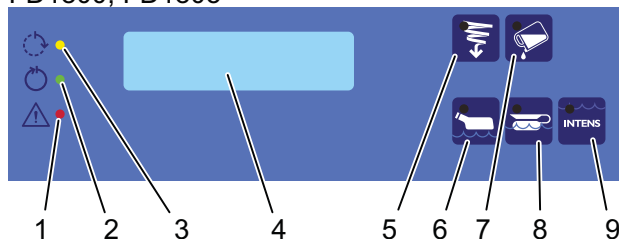

FD1810

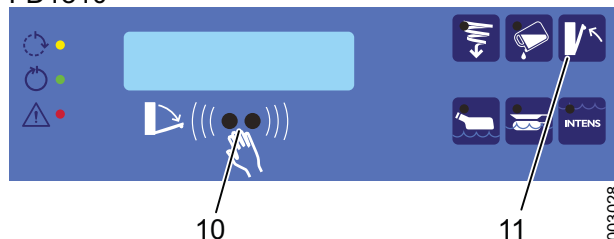

	Funkcija
1	Crvena: Indikacija greške. Na ekranu se prikazuje poruka o grešci.
2	Zelena: Program je završen. Ova lampica se isključuje kada se otvore vrata. Na ekranu se tokom kraćeg vremena prikazuje rezime programa u prozoru, na primer, maksimalna temperatura.
3	Trepereća žuta: Program može da se prekine. Žuta: Program je u toku. Na ekranu se prikazuje trenutni status, na primer, faza čišćenja i temperatura.
4	Ekran: Serviser može da podesi informacije koje će se prikazati na ekranu.
5	Dugme za izbor ispiranja ruba.
6	Dugme za izbor ekonomičnog programa za blago zaprljane artikle.
7	Dugme za izbor agensa za čišćenje (opcija).
8	Dugme za izbor normalnog programa za uobičajeno zaprljane artikle.
9	Dugme za izbor intenzivnog programa za veoma uprljane artikle.
10	Infracrveni senzor za otvaranje/zatvaranje vrata i pokretanje unapred izabranog programa (opcija).
11	Dugme za otvaranje/zatvaranje vrata (opcija).

Kôd	Opis	Mera za ispravljanje
U1	Nizak nivo sredstva za uklanjanje kamenca	Dopunite sredstvo za uklanjanje kamenca.
U2	Nizak nivo procesnog sredstva	Dopunite procesno sredstvo (opcija).
U3	Nizak nivo sredstva za ispiranje	Dopunite sredstvo za ispiranje (opcija).
U6	Zahtev za pregled	Kontaktirajte ovlašćeno servisno osoblje.
U7	Upozorenje o visokoj temperaturi artikala	Pustite da se artikli ohlade.
U8	Eksterna komunikacija	Eksterna komunikacija je prekinuta.
U9	Upozorenje o neaktivnosti	Mašina je neaktivna već 72 časa. Morate da pokrenete program za praznom komorom pre korišćenja mašine za čišćenje artikala.
H1	Nema sredstva za uklanjanje kamenca	Dopunite sredstvo za uklanjanje kamenca.
H3	Nema sredstva za ispiranje	Dopunite sredstvo za ispiranje.
H6	Pokušaj pokretanja sa otvorenim vratima	Zatvorite vrata (mašina će pokušati da se pokrene ponovo). Ako se ponovo javi greška, kontaktirajte ovlašćeno servisno osoblje.
H7	Baterija je prazna	Kontaktirajte ovlašćeno servisno osoblje.

Kodove grešaka tipa F potražite u uputstvu za upotrebu.