


Maxi Sky 2




Comando manual

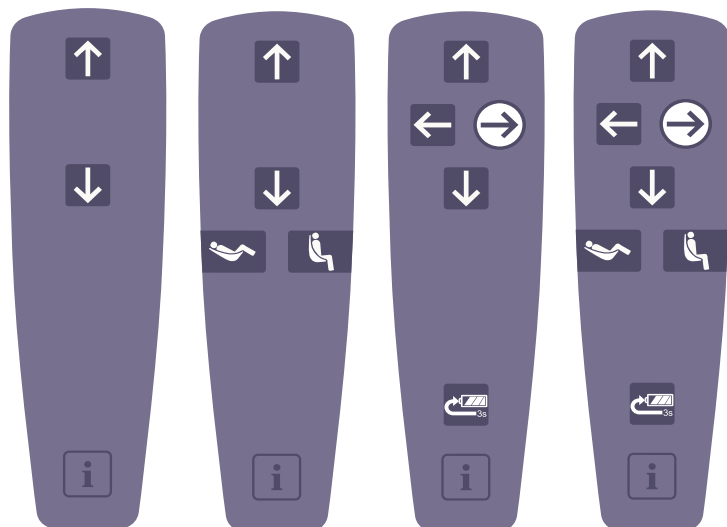


- Botão Para cima**
- Botão Para baixo**
- Botão Direita**
- Botão Esquerda**
- Botão Reclinado** (apenas DPS motorizado)
- Botão Sentado** (apenas DPS motorizado)
- RTC** (Retorno à carga)
- Botão RTH** (Retorno à posição inicial)
- Botão de Programação / Informação**

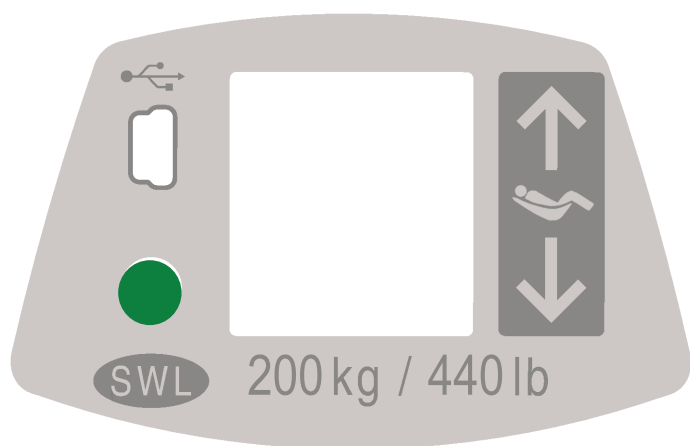


Painel de controlo





- Botão Cima-Baixo auxiliar**
Os botões para cima e para baixo são utilizados para concluir uma transferência caso ocorra algum problema com o comando manual durante o funcionamento.
- LED do estado**
O LED é um complemento do visor que se destina a chamar a atenção para a mensagem que está a ser apresentada no ecrã.
- SWL**
A etiqueta indica a capacidade de elevação máxima do elevador.
- Porta de acesso USB**
A porta USB destina-se apenas aos utilizadores do MAXISMART.


Símbolos no visor

 **Nível de carga da bateria**

 100%
 75% Intervalo de funcionamento normal
 50%

 25% Fraca
Associada a um sinal sonoro curto quando um botão é premido


 < 5% Crítico
Os ícones alternam com dois sinais sonoros curtos a cada 10 segundos


 **Indicador do Sistema de carregamento avançado (Enhanced Charging System, ECS)**
Apresentado ao carregar unidades com o ECS.


 **Retorno à carga (RTC)**
Indica que a função RTC foi ativada pelo comando manual.


 **Retorno à posição inicial (RTH)**
Indica que a função RTH foi ativada pelo comando manual.

 **Posição pré-programada (PPP)**
Indica que a função PPP foi ativada pelo comando manual.

 **Ciclo de trabalho excedido**
O símbolo pisca quando o elevador é utilizado por um longo período de tempo sem ter tempo para arrefecer.
A proteção contra sobreaquecimento é acionada quando uma função exceder o ciclo de trabalho e é desativada enquanto todas as outras funções se mantêm ativas.
A luz vermelha permanece acesa durante o período de arrefecimento e é emitido um único sinal sonoro.
O símbolo desaparece quando a função tiver arrefecido e estiver para ser utilizada novamente.


 **Avaria geral** (Símbolo de aviso associado a um carácter numérico)
Pisca quando o elevador encontra uma avaria.
O elevador tem de ser inspecionado ou reparado por um técnico de assistência qualificado.
A luz vermelha mantém-se acesa e é emitido um único sinal sonoro.

 **Pedido de manutenção** (Símbolo de chave inglesa associado a um carácter de letra)
Apresentado durante 7 segundos (associado a 2 sinais sonoros) quando o elevador sai do modo Em espera e pisca de 5 em 5 segundos para chamar a atenção do utilizador.
A unidade pode ser utilizada, mas a manutenção deve ser realizada logo que possível por um técnico da Arjo.

 **Excesso de peso**
Pisca quando é feita uma tentativa de transferência com uma carga superior à capacidade do elevador.
A luz vermelha mantém-se acesa (associada a 4 sinais sonoros rápidos) até o paciente ser descido.
A função é desativada enquanto todas as outras funções permanecem ativas.


Fixação da barra de suporte e da balança

1

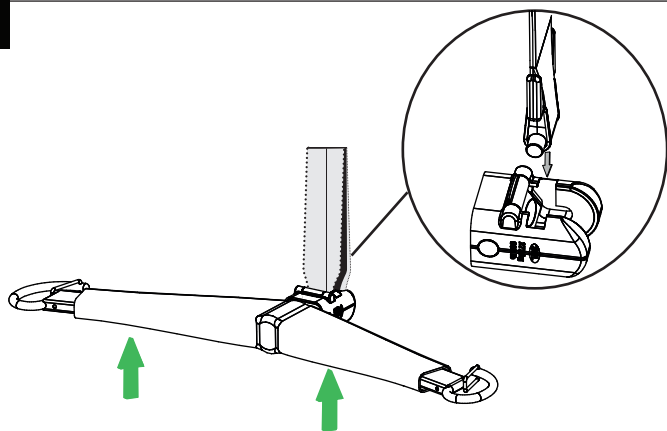

Alinhe o trinco Quick-Connect da barra de suporte a um ângulo de 90 graus com o gancho. Introduza o gancho no Quick-Connect.


2

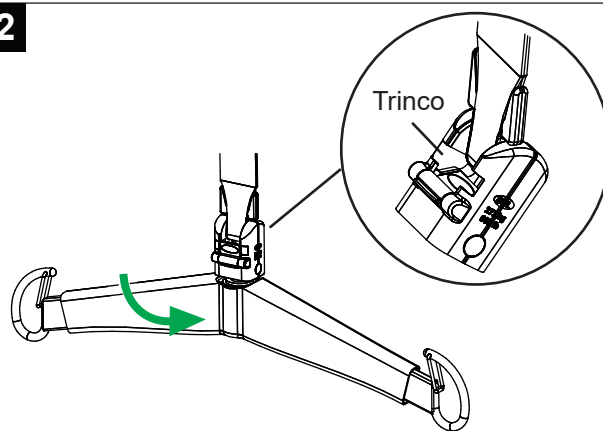

Mova a barra de suporte para encaixar o gancho no pivô. Rode a barra de suporte para a posição correta. Certifique-se de que o trinco do Quick-Connect está fechado.


Remoção da barra de suporte e da balança

1

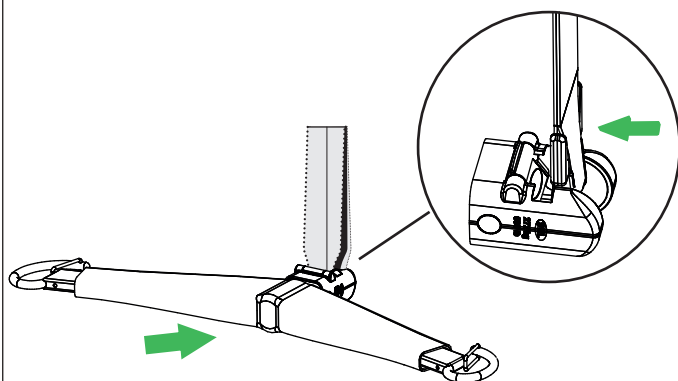

Mova a barra de suporte a um ângulo de 90 graus para desencaixar o gancho do pivô.

2

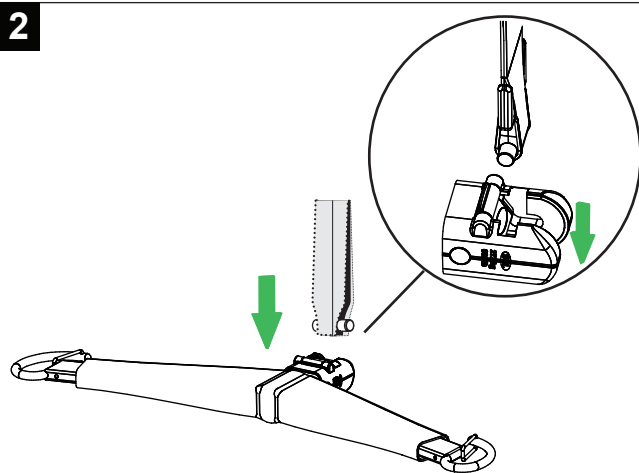

Puxe a barra de suporte para baixo a um ângulo de 90 graus, separando-a do Quick-Connect.


Fixação ou remoção da barra de suporte e da balança (apenas modelo Elevador de teto básico)

1



Insira a extremidade da extensão no acessório da barra de suporte. Insira o pino da manilha através do acessório e do laço na extremidade da extensão.

2

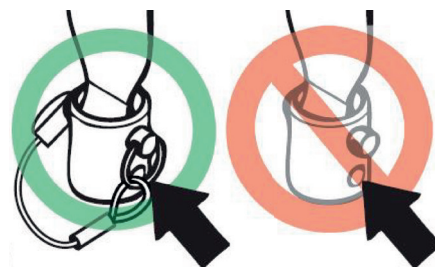

Prenda o pino da manilha com o anel fendido.

