



# Maxi Air


## جهاز فصل الموصلات الرئيسية

## التشغيل وأدوات التحكم

إذا حدث أن وحدة الإمداد بالهواء الخاصة بجهاز *Maxi Air* لم تستجب للزر الانضغاطي، فإنه يتعين عليك وقف النفخ عن طريق سحب سلك الطاقة من المنفذ.


اتصل بالموظف المؤهل في حال حدوث أي عطل.

١. قم بتوصيل سلك الطاقة (أ) بمأخذ كهربائي.
٢. سوف يضيء مصباح LED (ب) للإشارة إلى أن التيار قيد التشغيل.
٣. اضغط على الزر الانضغاطي (ج) لتسوية سطح المرتبة.
٤. لتسوية سطح المرتبة، اضغط على الزر الانضغاطي (ج) مرة أخرى.

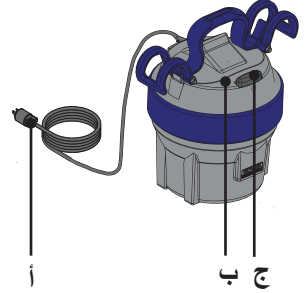

## وضع وحدة الإمداد بالهواء مع خرطوم ممتد (اختياري)

استخدم الخرطوم الممتد إذا تعذر إجراء النقل الجانبي خارج بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي (MR) (أ).

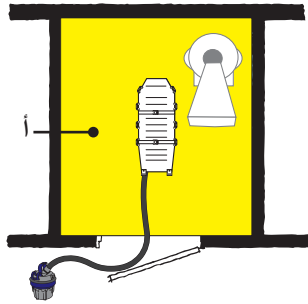


## وضع وحدة الإمداد بالهواء


قم بتعليق وحدة الإمداد بالهواء على سطح الاستقبال بواسطة خطاطيف التعليق.

تجنب وضع وحدة الإمداد بالهواء أمام المنفذ الكهربائي الجاري استخدامه.


تأكد من أن سلك الطاقة على الأرض ملفوف.

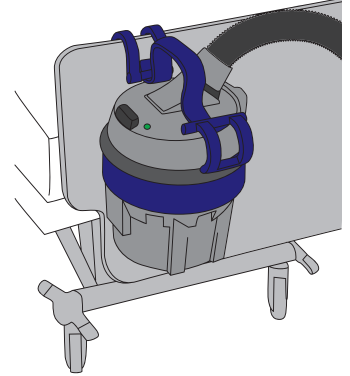


## توصيل وحدة الإمداد بالهواء والمرتبة

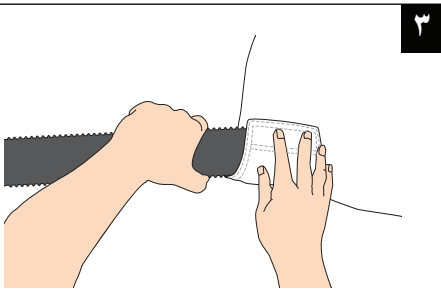

استخدم الحزام اللاصق لتثبيت خرطوم الهواء في مكانه.

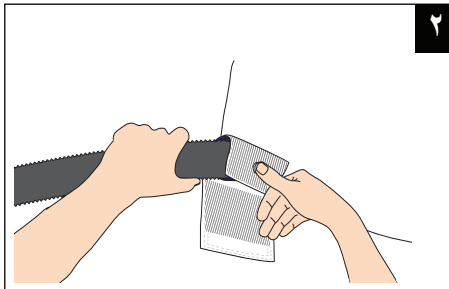

قم بتوصيل زر القفل الانطباقي الخاص بالمرتبة بزر القفل الانطباقي الخاص بالخرطوم.

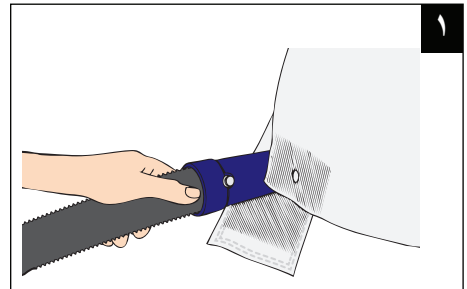

قم بتوصيل خرطوم الهواء من وحدة الإمداد بالهواء بطرف وصلة المرتبة (جهة اليسار أو اليمين).

## إزالة الأوساخ المرئية

١. افصل وحدة الإمداد بالهواء عن مصدر الإمداد بالطاقة وخرطوم الهواء عن المرتبة.
٢. قم بإزالة خرطوم الهواء من وحدة الإمداد بالهواء.
٣. قم بسد منفذ الهواء لوحدة الإمداد بالهواء بقطعة قماش أو منشفة مخصصة للاستخدام مرة واحدة لمنع دخول الرطوبة أو الماء أو سائل التنظيف إلى وحدة الإمداد بالهواء.
٤. قم بتنظيف وحدة الإمداد بالهواء والخرطوم من الأوساخ المرئية باستخدام قطعة قماش أو فرشاة ناعمة منقوعة في الماء أو برشها بالماء ومسحها باستخدام قطعة قماش نظيفة. ابدأ من أعلى وتحرك لأسفل.

### قم بتنظيف

٥. قم برش سائل التنظيف على وحدة الإمداد بالهواء. استخدم فرشاة أو قطعة قماش لإزالة أي ترسبات.
٦. استخدم قطعة قماش رطبة جديدة لمسح كل آثار سائل التنظيف أو من خلال الرش بالماء والمسح بقطعة قماش نظيفة. ينبغي شطف قطعة القماش من حين لآخر في مياه جارية.
٧. قم بلف خرطوم الهواء وإنزاله في سائل التنظيف. افرك الخرطوم بفرشاة. ومن ثم، اشطف خرطوم الهواء بالمياه (٢٥ درجة مئوية تقريباً أو ٧٧ درجة فهرنهايت) للتخلص من سائل التنظيف.

### تعقيم

٨. قم برش سائل التنظيف على وحدة الإمداد بالهواء. قم بالتطهير حسب الوقت المحدد طبقاً للإرشادات المكتوبة على ملصق زجاجة المطهر.
٩. قم بلف خرطوم الهواء وإنزاله في سائل تنظيف جديد. يتعين عليك التطهير حسب الوقت المحدد طبقاً للإرشادات المكتوبة على ملصق زجاجة المطهر.
١٠. استخدم قطعة قماش رطبة جديدة لمسح كل آثار سائل التنظيف أو الرش بالماء والمسح بقطعة قماش نظيفة. ينبغي شطف قطعة القماش من حين لآخر في مياه جارية.
١١. اشطف خرطوم الهواء بالمياه (٢٥ درجة مئوية تقريباً أو ٧٧ درجة فهرنهايت) للتخلص من سائل التنظيف.
١٢. اترك وحدة الإمداد بالهواء حتى تجف وقم بتعليق خرطوم الهواء ليجف في الهواء الطلق.