




Maxi Sky 2 PLUS



Handbedienung




-  **Nach-oben-Taste**
-  **Nach-unten-Taste**
-  **Zurücklehnen-Taste**
-  **Aufrichten-Taste**
-  **Programmierungs-/Informationstaste**

Neigefunktion

Verwenden Sie die Zurücklehnen- bzw. Aufrichten-Taste, um den Patienten in eine zurückgelehnte bzw. aufrechte Position zu bringen.

Beim Einstellen der Position des Patienten wird lediglich der vordere Deckenlifter aktiviert. Unabhängig davon, welche Positionierungstaste gedrückt wird, wird nur die Aufhängung am „Fußende“ angehoben oder abgesenkt.

Bedienfeld

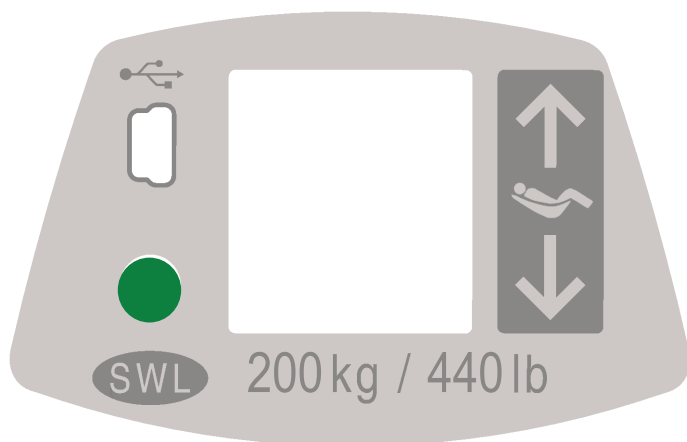

Nach-oben-/unten-Hilfstaste

Verwenden Sie die Tasten Nach oben und Nach unten, um einen Transfer abzuschließen, falls mit der Handbedienung ein Problem aufgetreten ist.



Status-LED

Die LED dient der Ergänzung des Displays und macht darauf aufmerksam, dass auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt wird.



SWL

Das Symbol bezieht sich auf die sichere Arbeitslast des Lifters.



USB-Anschluss

Der USB-Anschluss ist ausschließlich für MAXISMART-Anwender vorgesehen.

Display-Symbole



Akkuladezustand



100%



75%

Normaler Betriebsbereich



50%



25%

Niedrig

Dabei ertönt ein kurzer Signalton, wenn eine Taste gedrückt wird



< 5%

Kritisch

Symbole oszillieren, wobei alle zehn Sekunden zwei kurze Signaltöne zu hören sind



Kontinuierliche Stromversorgung (ECS; Enhanced Charging System)

Wird beim Aufladen des Produkts mittels ECS angezeigt.



Einschaltdauer überschritten („Over Duty Cycle“)

Blinkt, wenn der Lifter für einen langen Zeitraum im Einsatz war, ohne dass er zwischendurch abkühlen konnte.

Der Überhitzungsschutz wird aktiviert, wenn eine Funktion, bei der die Einschaltdauer überschritten wurde, deaktiviert wurde. Alle anderen Funktionen bleiben hingegen in Betrieb.

Das rote Lämpchen leuchtet während der Abkühlphase weiterhin, und ein einmaliger Signalton ertönt. Das Symbol verschwindet, sobald die Funktion sich abgekühlt hat und wieder einsatzbereit ist.



Allgemeine Störung (Warnsymbol mit nachgestellter Ziffer)

Blinkt, wenn es beim Lifter zu einer Störung kommt.

Der Lifter muss von einem Servicetechniker inspiziert oder repariert werden.

Das rote Lämpchen leuchtet weiterhin, und ein einmaliger Signalton ertönt.



Wartungsleistung erforderlich (Schraubenschlüssel-Symbol mit nachgestelltem Buchstaben)

Wird sieben Sekunden lang unter Ausgabe zweier Signaltöne angezeigt, wenn der Lifter aus dem Ruhemodus hochfährt, und blinkt alle fünf Sekunden auf, um die Aufmerksamkeit des Benutzers zu erregen.

Wenden Sie sich an Ihr Arjo-Servicezentrum, um einen Wartungstermin zu vereinbaren.



Übergewichtig

Blinkt, wenn der Transfer einer Last versucht wird, die die Hubkapazität des Lifters übersteigt.


Das rote Lämpchen leuchtet unter Ausgabe von vier schnell aufeinander folgenden Signaltönen so lange, bis der Patient abgesenkt wurde.

Die Funktion wird deaktiviert, alle anderen Funktionen hingegen bleiben in Betrieb.

Doppel-/Einzelmodus


Single Mode

Patienten mit einem Gewicht
von bis zu 159 kg (350 lb)

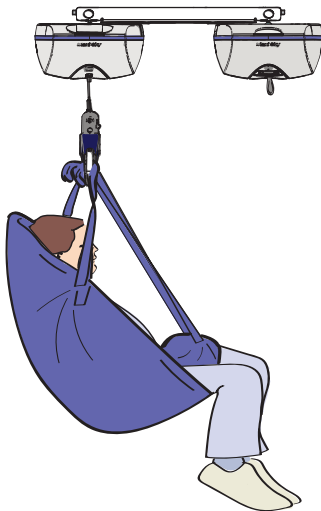


Doppel-Modus

Patienten mit einem Gewicht
von 159 bis 454 kg (350–1000 lb)

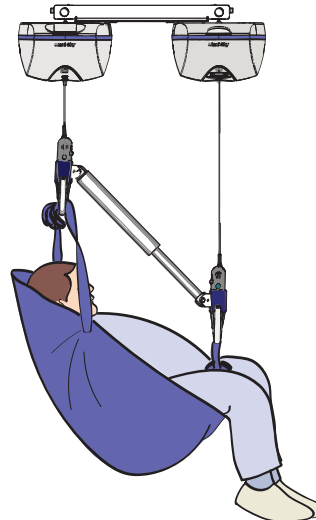

Der Maxi Sky 2 Plus Deckenlifter kann je nach Einstellung im Doppel- oder Einzelmodus betrieben werden. Der Doppel-Modus ist für bariatrische Patienten, der Einzel-Modus für nicht-bariatrische Patienten vorgesehen. Ob der Einzel- oder der Doppel-Modus verwendet wird, richtet sich nach dem Körpergewicht des Patienten.

Not-Aus-Schalter mit roter Zugschnur

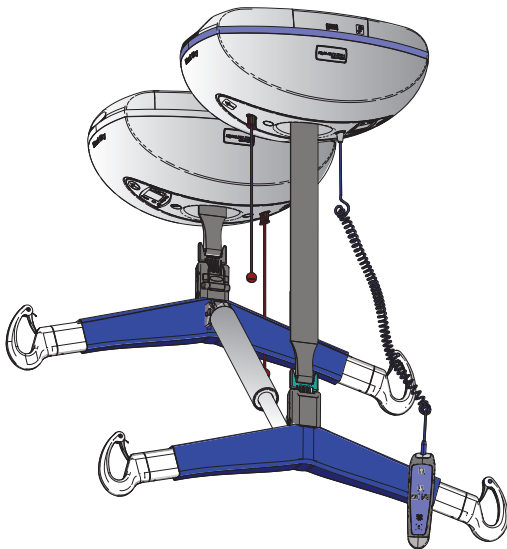

Mit dem Not-Aus-Schalter wird der Deckenlifter vollständig deaktiviert. Durch Ziehen an einem der roten Kabel unterbrechen beide Deckenlifter jegliche Aktivität, und ihre Display- und Leuchtanzeigen schalten sich ab.

Ein kleiner roter Kolben kommt aus dem Gehäuse.

Zum Reaktivieren des Deckenlifters

Beide rote Kolben nach oben schieben.


Der Deckenlifter ist einsatzbereit, sobald das Akkusymbol oder das ECS-Symbol im Display erscheint.

Notbremse

Bei einer z. B. mechanischen Störung ist der Deckenlifter mit einem automatischen Bremssystem ausgestattet, das die Absenkfunktion blockiert. Hinweis: In diesem Fall wird auch der Notabsenkungsmechanismus außer Betrieb gesetzt. Leiten Sie entsprechende Notfallmaßnahmen zur Absenkung und Befreiung des Patienten aus dem Deckenlifter ein.

Notabsenkungsmechanismus

1

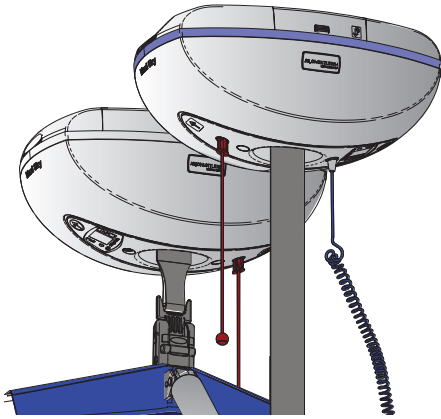


Mit dem Notabsenkungsmechanismus kann der Patient sicher auf einen Stuhl, ein Bett oder einen Rollstuhl gesetzt werden. Nur im Notfall verwenden!

Vorgehensweise für die Notabsenkung


Ziehen Sie an einer der beiden Not-Aus-Schalter.

2

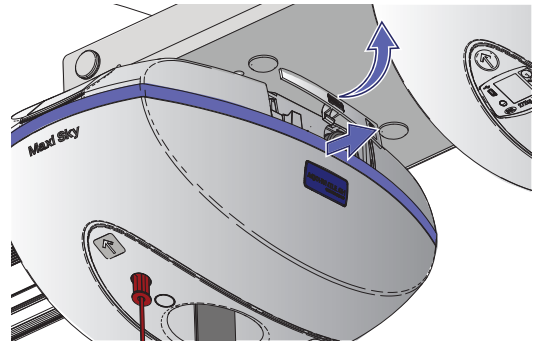


Öffnen Sie die kleinen Türen, um Zugang zum Ablassmechanismus des jeweiligen Deckenlifters zu erhalten.

3

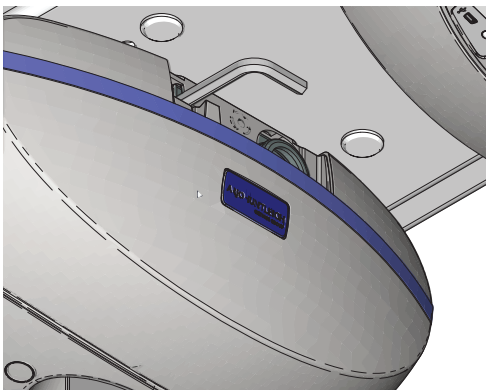

Ziehen Sie die 8-mm-Innensechskantschlüssel heraus.

4

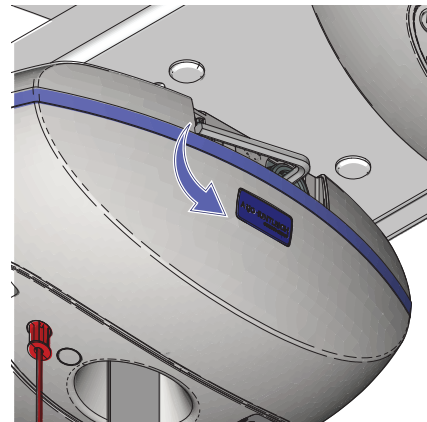

Setzen Sie den Innensechskantschlüssel tief in die Achse ein. Drehen Sie den Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn, um den Patienten/Bewohner langsam abzusenken. Führen Sie diesen Schritt an beiden Deckenliftern durch. Nachdem der Patient auf einen Stuhl, ein Bett oder in einen Rollstuhl herabgelassen und gesichert wurde, vereinbaren Sie einen Termin für die Inspektion des Deckenlifters.

