

Maxi Sky 2 PLUS



Telecomandă




- Buton Sus**
- Buton Jos**
- Buton Poziție înclinat**
- Buton Poziție așezat**
- Buton Programare/Informare**

Funcție de înclinare

Folosiți butonul Poziție înclinat și butonul Poziție așezat pentru a așeza pacientul în poziție dreaptă sau înclinată.

Va activa doar elevatorul suspendat principal pentru ajustarea poziției pacientului. Oricare ar fi butonul de poziționare a pacientului pe care apăsați, numai bara de întindere de la capătul dinspre picioare se va ridica sau va coborâ.

Panou de comandă

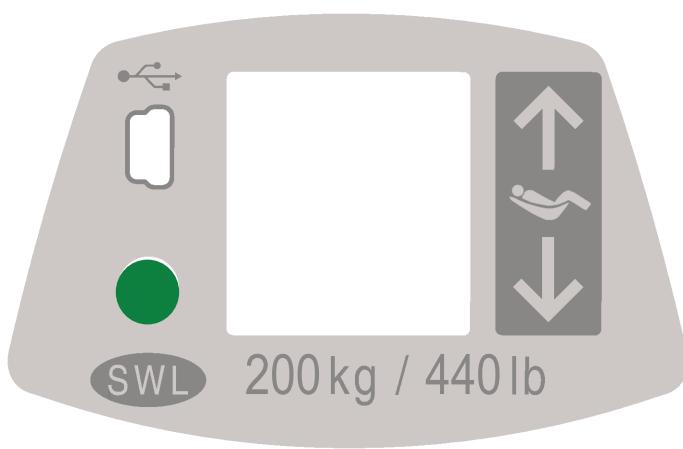

Buton auxiliar Sus-Jos

Butoanele sus și jos sunt utilizate pentru a finaliza un transfer, atunci când apare o problemă la telecomandă.



LED de stare

LED-ul este o completare a afișajului pentru a atrage atenția asupra faptului că pe ecran este afișat un mesaj.



SMA

Această etichetă arată sarcina maximă admisă pentru elevator.



Port de acces USB

Portul USB este destinat exclusiv utilizatorilor MAXISMART.

Simboluri afişate



Nivel de încărcare a bateriei



100%



75%

Interval normal de funcționare



50%



25%

Scăzut

Însoțit de un semnal sonor scurt când este apăsat un buton



< 5%

Critic

Pictogramele alternează, însoțite de două semnale sonore scurte la fiecare 10 secunde



Indicator pentru sistemul optimizat de încărcare (Enhanced Charging System (ECS))

Afișat când unitățile se încarcă cu ECS.



Depășire ciclu de lucru

Luminează intermitent atunci când elevatorul este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, fără să fie lăsat să se răcească.

Protecția la supraîncălzire este activată când o funcție depășește ciclul de lucru și este dezactivată când toate celelalte funcții rămân active.

Lumina roșie rămâne aprinsă pe perioada de răcire și se aude un singur semnal sonor.
Simbolul dispare când funcția a efectuat răcirea și sistemul este gata să fie folosit din nou.



Defecțiune generală (simbol de avertizare însoțit de un caracter numeric)

Luminează intermitent atunci când elevatorul prezintă o defecțiune.

Elevatorul trebuie inspectat sau reparat de un tehnician de service calificat.

Lumina roșie rămâne aprinsă și se aude un singur semnal sonor.



ABC

Necesită întreținere (simbolul cheii fixe însoțit de un caracter alfabetic)

Este afișat timp de 7 secunde, însoțit de 2 semnale sonore, atunci când elevatorul este activat din modul repaus și luminează intermitent la fiecare 5 secunde pentru a atrage atenția utilizatorului.
Contactați centrul de service Arjo pentru întreținere.



Greutate depășită


Luminează intermitent atunci când se încearcă transferul cu o sarcină care depășește capacitatea elevatorului.

Lumina roșie rămâne aprinsă, însoțită de 4 semnale sonore rapide, până când pacientul este coborât.
Funcția este dezactivată în timp ce toate celelalte funcții rămân active.

Modurile dual și simplu


Mod simplu

Pacienții cu greutatea până la 159 kg (350 lb)

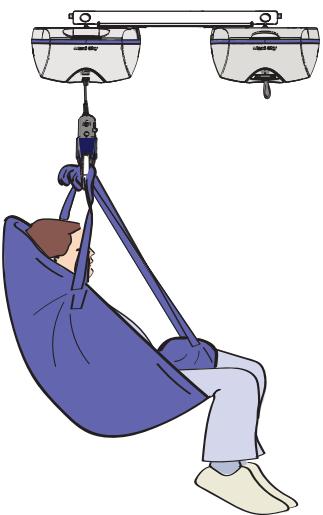


Mod dual

Pacienții cu greutatea între 159 și 454 kg (350 – 1.000 lb)

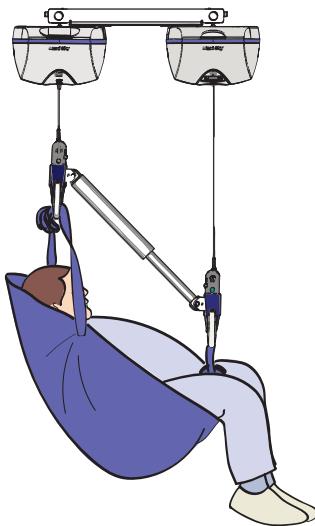

Elevatorul suspendat Maxi Sky 2 Plus poate fi configurat să funcționeze în modul simplu sau în modul dual. Modul dual este destinat pacienților bariatrici, iar modul simplu este destinat pacienților non-bariatrici. Folosirea modului simplu sau dual se stabilește în funcție de greutatea pacientului.

Orire de urgență cu ajutorul corzii roșii

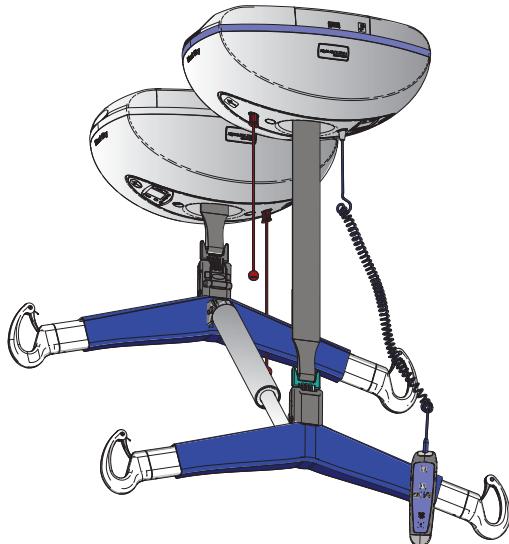

Butonul de oprire de urgență dezactivează complet elevatoarele suspendate.

Trageți de oricare dintre corzile roșii, ambele elevatoare suspendate se opresc complet, iar afișajele și indicațoarele acestora se închid. Un mic piston roșu va ieși din carcasa.

Pentru a reactiva elevatorul suspendat

Împingeți în sus ambele pistoane roșii.


Elevatorul suspendat este gata de folosire atunci când simbolul pentru baterie sau simbolul pentru ECS apare pe afișaj.

Frâna de urgență

În cazul unei defecțiuni mecanice, elevatorul suspendat este prevăzut cu un sistem de frânare automat, care blochează funcția de coborâre. Notă: mecanismul de coborâre de urgență nu va fi funcțional. Începeți procedurile de urgență pentru a coborî și a elibera pacientul din elevatorul suspendat.

Mecanism de coborâre de urgență

1

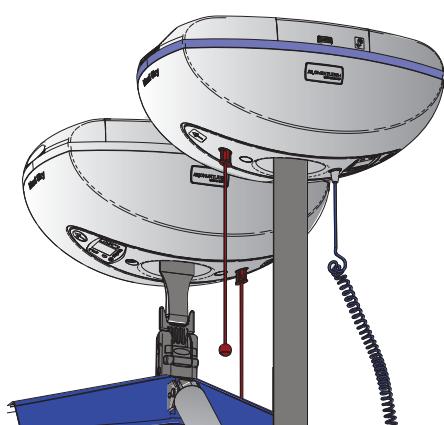


Mecanismul de coborâre de urgență oferă o modalitate sigură de a coborî pacientul pe un scaun, pat sau scaun cu rotile. Se folosește numai în caz de urgență.

Procedura de coborâre de urgență


Trageți oricare dintre corzile de oprire de urgență.

2

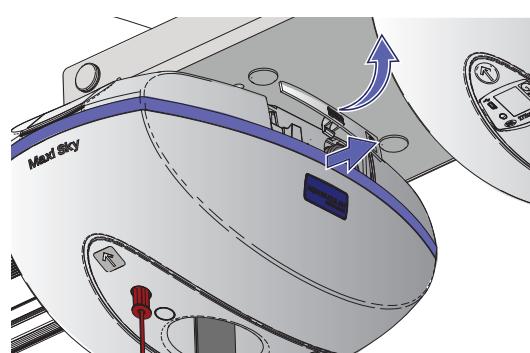


Deschideți ușile mici pentru a avea acces la mecanismul de coborâre al fiecărui elevator suspendat.

3

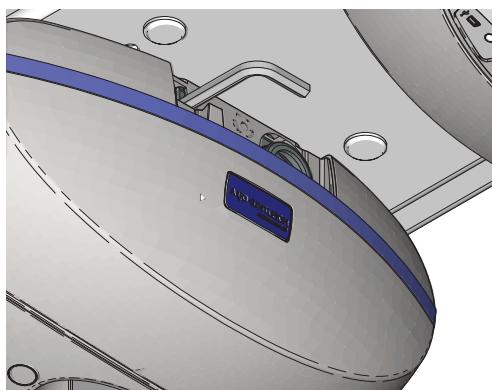

Trageți în afară cheile hexagonale de 8 mm.

4

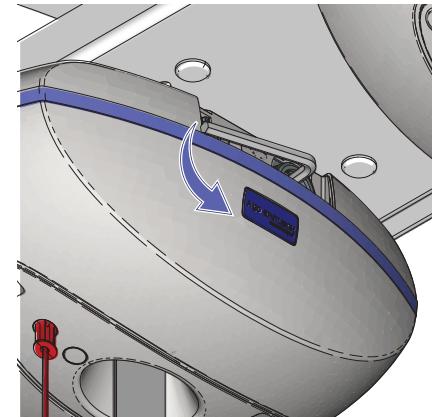

Introduceți cheia hexagonală adânc în locaș. Rotiți cheia hexagonală în sensul invers acelor de ceasornic pentru a coborî încet pacientul. Faceți acest lucru pentru ambele elevatoare suspendate. Imediat ce pacientul este coborât și așezat în siguranță pe un scaun, pat sau scaun cu rotile, contactați un tehnician autorizat pentru a verifica elevatorul suspendat.

