







Maxi Sky 2 PLUS

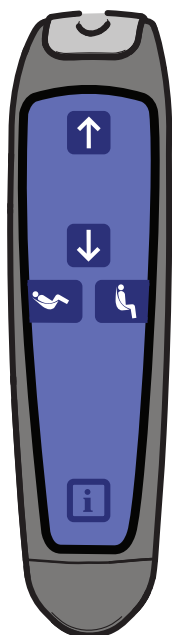

Ruční ovladač




-  tlačítko nahoru
-  tlačítko dolů
-  tlačítko náklonu
-  tlačítko Sezení
-  tlačítko programování/informace

Funkce naklonění

Tlačítko náklonu a sezení použijte k polohování klienta do vzpřímené nebo zakloněné polohy. Aktivuje pouze vodící stropní zvedák při úpravě polohy klienta. Bez ohledu na to, jaké tlačítko pro polohování klienta je stisknuto, pouze závěsné rameno v nožní části se zvedne nebo spustí.

Ovládací panel

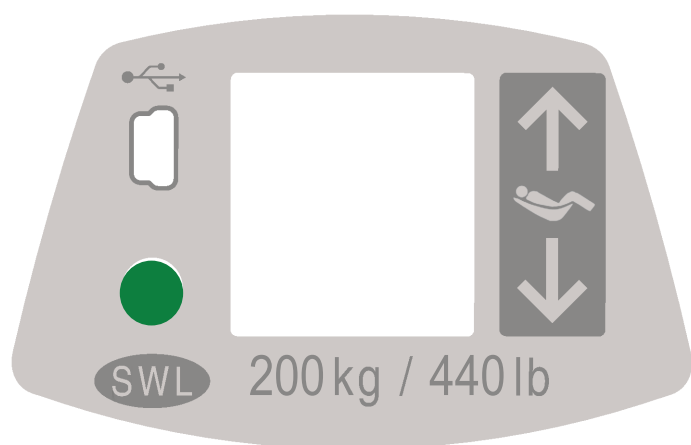

Pomocné tlačítko nahoru – dolů

Tlačítka nahoru a dolů použijte k provedení přesunu, pokud během provozu dojde k problému s ručním ovladačem.



Stavová kontrolka LED

Kontrolka LED slouží jako doplněk vizuálního zobrazení a upozorňuje obsluhu, že je na obrazovce zobrazena zpráva.



SWL

Štítek označuje bezpečné pracovní zatížení zvedáku.



USB přístupový port

USB port je určen pouze pro uživatele MAXISMART.

Symboly na displeji



Úroveň dobítí baterie



100%



75%

Normální provozní rozsah



50%



25%

Téměř vybitá

Provázeno krátkým pípnutím po stisknutí tlačítka



< 5%

Kritický stav

Ikony se střídají a každých 10 sekund se ozvou dvě krátká pípnutí



Indikátor Enhanced Charging System (ECS)

Zobrazí se při nabíjení jednotek prostřednictvím ECS.



Překročení pracovního cyklu

Bliká, pokud je zvedák používán po dlouhou dobu, aniž by mohl vychladnout.

Ochrana proti přehřátí se aktivuje, když funkce překročí svůj pracovní cyklus a je zablokována, zatímco ostatní funkce zůstávají aktivní.

Červená kontrolka během ochlazování stále svítí a ozve se jedno pípnutí.

Symbol zmizí, jakmile došlo k ochlazení a funkce je opět připravena k použití.



Obecná porucha (varovný symbol doplněný číselným znakem)

Bliká, když zvedák zaznamená poruchu.

Zvedák musí zkontrolovat nebo opravit kvalifikovaný servisní technik.

Červená kontrolka stále svítí a ozve se jedno pípnutí.



Požadována údržba (symbol klíče doplněný písmenným znakem)

Symbol provázený 2 pípnutími se zobrazuje 7 sekund, když se zvedák přepne z režimu spánku, a bliká každých 5 sekund, aby upoutal pozornost uživatele.

Kontaktujte své servisní centrum Arjo za účelem údržby.



Nadměrná váha

Bliká, když je proveden pokus o přesun se zátěží přesahující nosnost zvedáku.


Červená kontrolka provázená čtyřmi rychlými pípnutími svítí až do spuštění klienta dolů.

Funkce je blokována, zatímco všechny ostatní funkce zůstávají aktivní.

Duální a jednoduchý režim


Jednoduchý režim

Klient o hmotnosti do 159 kg (350 lb)

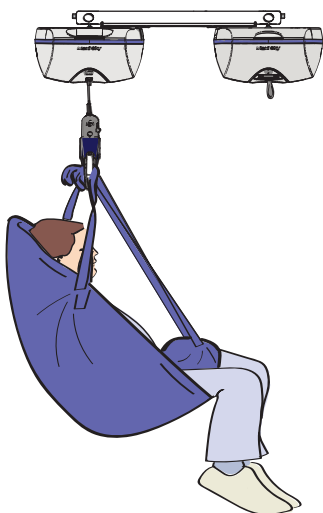


Duální režim

Klient o hmotnosti od 159 do 454 kg (350 - 1000 lb):

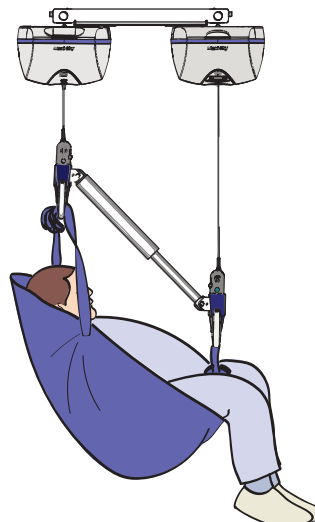

Stropní zvedák Maxi Sky 2 Plus lze nastavit pro provoz v jednoduchém nebo duálním režimu. Duální režim je vhodný pro bariatrické klienty, zatímco jednoduchý režim pro nebariatrické klienty. Použití jednoduchého nebo duálního režimu závisí na hmotnosti klienta.

Nouzové zastavení pomocí červené šňůry

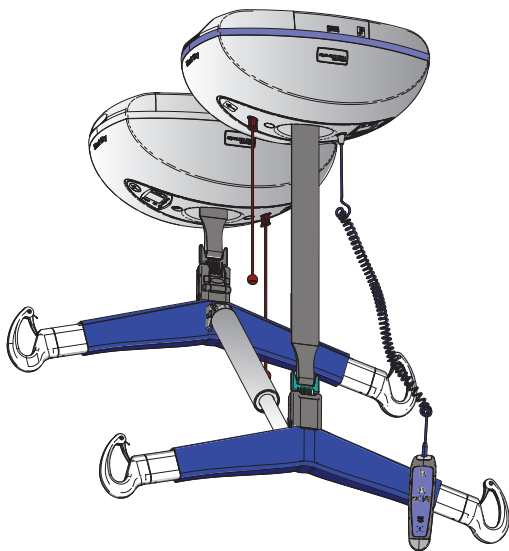

Nouzové zastavení zcela deaktivuje stropní zvedáky. Zatáhnete za jednu z červených šňůr, oba stropní zvedáky zastaví veškerou činnost a jejich displeje i kontrolky zhasnou. Z pláště se vysune malý červený plastový čep.

Opětovná aktivace stropního zvedáku


Zatlačte vzhůru oba červené čepy. Stropní zvedák je připraven k použití, když se na displeji zobrazuje symbol baterie nebo ECS.

Nouzová brzda

Pro případ např. mechanické poruchy je stropní zvedák vybaven automatickým systémem brzd, který zablokuje funkci spouštění. Poznámka: mechanismus nouzového spouštění nebude funkční. Pro spuštění a uvolnění klienta ze stropního zvedáku bude nutné iniciovat nouzové postupy.

Mechanismus nouzového spouštění

1

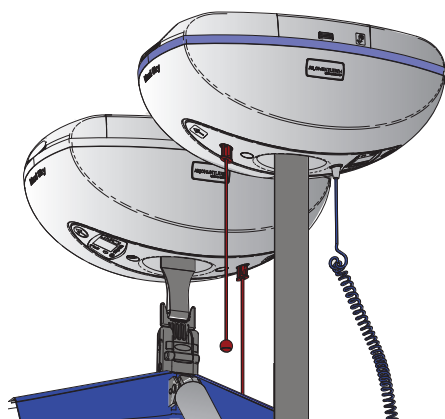


Mechanismus nouzového spouštění nabízí bezpečný způsob, jak spustit klienta na židli, lůžko nebo invalidní vozík. Používá se pouze v nouzové situaci.

Postup nouzového spouštění


Zatáhněte za kteroukoliv šňůru pro nouzové zastavení.

2

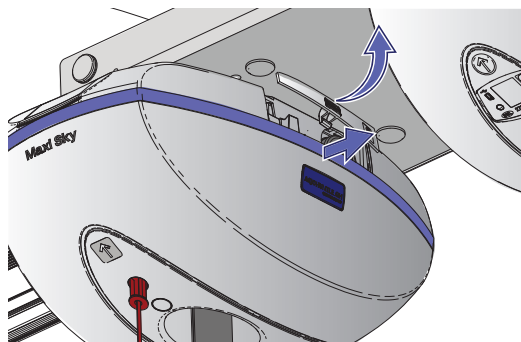


Otevřete postranní dvířka, abyste se dostali ke spouštěcímu mechanismu stropního zvedáku.

3

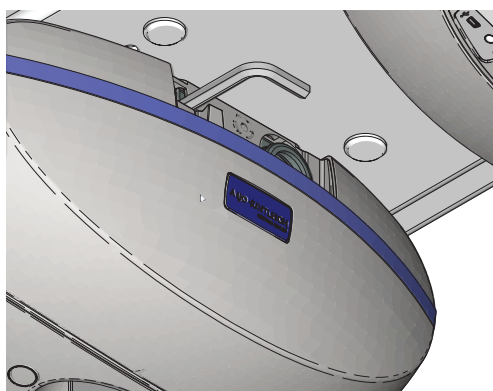

Vytáhněte 8 mm inbusové klíče.

4

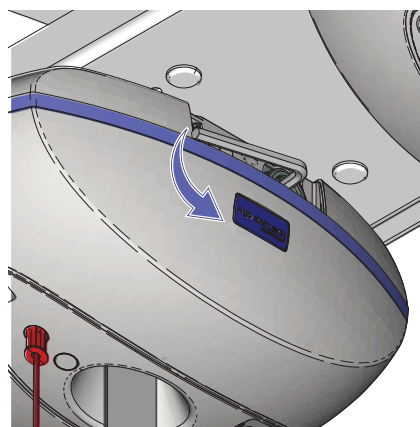

Zasuňte inbusový klíč do hřídele. Otočte klíčem proti směru chodu hodinových ručiček, tak abyste klienta mírně spustili. Postup proveďte u obou stropních zvedáků. Jakmile je klient spuštěn a bezpečně usazen na židli, na lůžko nebo na vozík, přivolejte kvalifikovaného technika, aby stropní zvedák prohlédl.

