

Malibu/Sovereign



Arrêt d'urgence

Appuyer sur le bouton pour arrêter toutes les fonctions. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour les débloquer.

Verrouillage Patient

Appuyer sur le bouton de verrouillage patient **(A)** et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour désactiver tous les boutons du panneau et de la télécommande. Le verrouillage des fonctions est indiqué par une LED jaune **(B)**.

Appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour réactiver toutes les fonctions.

Télécommande - Lever pour entrer

Appuyer sur le bouton Lever pour entrer **(A)** et le maintenir enfoncé. Le bras de levage effectue une séquence complète de mouvements ; de l'extérieur de la baignoire, par-dessus le bord de la baignoire et dans la baignoire.

Télécommande - Lever pour sortir

Appuyer sur le bouton Lever pour sortir **(B)** et le maintenir enfoncé. Le cycle est effectué en sens inverse.

La baignoire doit être dans sa position la plus basse.

Affichage de la température

Indique la température actuelle de l'eau de la baignoire.

Indique la température du remplissage actif ou de la douche.

Protection anti-brûlure

La protection anti-brûlure électronique coupe l'eau si un niveau dangereux de température est détecté.

La LED située entre les écrans d'affichage s'allume en cas de détection d'une température supérieure ou égale à 45 °C (113 °F) après 10 secondes.

Remplissage automatique

La fonction de remplissage automatique a un niveau d'eau prédéfini.

- Pour activer cette fonction, appuyer sur le bouton de remplissage automatique.
- Le remplissage s'arrête automatiquement une fois le niveau atteint.
- Appuyer à nouveau sur le bouton de remplissage automatique ; le remplissage se poursuit alors pendant 60 secondes de plus.

Rinçage automatique

La fonction de rinçage automatique permet d'éviter que l'eau ne stagne dans le système de douche.

La fonction de rinçage automatique se lance 30 heures après la dernière utilisation de la baignoire et ensuite toutes les 24 heures si cette dernière n'est pas utilisée.

Pour éviter tout déversement d'eau, la douchette doit être placée dans le support après chaque utilisation.

Système Air Spa (en option)

L'effet « massage » est obtenu par l'injection d'air dans l'eau du bain par le biais de buses. La durée maximale recommandée du traitement avec le système Air Spa est de 15 minutes.

1 Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT du système Air Spa pour démarrer la soufflerie d'air à la vitesse minimale.


2 L'intensité du jet d'air augmente si vous appuyez à nouveau sur le bouton.

3 Appuyer à nouveau sur le bouton MARCHE/ARRÊT du système Air Spa pour arrêter.



Malibu/Sovereign



Sangle de sécurité

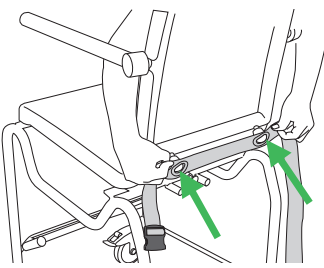


Attacher la sangle de sécurité.

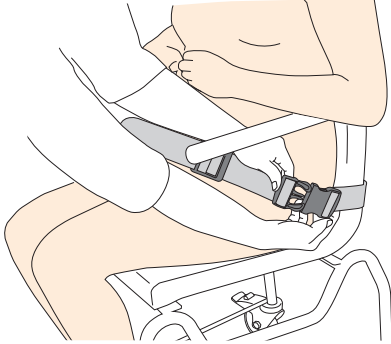


Boucler la sangle de sécurité.

Ouvrir la sangle de sécurité.


Ajuster la sangle de sécurité

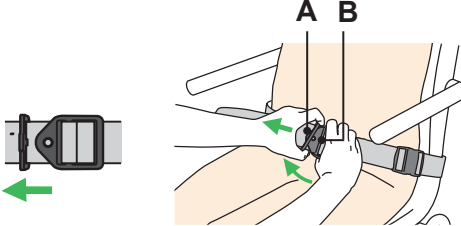


Déverrouiller les éléments de boucle. Séparer les éléments de boucle (A) et (B) en déplaçant le plus petit (A) légèrement vers le haut.

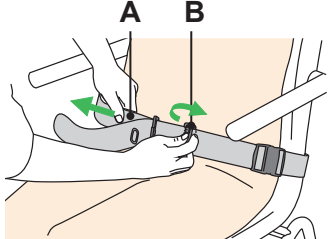

Desserrer la sangle de sécurité. Tirer la sangle intérieure (A) sur le côté tout en soulevant le plus grand clip (B).

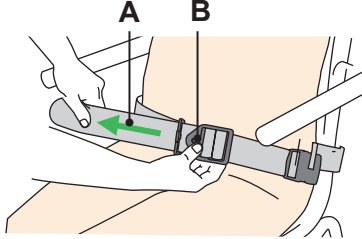

Serrer la sangle de sécurité. Tirer la sangle extérieure (A) sur le côté tout en tenant le plus grand clip (B).

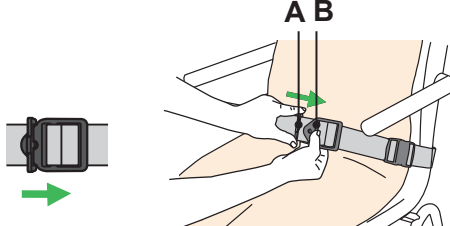

Verrouiller les éléments de boucle. Fermer la boucle en insérant le petit clip (A) dans le grand clip (B).


Attacher le siège

1



Pousser des deux mains l'avant du siège contre le cadre avant.

2

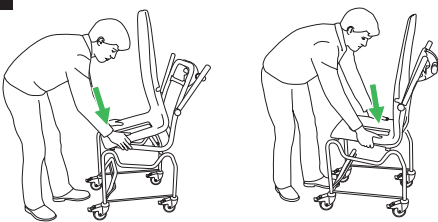


Enfoncer la partie galbée du siège.

3



Enfoncer un côté autour de l'accoudoir et vérifier qu'il s'encliquette en position.

4

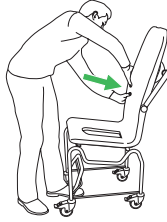

Répéter l'opération de l'autre côté.

Retirer le siège

1



Détacher le siège des deux mains, de chaque côté de l'accoudoir.

2




Répéter l'opération de l'autre côté.

3




Tirer la base du siège droit vers le haut.

Attacher l'accoudoir

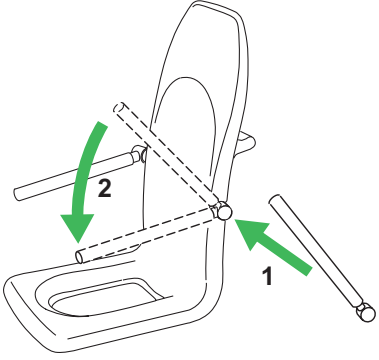

Tenir l'accoudoir avec la poignée dirigée vers le haut. Guider les fentes des accoudoirs sur le fauteuil de transfert (1). Rabattre les accoudoirs vers l'avant (2).

Retirer l'accoudoir

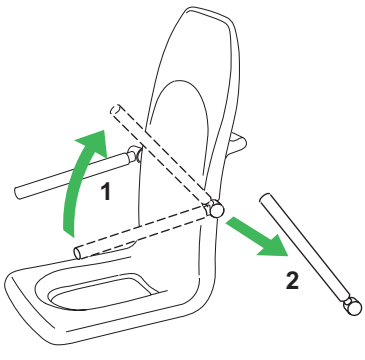

1

2