

System 2000



Автоматичне наповнення

Кнопка УВІМК./ВИМК. автоматичного наповнення




P300 P220


Наповнення автоматично припиняється при досягненні заданого рівня води.

Щоб зупинити наповнення ванни в будь-який момент, натисніть кнопку автоматичного наповнення ванни.

Кнопка душу і рукоятка душу

Кнопка УВІМК./ВИМК. душу



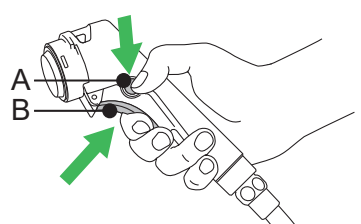



Кнопка блокування (A) зупиняє потік води.

Вимикач (B) регулює та відновлює потік води.

Дисплей P300




У ванні немає води. Жодна з функцій не активована.




Відображає температуру води для: активного наповнення, душу або наповненої ванни.


Пристрій P300 має три рівні автоматичного наповнення. Попередньо заданий рівень: нормальний.



Нормальний рівень автоматичного наповнення




Низький рівень автоматичного наповнення



Високий рівень автоматичного наповнення

Щоб змінити рівень:
Натисніть і утримуйте кнопку (-) чи (+) протягом 8 секунд після початку автоматичного наповнення.

Захист від опіку




45 °C (113 °F)

У разі активування захисту від опіку безпечно перемістіть пацієнта з ванни.



Система захисту від опіку припиняє подачу води менш ніж за 10 секунд.

P300




На дисплеї відображатимуться чотири пунктирні лінії і лунатиме звуковий сигнал. У цей час відбувається автоматичне калібрування змішувача.

P220



Обидва світлодіоди блимають і лунає звуковий сигнал.



Дисплей P220



Відображає температуру води для: активного наповнення, душу або наповненої ванни.

Hydromassage чи Hydrosound (додаткова функція)


Кнопка УВІМК./ВИМК. системи Hydromassage чи системи Hydrosound

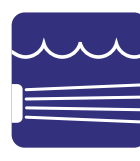

P300 P220


Регулювання рівня інтенсивності

Система Hydromassage




Система Hydrosound

P300



P220

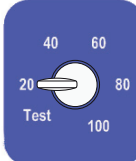

Система Sound & Vision (додаткова функція)




USB-роз'єм розташований під кришкою панелі керування.




За допомогою пульта ручного керування відрегулюйте звук і світло.


Блок дезінфекції (додаткова функція)

Кнопка УВІМК./ВИМК. дезінфекції



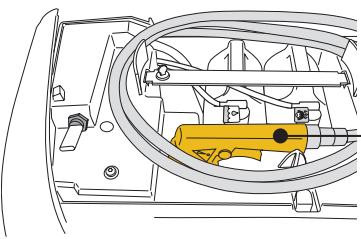



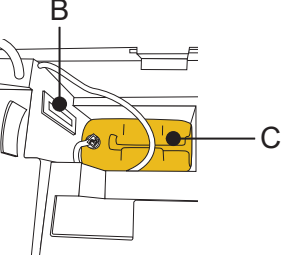

Блок дезінфекції розташований під кришкою панелі керування. Ручка розпилювача дезінфікуючого засобу (A)



Витратомір (B) Ємність з дезінфікуючим засобом (C) (під відділенням для шампуню / олії для ванн)



Визначення пропорції дезінфікуючого засобу:
Розбризкайте дезінфікуючий засіб у ванну. Перевірте правильність пропорції на витратомірі. За потреби відрегулюйте рукоятку на всмоктувальному шлангу.