

System 2000



Automatisk fyldning

TÆND/SLUK-knap til Automatisk fyldning




P300 P220

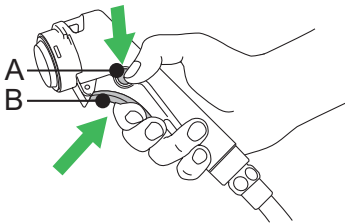
Fyldningen afbrydes automatisk, når det forudindstillede vandniveau er nået.

Tryk på autofyldknappen for at standse opfyldningen når som helst.

Bruserknap og håndbruser

TÆND/SLUK-kn ap til Bruser







Låseknappen (A) låser vandtilførslen.

Udløser (B) regulerer og låser vandtilførslen op.

P300-display




Intet vand i badekarret.
Ingen funktioner aktiveret.




Vandtemperatur for:
aktiv opfyldning, brusebadning eller fyldt badekar.


P300 har tre vandstande for automatisk opfyldning.
Forudindstillet vandstand er Normal.



Automatisk fyldning
Normalt niveau




Automatisk fyldning
Lavt niveau



Automatisk fyldning
Højt niveau

For at ændre niveauet:
Tryk på (-) eller (+) inden for 8 sekunder, efter den automatiske fyldning er startet.

Skoldningsbeskyttelse




45 °C
(113 °F)

Hvis skoldningsbeskyttelsen er aktiveret, flyttes plejemodtageren sikkert væk fra badet.


Skoldningsbeskyttelsen slukker for vandet på mindre end 10 sekunder.

P300



Displayet viser fire streger, og der lyder et bipsignal. I dette tidsrum genkalibreres Blandingsbatteriet automatisk.

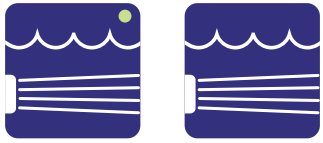
P220



Begge LED'er blinker, og der lyder et bipsignal.

Hydromassage eller Hydrosound (ekstraudstyr)


TÆND/SLUK-knap til Hydromassage eller Hydrosound



P300 P220


Regulering af intensitetsniveau

Hydromassage

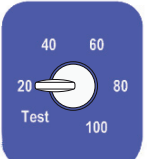


Hydrosound


P300




P220



Sound & Vision-system (ekstraudstyr)

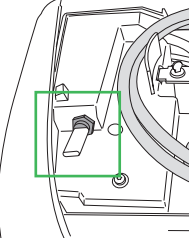


USB-porten er placeret under betjeningspaneldækslet.

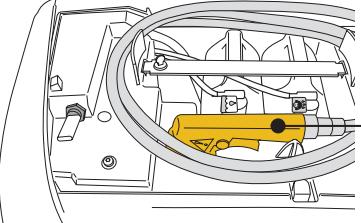


Brug håndbetjeningen til at regulere lyd og lys.

Desinfektionsenhed (ekstraudstyr)

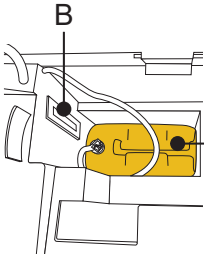
TÆND/SLUK-knap til Desinfektion




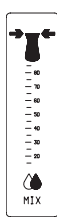




Blinker, når desinfektionsbeholderen er tom (kun P300).

Desinfektionsenheden er placeret under betjeningspaneldækslet. Desinfektionspistol (A)



Flowmåler (B)
Desinfektionsbeholder (C)
(under shampoo/badeolie)



Bestem desinfektionsmidlets blandingsforhold:
Sprøjt desinfektionsmiddel i badekarret. Kontrollér, at blandingsforholdet på flowmetret er korrekt. Juster sugeslangens knap efter behov.