

Système 2000



Remplissage automatique

Bouton MARCHE/ARRÊT du remplissage automatique




P300 P220


Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le niveau d'eau prédéfini est atteint.

Appuyer sur le bouton Remplissage automatique pour arrêter le remplissage à n'importe quel moment.

Bouton de la douche et douchette

Bouton MARCHE/ARRÊT de la douche



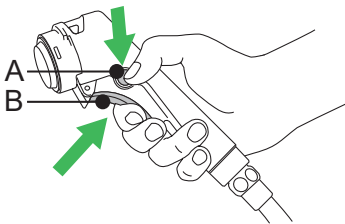


A

B


Le bouton de verrouillage (A) verrouille le débit de l'eau.

La gâchette (B) régule et déverrouille le débit de l'eau.

Écran P300




Pas d'eau dans la baignoire. Aucune fonction activée.




Température de l'eau pour : le remplissage, la douche ou la baignoire remplie.


P300 possède trois niveaux de remplissage automatique. Le niveau préréglé est le niveau normal.



Niveau normal de remplissage automatique




Niveau bas de remplissage automatique



Niveau haut de remplissage automatique

Pour changer de niveau :
Appuyer sur (-) ou (+) dans les 8 secondes après le démarrage du remplissage automatique.

Protection anti-brûlure




45 °C (113 °F)

Si la protection anti-brûlure est activée, aider le patient à sortir de la baignoire en toute sécurité.



La protection anti-brûlure coupe l'eau en moins de 10 secondes.

P300




L'écran affiche quatre tirets et un avertissement sonore retentit. Pendant ce temps, le mélangeur effectue automatiquement un recalibrage.

P220



Les deux voyants LED clignotent et un avertissement sonore retentit.



Écran P220



Température de l'eau pour : le remplissage, la douche ou la baignoire remplie.

Hydromassage ou Hydrosound (en option)

Bouton MARCHE/ARRÊT du système Hydromassage ou Hydrosound



P300 P220


Ajustement du niveau d'intensité

Hydromassage



Hydrosound


P300





P220

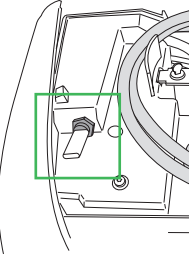

Système Sound & Vision (en option)




Le port USB est situé sous le couvercle du panneau de commande.




Utiliser la télécommande pour régler le son et la lumière.

Unité de désinfection (en option)


Bouton MARCHE/ARRÊT de désinfection



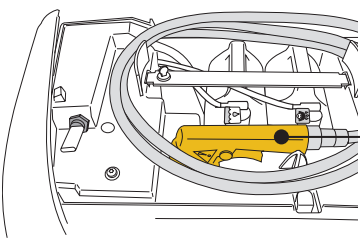




L'unité de désinfection est située sous le couvercle du panneau de commande.

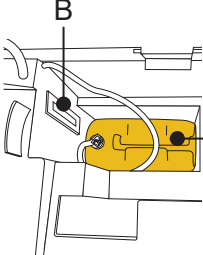Douchette de désinfection (A)



Débitmètre (B)

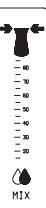Flacon de désinfection (C) (sous le shampoing/l'huile de bain)



Déterminer le rapport de mélange de désinfectant :
Vaporiser le désinfectant dans la baignoire. Vérifier que le rapport de mélange du débitmètre est correct. Ajuster le bouton sur le tuyau d'aspiration si nécessaire.