

System 2000



Automatsko punjenje

Gumb za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE automatskog punjenja



P300




P220

Punjene se automatski
zaustavlja na unaprijed
postavljenoj razini vode.

Pritisnite gumb za automatsko
punjenje da biste zaustavili
punjenje u bilo kojem trenutku.

Gumb za tuširanje i ručka za tuširanje

Gumb za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE tuša

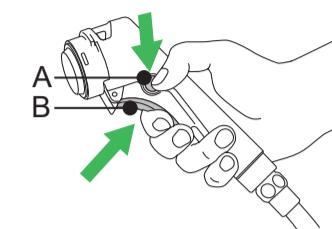

Gumb za
zaključavanje
(A) zaključava
protok vode.

Okidač (B)
regulira i otključava
protok vode.

Zaslon na modelu P300



Nema vode u kadi. Nije
aktivirana nijedna funkcija.



Temperatura vode za:
aktivno punjenje, tuširanje ili napunjenu kadu.

P300 ima tri razine automatskog punjenja.
Unaprijed postavljena razina je normalna.



Normalna razina
automatskog punjenja



Niska razina
automatskog punjenja



Visoka razina
automatskog punjenja

Za promjenu razine:

Pritisnite (-) ili (+) unutar 8 sekundi nakon početka automatskog punjenja.



45 °C
(113 °F)

Ako je aktivirana zaštita od opeklina,
pacijenta odmaknite na sigurno od kade.

Zaštita od opeklina zatvara vodu za manje
od 10 sekundi.

P300



Na zaslonu se prikazuju četiri crtice
i čuje se zvučni signal.
Tijekom tog vremena miješalica
se automatski rekalibrira.

P220



Obje LED žaruljice svijetle i čuje se zvučni signal.


Zaslon na modelu P220



Temperatura vode za:
aktivno punjenje, tuširanje ili napunjenu kadu.

Hydromassage ili Hyrosound (dodata značajka)

Gumb za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE sustava
Hydromassage ili Hyrosound

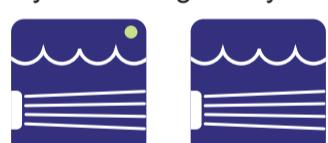

P300

P220

Regulacija razine intenziteta




Hydromassage

P300 - | 20 | +

P220
40 60
20 80
Test 100

Hyrosound


Sustav Sound & Vision (dodata značajka)

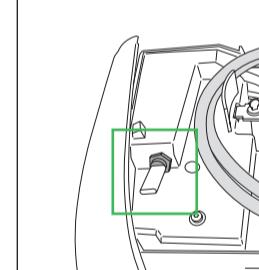

USB priključak nalazi se ispod
poklopca upravljačke ploče.



S pomoću ručnog upravljača
regulirajte zvuk i svjetlo.

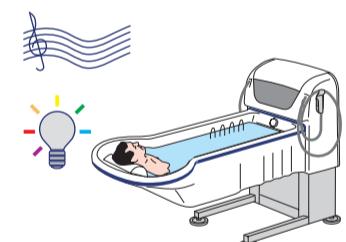


Jedinica za dezinfekciju (dodata značajka)


Gumb za UKLJUČENJE/
ISKLJUČENJE dezinfekcije



Treperi kad je boca
s dezinficijensom prazna.
(samo P300)

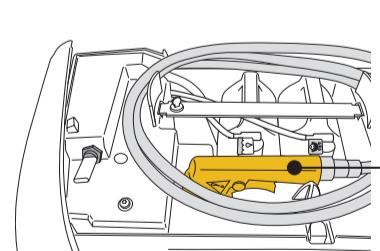

Jedinica za dezinfekciju nalazi
se ispod poklopca upravljačke
ploče. Ručka raspršivača za
dezinficijens (A)

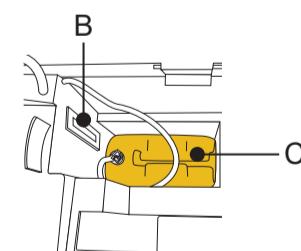

Mjerač protoka (B)
Boca s dezinficijensom
(C) (ispod šampona /
ulja za kupanje)



Utvrđite omjer mješavine dezinficijensa:

Poprskajte kadu dezinficijensom.
Provjerite je li omjer mješavine na mjeraču protoka
ispravan. Po potrebi prilagodite kotačić na crijevu
za usisavanje.

