



Flowtron ACS900

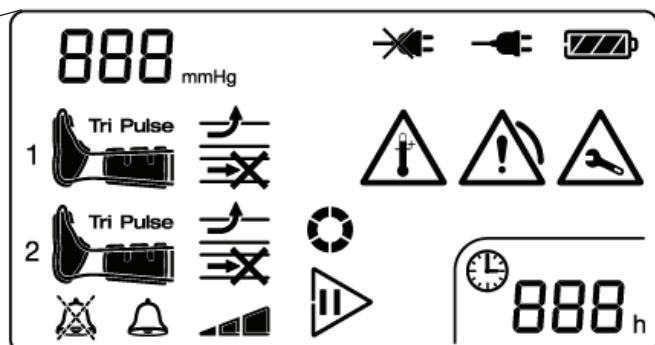

Dugme napajanja i indikator mrežnog napajanja

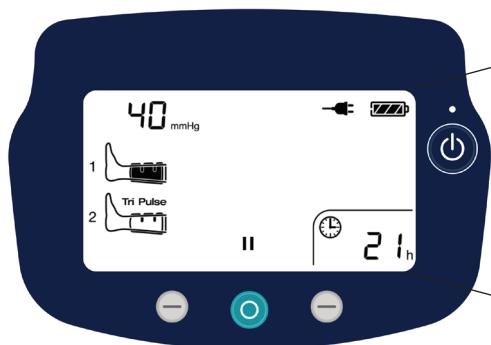

Pritisnite i zadržite za režim pripravnosti, indikator mrežnog napajanja se uključuje. Pritisnite i zadržite da biste isključili, indikator mrežnog napajanja se isključuje.

Srednje kontrolno dugme



Pritisnite da biste pokrenuli terapiju. Pritisnite i zadržite da biste zaustavili terapiju.

Levo kontrolno dugme



Pritisnite da biste utišali zvučni alarm. Pritisnite i zadržite da biste pristupili podešavanjima jačine zvuka alarma.

Desno kontrolno dugme



Pritisnite i zadržite da biste ušli u režim resetovanja vremena rada po pacijentu.

888 mmHg

Indikator pritiska kompresivne navlake



Tip kompresivne navlake i indikator naduvavanja

Povezana, nije naduvana Povezana, naduvana



Podnože



Ujednačena kompresija lista (ili lista i butine)



Sekvencijalna kompresija (Tri Pulse) lista (ili lista i butine)

1
2

Broj priključka cevi



Indikator utišavanja zvučnog alarma



Indikator statusa zvučnog alarma

Tokom alarma: označava da alarm može da se utiša.



Indikator jačine zvuka

Indikacije upozorenja i alarma



Otkriven je alarm, što može da izazove prekid terapije.



Nizak pritisak ili curenje vazduha iz kompresivne navlake.



Presavijena ili blokirana cev.



Visoka temperatura.



Otkrivena je hardverska greška ili je potreban periodični servis.



Čekanje – indikator pokretanja



Indikator pokretanja terapije

Prikazuje se u režimu pripravnosti kada je povezana najmanje jedna kompresivna navlaka.



Indikator zaustavljanja terapije

Prikazuje se u režimu rada.

Indikatori mrežnog napajanja



Pumpa je priključena na mrežno napajanje.



Pumpa NIJE priključena na mrežno napajanje.



Indikator napunjenoosti baterije

Baterija je prazna

Baterija je 1/4 puna

Baterija je 1/2 puna

Baterija je 3/4 puna

Baterija je puna



Indikator vremena rada po pacijentu

