


Flowtron ACS900



Nút Nguồn và Chỉ báo Nguồn điện lưới
Nhấn và giữ nút để chuyển sang chế độ Chờ (Standby), chỉ báo Nguồn điện lưới bật. Nhấn và giữ nút để tắt, chỉ báo Nguồn điện lưới tắt.

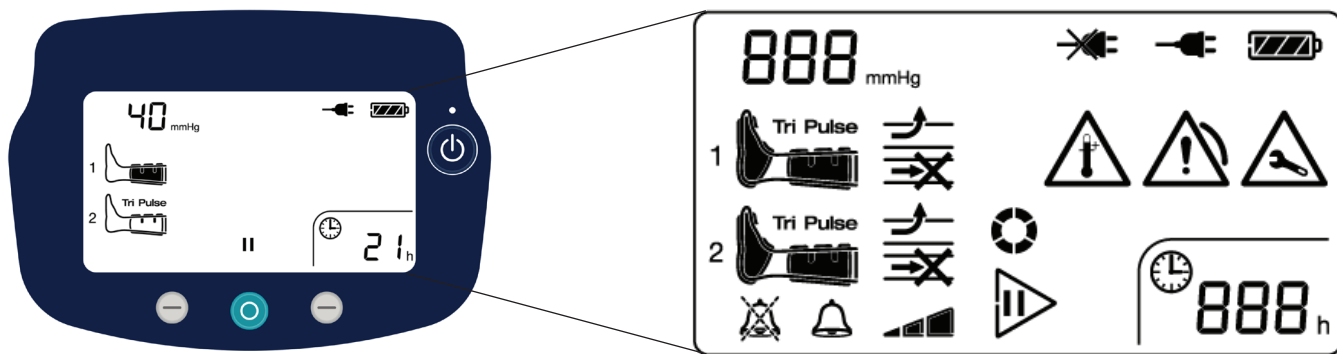

Nút Điều Khiển Giữa
Nhấn nút để bắt đầu trị liệu. Nhấn và giữ nút để dừng trị liệu.



Nút Điều Khiển Trái
Nhấn nút để tắt báo động phát âm thanh. Nhấn và giữ nút để truy cập Cài đặt Âm lượng Báo động.



Nút Điều Khiển Phải
Nhấn và giữ nút để vào chế độ Cài đặt lại thời gian hoạt động cho bệnh nhân

888 mmHg

Chỉ báo Áp lực Vỏ bọc ngoài



Loại vỏ bọc và chỉ báo bơm hơi

Kết nối, không bơm phòng



Kết nối bơm phòng



Bàn chân



Vỏ bọc bắp chân hoặc bắp chân & đùi đồng nhất



Vỏ bọc bắp chân hoặc bắp chân & đùi theo tuần tự (Tri Pulse)

1
2

Số giác nối của ống dẫn khí



Chỉ báo tắt báo động phát âm thanh



Chỉ báo trạng thái báo động phát âm thanh
Khi có báo động: cho biết có thể tắt báo động.



Chỉ báo Âm lượng



Chỉ báo Cảnh báo và Báo động

Báo động phát hiện điều gì có thể gây gián đoạn trong quá trình điều trị.



Áp suất thấp hoặc khe hở ở vỏ bọc ngoài.



Bộ ống nối bị vặn xoắn hoặc bị chặn.



Nhiệt độ cao.



Phát hiện lỗi phần cứng hoặc yêu cầu bảo dưỡng định kỳ.



Chỉ báo Chờ/Đang khởi tạo



Chỉ báo Bắt đầu trị liệu

Hiện thị ở chế độ Chờ (Standby) khi có kết nối tới ít nhất một vỏ bọc ngoài.



Chỉ báo Dừng trị liệu

Hiện thị ở chế độ Hoạt động (Run)



Chỉ báo Nguồn điện lưới

Bơm được nối với nguồn điện lưới.



Bơm KHÔNG nối với nguồn điện lưới.



Chỉ báo Pin



Hết pin



Pin đầy 1/4



Pin đầy 1/2



Pin đầy 3/4



Pin đầy



Chỉ báo thời gian hoạt động cho bệnh nhân