

HÖHENVERSTELLBARER BADESITZLIFTER

Alenti®



Der Alenti wurde so konzipiert, dass eine einzelne Pflegekraft den gesamten Badezyklus übernehmen und während des Vorgangs eine gesunde Arbeitshaltung einnehmen kann. Der Alenti lässt sich vollständig in unser Sortiment an Liegewannen integrieren.

Entwickelt für Personen wie Albert, Barbara und Carl



Vereinfacht effiziente Badeabläufe

Ermöglicht es einer einzelnen Pflegekraft, den Patienten oder Bewohner vom Bett oder Rollstuhl direkt in die Badewanne zu transferieren. Der Alenti kann auch zum Toilettengang und für andere Hygieneaufgaben verwendet werden. So kann die Anzahl der erforderlichen Transfers für die tägliche hygienische Versorgung reduziert werden.

Entwickelt für eine einfache Reinigung und Desinfektion

Der Sitz ist aufgrund seiner einteiligen Formkonstruktion und der glatten, beschichteten Oberfläche des geschlossenzelligen PUR-Schaumstoffs für eine einfache Reinigung und Desinfektion ausgelegt. Der Sicherheitsgurt ist ebenfalls abwischbar, um das Risiko einer Infektionsübertragung zu verringern.

Sitzend und gestützt während des gesamten Transfers

Patienten oder Bewohner können während des Transfers in und aus der Badewanne in einer sicheren Sitzposition bleiben, wodurch sich das Sturzrisiko verringert.

Ausstattungsmerkmale

HÖHENVERSTELLBAR

Großer Hubbereich für unterschiedlich große pflegebedürftige Personen. Mit integrierter Softstart-Funktion.

RÜCKENSTÜTZE

Bietet zusätzliche Unterstützung und kann auf beiden Seiten des Alenti-Sitzes montiert werden.

ANATOMISCH GEFORMTER SITZ

Soll den Komfort erhöhen und die korrekte Positionierung unterstützen, wenn der Pflegebedürftige sich selbstständig hinsetzt.

LEICHTGÄNGIGE LENKROLLEN

ZENTRALES BREMSSYSTEM

Aktiviert auf Knopfdruck.



DUALES BEDIENFELD

2 Bedienelemente (am Fahrgestell und an der Handbedienung) ermöglichen es der Pflegekraft, das Hilfsmittel zu bedienen und dabei nahe am Bewohner zu stehen.

KLAPPBARE HANDGRIFFE

Unterstützung bei Transfer- und Hygienevorgängen.

WIEDERAUFLADBARER AKKU


Wird mit zwei Akkus und einem Ladegerät bereitgestellt, damit Sie immer einen Akku nutzen können, während der andere aufgeladen wird.

WAAGE (OPTIONAL)

Die präzise integrierte elektronische Waage kann als praktische Alternative zum Wiegen von Bewohnern verwendet werden.

NOTANHEBUNG UND -ABSENKUNG

PLATZBEDARF

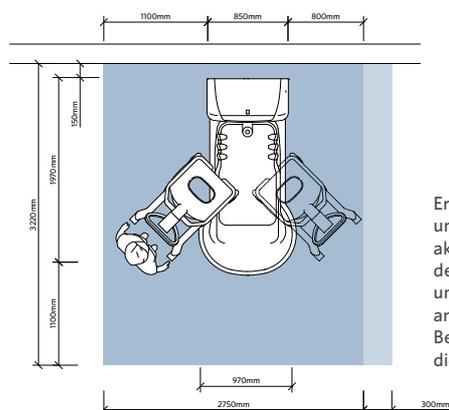

Erforderlicher Arbeitsbereich, um Bade- und Transferaktivitäten auf jeder Seite der Badewanne zu erleichtern und gleichzeitig einen angemessenen Zugang für den Bewohner, die Pflegekraft und die Hilfsmittel zu gewährleisten.

PRODUKTINFORMATIONEN

Sichere Arbeitslast (SAL)	182 kg
Gesamtgewicht (Lifter und Waage)	72 kg
Gesamtbreite	640 mm
Gesamtlänge	1010 mm
Sitzhöhe, niedrigste Position	470 mm
Sitzhöhe, höchste Position	1070
Hubbereich (Sitz)	590 mm
Max. Fahrgestellbreite	640 mm
Min. Fahrgestellbreite zwischen den Beinen	478 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell	35 mm
Fahrgestelllänge, max. (inkl. Bremsen)	1010 mm
Wendekreis (horizontale Position)	ø 1110
Versorgungsspannung	24 VDC
Max. Leistung	200 VA
Schutzart	IP X4
Schutzart	IP X7 (Handbedienung)

STANDARD AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Höhenverstellbar
- Abnehmbare Rückenlehnenstütze
- Zentrales Bremssystem
- Dualbedienung
- 2 wiederaufladbare Akkus
- Akkuladegerät
- Notanhebung und -absenkung
- Abwischbarer Sicherheitsgurt
- Klappbare Handgriffe

OPTIONALE AUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR

- Integrierte Waage
- Steckbeckenhalter
- Steckbecken mit Deckel
- Beinstütze

Für spezifischere Informationen besuchen Sie www.arjo.com

©Arjo AB, November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Arjo.A002311.O.DE

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
 Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hügendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56

arjo