

Meubilair
dat zorgvragers
en zorgverleners
ondersteunt bij
hun dagelijkse
werkzaamheden

DUURZAAM EN MODERN MEUBILAIR

Bedtafel en nachtkastje



Hoogkwalitatief meubilair voor dagelijkse activiteiten

Het moderne meubilair heeft strakke lijnen en ronde profielen en is ontworpen voor diegenen die het meubilair het meest gebruiken.

De bedtafel heeft een tweedelig kantelbaar tafelblad. Een gedeelte van de tafel kan in verschillende standen geplaatst worden voor activiteiten zoals lezen. De boekensteun wordt standaard meegeleverd. Het kleinere gedeelte van de bijzettafel blijft plat, waardoor er een praktisch oppervlak ontstaat om bijvoorbeeld drankjes neer te zetten.

Met de handbediening kan de tafel eenvoudig worden verhoogd van 735 mm naar 1100 mm. De tafel klikt automatisch vast in de positie waarmee een stabiel oppervlak wordt geboden. Als het bed onbedoeld omhoog wordt gebracht, gaat het tafelblad mee omhoog om te voorkomen dat iemand per ongeluk bekneld raakt.



Het nachtkastje heeft twee grote laden die eenvoudig door de zorgvrager vanuit het bed te openen zijn.

Praktisch en flexibel

Het nachtkastje bevat standaard aan elke zijde haakjes voor tassen of handdoeken. De zorgvrager kan hier gemakkelijk bij. Ook is er een afsluitbare bovenste lade voor privéspullen en in de onderste lade een ingebouwde fleshouder voor drie flessen van 1,5 liter.

De rail aan de rand van het oppervlak biedt extra stabiliteit voor items op het bovenste blad. Dit helpt zorgverleners om het kastje en de tafel beter te positioneren.



Sterk, duurzaam en eenvoudig te reinigen

De bekleding van de lade is glad en gemaakt van waterafstotend plastic. Beide lades kunnen eenvoudig worden verwijderd zodat ook de binnenzijde van het nachtkastje goed toegankelijk wordt en eenvoudig gereinigd kan worden.

Alle modellen zijn uitgerust met vier dubbele zwenkwielen. Twee daarvan zijn voorzien van een rem. De dubbele zwenkwielen met laag profiel bieden meer mobiliteit voor eenvoudige en nauwkeurige plaatsing rond het bed.

Platte oppervlakken worden gemaakt van glad en niet-absorberend laminaat (HPL) van hoge kwaliteit. HPL staat erom bekend dat het eenvoudig te reinigen is. Daarnaast is het duurzaam en bestand tegen chemicaliën, vocht, vlekken en vuil.



Kleuren en opties



Eén kleur

Lichtgrijs biedt een neutraal uiterlijk.



Kleuraccenten

Geselecteerde kleuraccenten op het kantelbaar gedeelte van het tafelblad, de plank van nachtkastje en het bovenste blad.



Houten afwerking

Keuze uit afwerkingen in houtstijl.



Blauw




Lila



Lichtblauw



Lichtgrijs

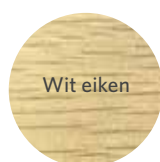

Wit eiken




Beuken



Walnoot

Bedtafels zijn verkrijgbaar in 2 modellen:

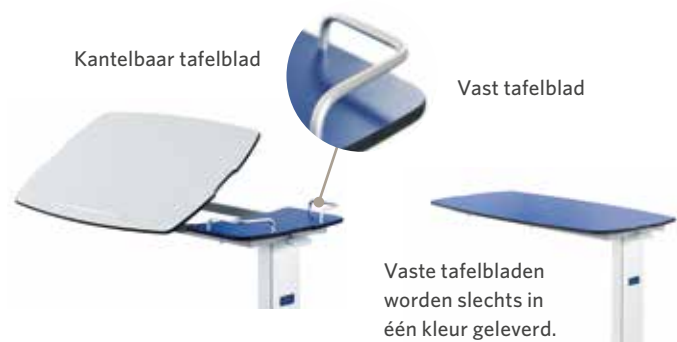

Februari 2019. Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep. © Arjo, 2019

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd 'with people in mind'.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
Arjo Nederland BV · Biezenwei 21, 4004 MB Tiel · Postbus 6116, 4000 HC Tiel · Nederland · +31 (0) 344 64 08 00

www.arjo.nl