



LOFTLIFTLØSNINGER

Maxi Sky® 2-serien



Løft jeres kompetencer for plejemodtagerhåndtering til et helt nyt niveau

- Støt en best practice-kultur inden for plejemodtagerhåndtering
- Spar tid ved forflytning af afhængige plejemodtagere uden at gå på kompromis med sikkerheden¹
- Understøt en effektiv proces til rengøring og desinfektion af loftlifte

I de moderne, travle plejemiljøer sætter loftliftløsninger nu standarden for fremragende effektivitet inden for plejemodtagerhåndtering.

Undersøgelser viser, at lidt over 75 % af plejepersonalet foretrækker loftlifte frem for andre løsninger til forflytning og håndtering af plejemodtagere. I nogle institutioner er der konstateret en betydelig reduktion på helt op til 70 % i registrerede skader og kompensationskrav efter indførelse af en loftlift.²

Vores serie af Maxi Sky 2-loftlifte leverer en komplet og intuitiv løsning til håndtering og forflytning af plejemodtagere. Maxi Sky 2-loftlifte egner sig både til akutte og langtidsplejemiljøer og hjælper med at sikre både trivsel og et godt arbejdsmiljø for plejepersonale og plejemodtagere.

Den daglige prævalens i akutplejen af infektioner, der erhverves i forbindelse med sundhedspleje, er 6 % og rammer over 3,2 millioner plejemodtagere hvert år, alene i Europa.²

I USA er den anslåede årlige udgift til infektioner, der erhverves i forbindelse med sundhedspleje, helt oppe på 47 milliarder USD.³

Vi præsenterer Maxi Sky 2 Infection Control

Infektionskontrol er afgørende vigtigt i alle plejemiljøer. Sikker forflytningssudstyr, der benyttes hyppigt og bliver anvendt til flere forskellige plejemodtagere, er ingen undtagelse.

Maxi Sky 2 Infection Control hjælper jer med at minimere risiciene og den deraf følgende krydsinfektion under forflytninger med loftlifte, så I kan løfte jeres kompetencer inden for plejemodtagerhåndtering til et helt nyt niveau.

- Ikke-porøse komponenter
- Nem rengøring og desinfektion
- Kan anvendes sammen med en bred vifte af desinfektionsmidler til brug i sundhedspleje



Det komplette system til plejemodtagerhåndtering

Maxi Sky 2-serien er særligt konstrueret med henblik på fleksibilitet og brugervenlighed, og den leverer en skræddersyet løsning til de særlige behov og krav i jeres plejemiljø.

Kombineret med Arjo KWIKtrak™-konfiguration og fleksible layoutmuligheder sikrer loftliften ergonomisk forflytning af plejemodtageren og er en let tilgængelig valgmulighed. En loftliftløsning kan hjælpe jer med at minimere de risici, der forbindes med manuelle arbejdsteknikker, så jeres arbejds effektivitet stiger.



Nem tilslutning og positionering

Udskift og fastgør løftebøjler med kun tre enkle trin ved hjælp af det intuitive monteringsystem Quick Connect. Når plejemodtageren sidder sikkert i sejlet, sørger Dynamic Positioning System (DPS) eller elektrisk DPS for præcis og ubesværet placering af plejemodtageren.



En sikker arbejdsbelastning på tværs af plejemodtagerdemografi

SWL (Safe working load) fås i følgende versioner: 272 kg, 200 kg eller 120 kg og giver dermed fleksibilitet i forhold til jeres behov.



Intuitiv anvendelighed for en enkelt plejeperson

Maxi Sky 2 er konstrueret til at optimere arbejdsrutinerne hos den enkelte plejeperson med en brugervenlig håndbetjening og et farvedisplay, der viser vigtige data og batteriets levetid.



Nye opgraderinger til infektionskontrol

Løft effektiviteten af jeres nuværende Maxi Sky 2, og bidrag til at minimere risikoen for infektioner, der erhverves i forbindelse med sundhedspleje. Den nye Infection Control-opgradering inkluderer ekstra Infection Control-løfterem, Infection Control-nødstoppsnor i 100 % silikone samt 2-punkts løftebøjle med Infection Control-betræk.

Et omfattende udvalg af tilbehør og opgraderinger

Med henblik på at imødekomme de unikke og konstant skiftende behov hos de enkelte plejemodtagere tilbyder vi et omfattende udvalg af løftebøjler og tilbehør, så I altid kan tilpasse og optimere jeres forflytninger.

Vælg mellem flere forskellige løftebøjler




Infection Control



Medium 2-punkts



Lille 2-punkts

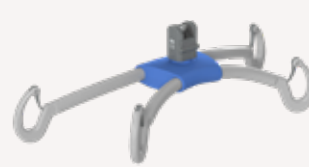

Stor 4-punkts



Manuel 4-punkts Dynamic Positioning System



Medium og stor 4-punkts Powered Dynamic Positioning System



Flad manuel 4-punkts Dynamic Positioning System



Bårestativ



For yderligere at understøtte individuelt tilpassede forflytninger hos jer tilbyder vi et omfattende sortiment af sejl til loftlifte. Sortimentet inkluderer både løkkesejl og Clip sejl, der er udviklet specifikt til 4-punkts DPS-løftebøjlesortimentet, samt engangssejl beregnet til en specifik plejemodtager.



Tilpasset rum dækning til jeres unikke miljø

KWIKtrak giver jer mulighed for tilpassede skinneløsninger og rumdækning til jeres Maxi Sky 2-serie. Det fleksible system dækker alle layoutkrav, og der findes løsninger til en lang række loftstyper.

KWIKtrak er specifikt konstrueret med æstetik for øje og er dermed en diskret løsning, der ubesværet kan integreres i jeres plejemiljø. Det fleksible system bidrager til at maksimere pladsudnyttelsen uden at gå på kompromis med effektiviteten i jeres miljø.

Hurtig montering

KWIKtrak-systemets modulopbyggede komponent-koncept, specielt det patenterede skinnebeslag, betyder, at montering af systemet foregår hurtigt og med minimal forstyrrelse af jeres miljø, så jeres Maxi Sky 2 er oppe at køre og i drift inden for meget kort tid.



ECS-opladningssystem (Enhanced Charging System)

ECS sikrer, at Maxi Sky 2 altid er klar til brug ved at sørge for, at batterierne hele tiden er opladet.



Buede skinner til KWIKtrak

KWIKtrak 90 mm-skinneprofiler fås i 45° og 90° – der begge passer til ECS (Enhanced charging system). Den perfekte profilsymmetri betyder, at der ikke opstår problemer med bøjning af de buede skinner.



Mobile valgmuligheder

KWIKtrak kan også benyttes som fritstående halvpermanente skinner, både som enkeltskinne eller X-Y-system til fuld rumdækning.



Passage gennem forhæng

Forhæng kan passere gennem et "hul" i skinnen, så I kan give plejemodtagerne privatliv og opretholde deres værdighed.

