



Bade- og
velværsystem
for alle
mobilitetsnivåer

RHAPSODY®, PRIMO® OG HARMONIE®

System 2000® assisterte badeløsninger



System 2000®

I Arjo mener vi at bading skal være en trygg, beroligende og sensorisk opplevelse som gir velvære og forbedrer livskvaliteten. Den skal være tilgjengelig for beboere og pasienter på alle mobilitetsnivåer.

System 2000 består av badekarene Rhapsody, Primo og Harmonie samt et utvalg av helintegrerte forflytningshjelpemidler, og er utformet for å forenkle den totale hygienerutinen med bare én enkelt forflytning fra sengen eller rullestolen til badekaret. Dette tilrettelegger for en effektiv arbeidsflyt, som gir en behagelig og avslappende badeopplevelse for pasienter og beboere på alle mobilitetsnivåer.

Egnet for alle mobilitetsnivåer fra Albert, Barbara, Carl, Doris til Emma

A



Albert, som er oppegående og selvhjulp.

B



Barbara, som til en viss grad kan holde seg oppreist.

C



Carl, som sitter i rullestol og har liten evne til å holde seg selv oppreist

D



Doris, som ikke kan holde seg selv oppreist.

E



Emma, som er nesten helt sengeliggende og totalt hjelpetrengende



Kan brukes av én enkelt pleier

Muliggjør en strømlinjeformet hygienerutine som kan utføres av én enkelt pleier, for beboere på alle mobilitetsnivåer. Vår badekareløsning er utformet for å redusere faren for overbelastning eller skade på både pleieren og beboeren, ved å redusere antallet forflytninger som trengs fra forflytning og avkledning til bading.



Bad for velvære

Velg mellom en rekke funksjoner som er laget for å bidra til å gjøre badet til en behagelig og avslappende opplevelse for beboere med ulike nivåer av fysiske og kognitive evner.



Integrerte funksjoner for desinfisering

Vårt valgfrie integrerte desinfiseringssystem er laget for å gjøre rengjøringen og desinfiseringen av badekaret – samt forflytningsutstyret – rask, grundig og effektiv.

En helintegrert og ergonomisk løsning

System 2000-badekarene er laget for å integreres med badeheiser og takheiser fra Arjo, slik at du sikkert og komfortabelt kan transportere pasienten eller beboeren fra sengen eller rullestolen til badekaret og tilbake igjen, i én effektiv og trygg bevegelse. Den integrerte løsningen er utformet for å minimere risikoen for overbelastning eller skader for pleieren, og risikoen for at pasienten eller beboeren faller eller glir.

System 2000-badekarene er også kompatible med Calypso og Bolero badeheiser, avhengig av tilgjengelighet.

8 enkle trinn for å skape en skreddersydd badeopplevelse med System 2000

1. Velg riktig badeheis

Velg den riktige høyderegulerbare badestolen, den høyderegulerbare badevognen eller takheisen, avhengig av beboeres funksjonelle mobilitetsnivå.

2. Velg ønsket badekarlengde

Velg den badekarlengden som passer best til beboerens mobilitetsnivå, og som er tilrettelagt for den ønskede heisen.

3. Form på badekar

Velg mellom den vanlige formen til et tradisjonelt, rett badekar, eller et nøkkehullformet badekar som er utformet for å gi ekstra plass til skuldrene når beboeren legger seg bakover i badekaret.

4. Øk de terapeutiske fordelene ved bading

Velg mellom Hydromassage, Hydrosound og/eller Sound & Vision for å øke de terapeutiske fordelene ved bading for beboerne.

5. Sikkerhet og beskyttelse

Flere kontroller for skåldingsbeskyttelse hindrer at vannet blir varmere enn sikre temperaturer, samtidig som autofylling slår av vannet når det foretrukne vannivået er nådd. Dermed kan du konsentrere deg om å gjøre beboeren klar for badet.

6. Desinfisering

Innebygd desinfiseringssystem er tilgjengelig for praktisk rengjøring og desinfisering av badekaret og forflytningsutstyret.

7. Såpeprodukter

Arjo tilbyr en rekke badeoljer og en sjampo og kroppsvask, som er sammensatt for å støtte skånsomme rengjøringsrutiner.

8. Tilleggsutstyr

Øk beboerens fysiske komfort og gjør badeøktene mer praktiske med et utvalg standard og valgfritt tilbehør.

System 2000 har et utvalg ulike badekarformer og -lengder, og gir deg fleksibiliteten til å velge det riktige badekaret for pasienten eller beboeren. Alle System 2000-badekar er høyderegulerbare, slik at du kan finne den optimale arbeidshøyden og opprettholde god øyekontakt med beboeren.



RHAPSODY®

Har nøkkelhullform som gir ekstra plass til skuldrene og bedre tilgang til overkroppen.



PRIMO® & HARMONIE®

Både Primo og Harmonie har den kjente formen til et tradisjonelt, rett badekar i flere lengder, mens Harmonie finnes i bredere dimensjoner, utformet med tanke på behovene til de større beboerne.



MAXI SKY® 2 MED MESH SLING®

Vår Maxi Sky 2 takheis er en lett tilgjengelig, trygg forflytningsløsning for hjelpetrengende beboere. Den går fra sengen til badekaret i en enkelt, jevn forflytning. Når takheisen kombineres med et nettingseil, kan vannet lett renne gjennom stoffet. Dette gjør det ideelt for dusjing og bading.



ALENTI®

Alenti er en høyderegulerbar badestol designet for beboere som klarer å holde overkroppen oppreist når de sitter. Den gir en behagelig sittestilling og tilbakeleant stilling. Alenti har lite rullemotstand, noe som gjør den lett å manøvrere. Den kan også benyttes fra begge sider av badekaret. Andre hygieneoppgaver som toalettbesøk og dusjing kan utføres mens beboeren sitter.



Designed med tanke Albert, Barbara og Carl.



MIRANTI®*

Miranti er en høyderegulerbar badevogn laget for beboere som trenger å være i tilbakeleant stilling. Den kan lenes delvis eller helt tilbake. Et femte, motorisert hjul som tillegg gjør at pleieren kan manøvrere Miranti fra sengen til badet.



Kompatibel med Rhapsody og Primo størrelse 2300 og 2500 mm. Designet med tanke på Doris og Emma.



Designet med tanke på Doris og Emma.

System 2000-badekar er også kompatible med Calypso og Bolero høyderegulerbare badestoler, avhengig av tilgjengelighet.

*Miranti er kompatibel med badekarlengdene i System 23 og System 25.



En effektiv rutine som kan utføres av én enkelt pleier

System 2000 badeløsninger har tydelige, universelle betjeningsikoner og er utformet for enkel drift av én enkelt pleier. Dermed kan du vie mer tid og oppmerksomhet til pasienten eller beboeren.

Viktige funksjoner og fordeler:

- Høyderegulerbar for enklere pasienttilgang og slik at du kan finne en behagelig arbeidsstilling gjennom hele hygienerutinen.
- Enkelt eller dobbelt dusjhåndtak med låsbar utløser og lang, fleksibel slange.
- Tredobbel, elektronisk skåldingsbeskyttelse med termostatblander opprettholder en konsekvent temperatur gjennom hele badesyklusen og sikrer automatisk nedstenging hvis vanntemperaturen overskrider et trygt nivå.
- Kontrollpanel med digitalt display for enkel kontroll av vanntemperatur.
- Rask fyllekapasitet fyller badekaret hurtig, mens funksjonen for automatisk fylling fyller badekaret og stopper automatisk når det forhåndsinnstilte vannivået er nådd, slik at du kan fokusere på pasienten eller beboeren.
- Integrert doseringssystem for flytende såper, oljer og sjampoer.



Reduser risikoen for krysskontaminering

Valgfritt, integrert doseringssystem for rengjøring og desinfisering med et spesielt, gult håndsett, designet for å gi rask, grundig og effektiv rengjøring av badekaret og alle forflytningsenheter du har brukt. Desinfiseringshåndsettet er lett tilgjengelig fra panelrommet og leverer desinfiseringsvæske i riktig fortynningsforhold. Badekaret har også et automatisk desinfiseringssystem for de innvendige komponenten i Hydromassage™-enheten.



Bading for å fremme velvære

System 2000-badeløsningen inneholder en rekke valgfrie funksjoner som gi bedre komfort og avslapping, og fremmer de beroligende og terapeutiske fordelene ved bading.



Hydromassage™ spaterapi

Hydromassage virker ved å lage bobler og gi en varsom massasjeeffekt, som er ment å stimulere til avslapping og gi en god sanseopplevelse.



Hydrosound™ rengjøringsterapi

Ved å lage lavfrekvente lydtrykksbølger genererer Hydrosound millioner av bobler i vannet. Disse fungerer som varsomme "hudskrubbere" som fjerner smusspartikler fra huden uten manuell vasking.



Sound and Vision™ multisensorisk opplevelse

Det er bevist at musikk bidrar til mindre aggressiv og opprørt atferd hos eldre personer som lever med demens. Sound and Vision lager fargerikt undervannslys og behagelig musikk som kan bidra til å roe ned stress og angst. Undervannslys, montert ved badekarets fot, kan stilles inn til å skifte mellom rødt, blått, rosa og gult, og en USB-port gjør at du kan spille rolig og avslappende musikk som pasienten eller beboeren foretrekker.

Tilleggsutstyr



Fotstøtte

Den flyttbare fotstøtten kan settes i fire ulike stillinger, og gir ekstra trygghet og komfort ved at den hindrer beboerne og pasientene i å skli ned i badekaret.



Pute

Puten kan festes til badekaret med sugekopper. Når puten er festet, blir den sittende forsvarlig på plass. Likevel er den enkel å flytte ved behov.

Valgfritt tilbehør



Behandlingsslange

Behandlingsslangen kan kobles direkte til Hydromassage-systemet, slik at pleiere kan gi lokal massasje på en arm eller et ben.



Kurv til toalettsaker

En kurv til tilbehør, som hektes på kanten, gjør at sjampo, badeoljer, toalettsaker og andre personlige artikler er lett tilgjengelig.

Viktige funksjoner

AUTOMATISK FYLLING

Fyller badekaret og stopper automatisk når det forhåndsinnstilte vannivået er nådd.

DUSJHÅNDTAK

Med lang, fleksibel slange og låsbar utløser for enkel kontroll.

VALGFRIE INTEGRERTE DISPENSERE FOR FLYTENDE SÅPE

For enkel bruk og tilgang til såpe, sjampo og badeoljer.

VALGFRI HYDROMASSAGE™, HYDRO SOUND™ OG SOUND AND VISION™

Fremmer de beroligende og terapeutiske fordelene ved bading.

FLERE NIVÅER AV

ANTISKÅLDINGSBESKYTTELSE

Opprettholder konsekvent temperatur og slår seg automatisk av hvis trygge temperaturnivåer overskrides.

INTEGRERT DESINFISERINGSSYSTEM SOM TILBEHØR

For krysskontamineringskontroll.

KONTROLLPANEL MED DIGITAL SKJERM*

RASK FYLLING

Med regulerbar vanntemperatur.

NØKKEHULLFORM (KUN RHAPSODY)

Gir ekstra plass til skuldrene når pasienten er i tilbaketrent stilling.

HØYDEREGULERBARE

Designet for å redusere risikoen for belastning eller skade på pleierne.



*Avbildet modell har P300 kontrollpanel. P220 kontrollpanel med mekanisk kontroll av vanntemperatur er også tilgjengelig.



Arjo Care

Arjo Care tilbyr ekspertservice av utstyret ditt, inkludert planlagt vedlikehold og inspeksjoner for å forebygge problemer før de oppstår. Dermed reduseres nedetiden på kostbart utstyr, som kan svekke sikkerheten og komforten til personale og pasienter. Vi leverer kun originale, validerte deler og tilbehør, og gir detaljert dokumentasjon for alle inspeksjoner for å sikre sporbarhet og samsvar.

La Arjo Care hjelpe dere med å holde utstyret i stand, slik at dere kan fokusere på det som er viktig: å gi pleie av høy kvalitet.

STANDARD FUNKSJONER

Temperaturdisplay
Temperatur- og trykregulert
Termostatblander
Avstenging ved utrygg vanntemperatur
Dusjhåndtak til høyre
Automatisk fylling
Overløp
Hodepute
Fotstøtte

VALGFRIE FUNKSJONER

Elektronisk overvåket og regulert blandeventil med P300-panel
Integrert rengjørings- og desinfiseringssystem
Integrert system for umiddelbar eller programmerbar dispensering av sjampo, kroppsvask og badetilsetninger.
Hydromassage-, Hydrosound- eller Soaker-badekar
Sound & Vision-terapi
Nødsenking
Varmtvannskyllesett (markeds spesifikt)
Doble dusjhåndtak (venstre og høyre side)
Mobil Hydromassage-terapidyse
Såpebrett
Programmerbar automatisk fylling med 3 nivåer
Automatisk desinfiseringssystem iht. sperring av kontrollpanelets funksjoner etter kontakttid

KOMPATIBLE ARJO-HEISER

Alenti
Miranti
Maxi Twin
Maxi Move, unntatt med stor hengebøyle
Maxi Sky 2 Plus

KOMPATIBLE BADEKARLENGDER I SYSTEM 2000

System 20, 23 og 25
System 23 og 25
System 20, 23 og 25
System 20, 23 og 25
System 20, 23 og 25

Produktspesifikasjoner

	RHAPSODY			PRIMO		HARMONIE
	Kort (System 20)	Standard (System 23)	Langt (System 25)	Kort (System 20)	Standard (System 23)	Kort (System 20)
Sikker arbeidsbelastning (pasient + vann), kg	500			500		
Pasientvekt, kg	182	182	182	182	182	182
Total lengde, mm	1970	2270	2520	1970	2270	2055
Total bredde, mm	970			760	7660	785
Minste høyde fra badekarkant, mm	835			620		
Maks. høyde fra badekarkant, mm	1330			1120		
Vannforbruk*, liter	195	235	280	185	230	250
Fylletid ved 3000 kPa dyn. trykk (Hw 80 °C)*, min.	3.50	5.00	6.00	3.50	5.00	6.5
Tømmetid, min	3.00	4.50	5.25	3.00	4.50	5.5
IP-klasse i henhold til IEC 60529 (badekar og kontrollpanel)	IP X4			IP X4		
IP-klasse håndkontroll og Sound & Vision-håndkontroll	IP X7			IP X7		
Maksimalt statisk vanntrykk	6 bar			6 bar		
Minste driftstrykk	2 bar 1 bar (UK)			2 bar 1 bar avhengig av UK-land		

Plassbehov


Denne tegningen viser en oversikt over det nødvendige arbeidsområdet for ulike mobilitetsutstyr og ulike badekarlengder for System 2000*.

Det blå områder viser nødvendig arbeidsområde for å kunne lette forflytnings- og hygieneaktiviteter og gi tilstrekkelig atkomst for beboeren, utstyret og pleieassistenten.

Merk: Plassbehovene på bildet inkluderer ikke integrering av takheis.


MINIMUM PLASSBEHOV

Kort liggebadekar med høyderegulerbar hygienestol

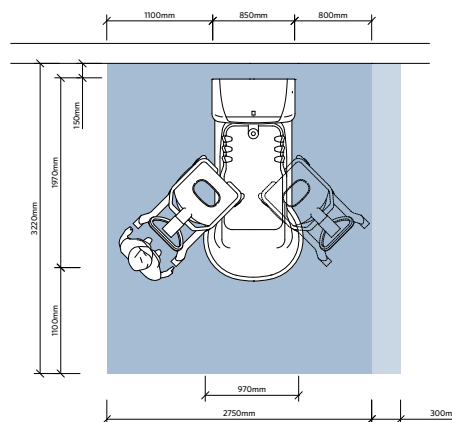

MAKSIMUM PLASSBEHOV

Langt liggebadekar med høyderegulerbar badevogn

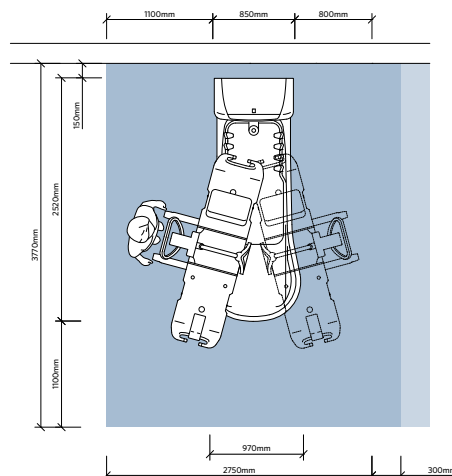

Du finner mer detaljerte retningslinjer, ekspertkunnskaper og nedlastbart materiale om planlegging og arkitektonisk utforming av pleiemiljøer på [Arjos veiledning for arkitekter og planleggere](http://www.arjo.com) på www.arjo.com.

Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® og ™ er varemerke som tilhør Arjo konsernet. © Arjo, Oktober 2019

Hos Arjo forplikter vi oss til å forbedre dagliglivet til mennesker med redusert bevegelse og aldersrelaterte helseutfordringer. Vi leverer produkter og løsninger som sikrer ergonomisk pasienthåndtering, personlig hygiene, desinfisering, diagnostikk og effektiv forebygging av trykksår og venøs tromboembolisme, som hjelper fagfolk i alle typer pleiemiljø med hele tiden å heve standarden for sikker og verdig pleie. Alt vi gjør, gjøres med mennesker i fokus.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Norge AS • Olaf Helsets vei 5 • N-0694 • Norway • +47 22 08 00 50

www.arjo.com