

## SOLLEVATORE IGIENICO A SEDIA AD ALTEZZA REGOLABILE

# Alenti®



Alenti è progettato per consentire a un singolo assistente di occuparsi dell'intero ciclo del bagno, mantenendo in ogni fase una postura di lavoro sicura. Alenti si integra pienamente con la nostra gamma di vasche da bagno per posizione supina.

### **Per una pratica del bagno più efficiente**

Consente a un singolo operatore di sollevare il residente/paziente dal letto o dalla sedia a rotelle e trasferirlo direttamente nella vasca da bagno e viceversa. Alenti può essere utilizzato anche per altre operazioni igieniche, riducendo pertanto i trasferimenti connessi alle routine d'igiene quotidiane.


### **Progettato per una facile pulizia e disinfezione**

Il sedile è progettato per favorire la pulizia e la disinfezione grazie alla sua struttura monoblocco sagomata e alle superfici lisce, rivestite con schiuma a cellule chiuse in PUR. Anche la cintura di sicurezza è lavabile per ridurre il rischio di contaminazioni crociate.

### **Seduti e supportati durante tutto il trasferimento**

Il residente/paziente può rimanere seduto in tutta sicurezza su Alenti mentre viene trasferito dentro e fuori dalla vasca da bagno, riducendo così il rischio di cadute.

Progettata pensando ad Albert, Barbara e Carl

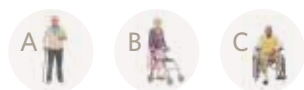

# Caratteristiche principali

## ALTEZZA REGOLABILE ELETTRICAMENTE

Ampia escursione per adattarsi a residenti/pazienti di ogni altezza. Funzione integrata di avviamento progressivo.

## SCHIENALE

Garantisce un sostegno aggiuntivo e può essere montato su uno dei due lati del sedile di Alenti.

## SEDILE ANATOMICO

Progettato per un maggiore comfort e un corretto posizionamento dell'assistito quando si siede.

## RUOTE DAL PERFETTO SCORRIMENTO

## FRENI CENTRALI

Attivati con la pressione di un pulsante.

## DOPPI COMANDI

Due distinti set di comandi (uno sullo chassis e uno sulla pulsantiera) permettono all'operatore di azionare il dispositivo rimanendo vicino all'assistito.

## IMPUGNATURE PIEGHEVOLI

Forniscono supporto durante i trasferimenti e le routine di igiene.

## BATTERIA RICARICABILE

Vengono fornite due batterie e un caricabatterie, in modo da averne sempre una a disposizione mentre l'altra è in carica.


## BILANCIA (OPZIONALE)

La bilancia elettronica a bordo estremamente precisa può essere usata come una comoda alternativa per pesare i residenti/pazienti.

## SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO DI EMERGENZA



## REQUISITI DI SPAZIO

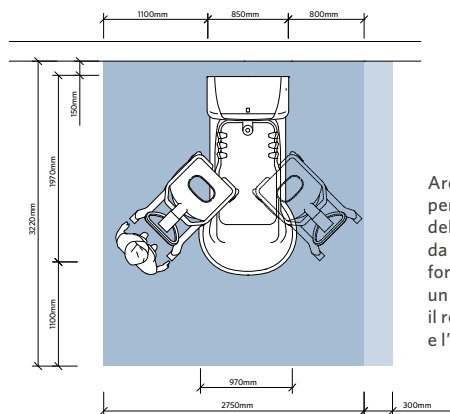

Area di lavoro necessaria per facilitare le attività del bagno e di trasferimento da entrambi i lati della vasca, fornendo al contempo un accesso adeguato per il residente, le attrezzature e l'operatore.

## FUNZIONI E ACCESSORI STANDARD

- Altezza regolabile
- Supporto dello schienale rimovibile
- Freni centrali
- Doppi comandi
- Batterie ricaricabili x 2
- Caricabatteria
- Sollevamento e abbassamento d'emergenza
- Cintura di sicurezza lavabile
- Impugnature pieghevoli

## FUNZIONI E ACCESSORI OPZIONALI

- Bilancia integrata
- Porta-padella
- Padella con coperchio
- Supporto per le gambe

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Carico di Lavoro Sicuro (SWL)	182 kg
Peso totale (sollevatore e bilancia)	72 kg
Larghezza totale	640 mm
Lunghezza totale	1010 mm
Altezza del sedile, posizione più bassa	470 mm
Altezza del sedile, posizione più alta	1070 mm
Corsa di sollevamento (sedile)	590 mm
Larghezza Chassis esterna	640 mm
Larghezza Chassis interna	478 mm
Altezza sotto il telaio	35 mm
Lunghezza Chassis max (freni inclusi)	1010 mm
Raggio di sterzata (posizione a barella piatta)	Ø 1110
Tensione di alimentazione	24 V cc
Potenza max	200 VA
Classe di protezione	IP X4
Classe di protezione	IP X7 (pulsantiera)

Per informazioni più dettagliate, visitare il sito [www.arjo.it](http://www.arjo.it)