

VERTICALISATEUR NON MOTORISÉ

# Sara® Stedy



Le Sara Stedy et le Sara Stedy Compact permettent à un seul soignant d'aider les patients ou les résidents à effectuer des transferts de la position assise à la position debout au quotidien.

## MOBILITHÈQUE ARJO



B

© Arjo 2019

B. Peut se déplacer dans une certaine mesure, mais utilise un déambulateur/des béquilles pour se soutenir.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Soutien à la mobilisation précoce**

Le Sara Stedy peut soutenir les stratégies de mobilisation précoce en encourageant les patients à être actifs lors des transferts de la position assise à la position debout.

- **Disponible en deux tailles**

Le Sara Stedy permet à un seul soignant de verticaliser de nombreux patients de différentes tailles et aux évaluations cliniques diverses.

- **Des transferts quotidiens simplifiés**

Le Sara Stedy et le Sara Stedy Compact sont des dispositifs non motorisés.

- **Produit homologué pour la prise en charge de la démence par le DSDC**

Le Dementia Services Development Centre de l'Université de Stirling a réalisé une révision du Sara Stedy et lui a décerné une homologation du produit en catégorie 1B DSDC.



# Principales caractéristiques

## SARA STEDY

Conçu pour des patients de 149 à 193 cm (4'11"-6'6") et pesant jusqu'à 182 kg (400 lb).

### BARRE D'APPUI PATIENT

Permet au patient de se tenir en tirant activement.

### SIÈGE SCINDÉ EN DEUX PARTIES PIVOTANTES

Le siège pivotant peut être escamoté pour aider le patient à se lever et fournir un soutien en position assise pendant le transfert.

### SUPPORT POUR LES GENOUX

Le support-genoux offre une stabilité supplémentaire et un support ferme lors de la verticalisation, mais aussi pour les jambes du patient lors du transfert.

### ÉCARTEMENT DES PIEDS COMMANDÉS PAR PÉDALE

Facilement réglables pour un accès optimal aux sièges larges.



## SARA STEDY COMPACT

Conçu pour des patients de petite taille, mesurant 138 à 172 cm (4'6"-5'8") et pesant jusqu'à 182 kg (400 lb).

## INFORMATIONS PRODUIT

	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Capacité maximale admissible	182 kg/400 lb	182 kg/400 lb
Poids du verticalisateur	29,4 kg/64,82 lb	28,3 kg/62,5 lb
Hauteur de rangement totale min.	1 050 mm/41 1/3 po	960 mm/37,8 po
Largeur externe, avec pieds rapprochés	490 mm/19 1/3 po	490 mm/19 1/3 po
Largeur externe, pieds complètement écartés	880 mm/34 2/3 po	880 mm/34 2/3 po
Largeur interne, jambes fermées	360 mm/14 1/5 po	360 mm/14 1/5 po
Largeur interne, pieds complètement écartés	750 mm/29 1/5 po	750 mm/29 1/5 po
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	100 mm/3 7/8 po	100 mm/3 7/8 po
Espace sous le châssis (du sol à la partie inférieure du châssis)	30 mm/1 1/5 po	30 mm/1 1/5 po
Longueur totale du lève-personne	920 mm/36 1/5 po	890 mm/35 po
Rayon de rotation	1 040 mm/41 po	1 020 mm/40 1/8 po

Roulettes à faible friction avec freins sur les deux roulettes arrière


Le Dementia Services Development Centre (DSDC) de l'Université de Stirling (Écosse) a réalisé une étude de ce produit et a évalué sa conception en vertu des principes de conception applicables à la prise en charge de la démence et de sa facilité d'utilisation dans un environnement adapté à des personnes atteintes de démence. Pour une identification plus aisée, l'adéquation du produit est évaluée grâce à un nombre accompagné d'une explication, au regard des clés de classification fournies. Le logo du produit homologué DSDC est attribué en fonction des distinctions de chaque produit par des codes couleur. Cette homologation n'est liée ni à la fabrication ni à l'utilisation finale du produit. Si tout a été mis en œuvre pour assurer la justesse de l'évaluation afin qu'elle reflète l'adéquation des produits et leur application au moment de l'impression, le DSDC ne peut être tenu responsable de l'utilisation finale du produit, de ses performances ou de sa jonction avec d'autres produits ou finitions. Pour qu'un environnement soit considéré comme adapté aux personnes atteintes de démence, il convient de procéder à un examen attentif des caractéristiques des finitions attenantes, des performances (par exemple le Coefficient de Réflexion Lumineuse (CRF), le caractère antidérapant et l'utilisation de motifs), ainsi que de leur compatibilité avec l'utilisation prévue.

## ACCESSOIRES

Une large gamme de harnais lavables, à usage unique et essuyables est disponible

Désinfectants Arjo

## ESPACE REQUIS

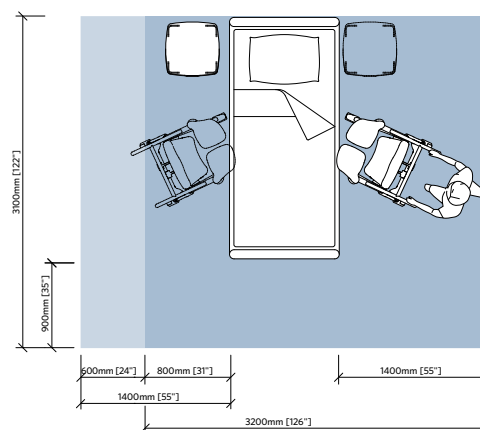

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant puisse utiliser les aides mécaniques de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique l'extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter les activités des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au patient, à l'aide mécanique et au personnel soignant.

Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Suède • +46 10 335 4500  
 Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13  
 Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0)61 337 97 77  
 Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00170.2.0.FR.FR

**arjo**