





Sara Stedy / Sara Stedy Compact

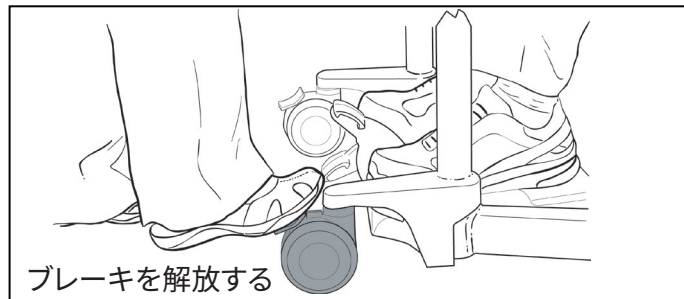



ブレーキをかける場合、解放する場合

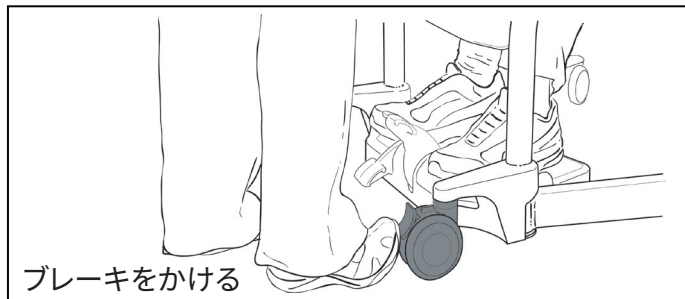



脚部の開閉

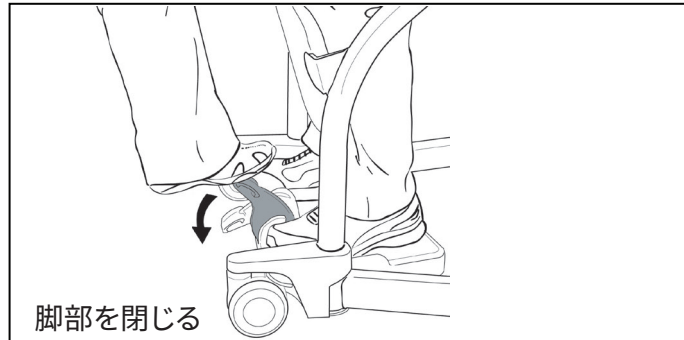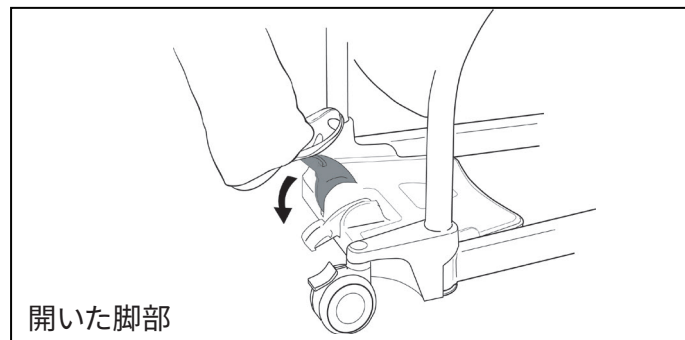

回転クッション

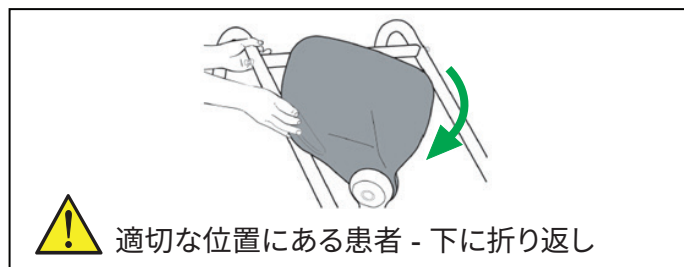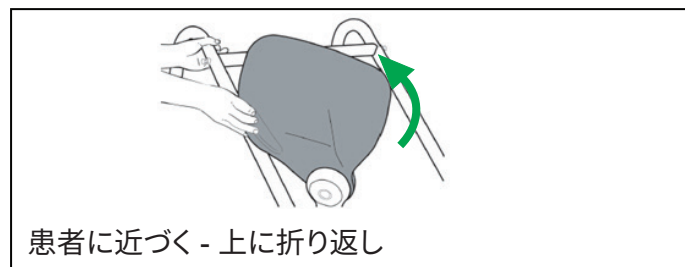

スリング取付ラグ

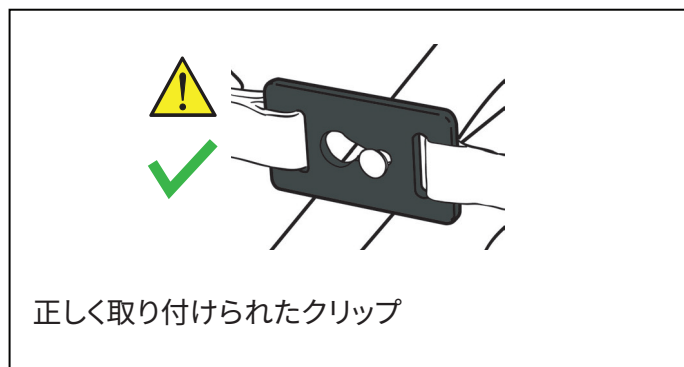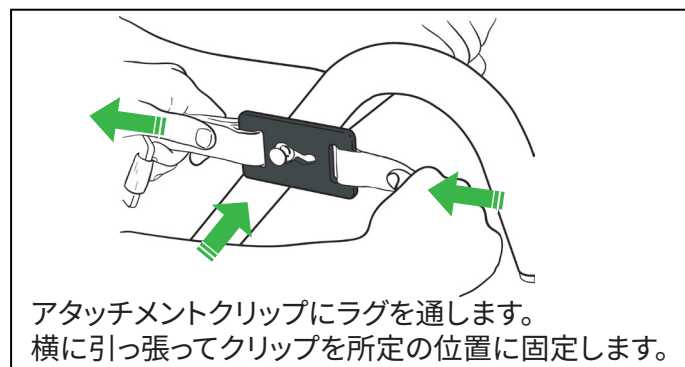

クリーニングと消毒

消毒洗浄剤を入れた温水を使って湿らせた布で拭き取ります。
イソプロピルアルコールの70 % v/v溶液を染み込ませた消毒用ワイプも使用できます。
ワイプを使用するときは、リフトを十分にこすってください。
表面の仕上げを損なう可能性のあるフェノール、塩素または他のタイプの溶媒は使用しないでください。

