

Walker®



Walker fournit le soutien nécessaire pour les premiers pas, à la fois pour le patient ou résident et pour le kinésithérapeute.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO



B

© Arjo 2019

B. Peut se déplacer dans une certaine mesure, mais utilise un déambulateur/ des béquilles pour se soutenir.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Les premiers pas**
Un outil d'entraînement qui offre des conditions sécurisées pour cette première étape.
- **Fonction montée/descente**
La fonction Montée-Descente réduit les risques du transfert pour le patient et le kinésithérapeute lorsque le patient est levé/baissé de/vers la position debout.
- **Caractéristiques en matière de sécurité et de confort**
Les poignées réglables offrent au patient une préhension ferme, la table de soutien en forme de U permet de s'appuyer dessus et les sangles de dos/suspension permettent d'empêcher les chutes.
- **Dispositif de conduite en ligne droite et freins**
Le dispositif de conduite en ligne droite aide le patient à marcher droit devant lui. Walker dispose de freins sur deux roues.
- **Accès libre**
Les côtés ouverts de Walker permettent au kinésithérapeute d'accéder librement aux hanches, aux genoux et aux chevilles du patient pour faciliter l'entraînement à la marche.

Principales caractéristiques

TABLE DE SOUTIEN

La table de soutien souple en forme de U est stable et permet de s'appuyer dessus.

SIÈGE EN FORME DE SELLE

Une fois le patient en position debout, le siège en forme de selle peut facilement être retiré.

POIGNÉES

Les poignées réglables permettent au patient de s'agripper fermement.

TÉLÉCOMMANDE

Walker dispose d'une télécommande qui permet au kinésithérapeute de rester près du patient.

DISPOSITIF DE CONDUITE EN LIGNE DROITE

Dispositif de conduite en ligne droite qui aide le patient à marcher en ligne droite et facilite le transport dans le couloir.



INFORMATIONS PRODUIT


Capacité maximale admissible	136 kg
Poids du lève-personne (avec batterie)	53 kg
Hauteur de rangement totale min.	1 165 mm
Largeur externe, avec pieds rapprochés	843 mm
Largeur interne, jambes fermées	694 mm
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	165 mm
Espace sous le châssis (entre le sol et le bas du châssis)	117 mm
Longueur totale du lève-personne	1040 mm
Rayon de rotation	1320 mm
Catégorie de protection du verticalisateur	IPX4
Classe de protection de la télécommande	IPX7
Batterie	24 V, 4 Ah

Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence

Coupure de sécurité automatique de l'alimentation en cas de descente sur un obstacle (version électrique)

Roues à faible friction avec freins sur les deux roues arrière

ESPACE REQUIS

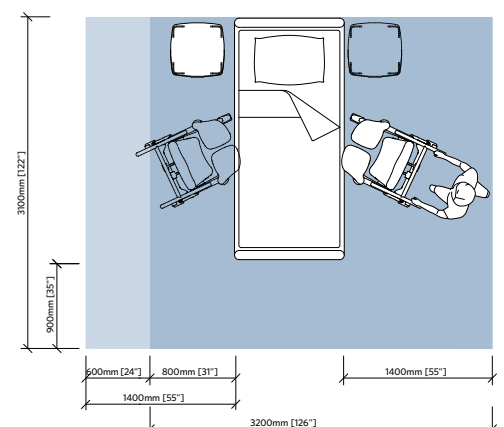

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant puisse utiliser les aides mécaniques de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleu clair indique l'extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter les activités des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au patient, à l'aide mécanique et au personnel soignant.

Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Walker® est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
 Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0)61 337 97 77
 Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00174.2.0.FR.FR

arjo