

VERTICALISATEUR AVANCÉ

Sara® Plus



Le Sara Plus est un verticalisateur motorisé conçu pour les transferts actifs et le renforcement de l'équilibre, la déambulation et l'aide à la marche.

GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO



C



D

© Arjo 2019

C. Peut partiellement supporter son poids sur au moins une jambe. Utilise un fauteuil roulant pour se déplacer sur une certaine distance.

D. Incapable de supporter son poids avec ses pieds. A besoin d'un bon soutien en position assise.

Pour plus d'informations, contactez Arjo.

- **Pour favoriser la mobilité grâce aux exercices**
Avec son repose-pieds amovible et le soutien de l'Arc Rest et du harnais, le Sara Plus a été conçu pour renforcer l'équilibre, faciliter la déambulation et entraîner à la marche.
- **Soutien du haut du corps**
L'Arc Rest est intégré au mécanisme de levage et apporte un soutien à la partie supérieure du corps pendant la verticalisation.
- **Un seul membre du personnel soignant**
Conçu pour être utilisé par un seul soignant, le Sara Plus peut s'avérer être une solution performante pour les transferts en position debout, la déambulation et l'aide à la marche.
- **Solutions harnais**
Le harnais est spécialement conçu pour le Sara Plus. Il garantit une fixation sûre du lève-personne qui maintient le patient ou le résident à proximité de l'Arc Rest. Différents types de sangles sont disponibles: de levage, de transfert/de déambulation et nettoyable.
- **Système de pesée en option**
Le système de pesée intégré en option contribue à une routine de pesée simplifiée.

Principales caractéristiques

ARC-REST

L'Arc Rest soutient les bras et le haut du corps du patient et peut l'aider à supporter son propre poids sur ses pieds ainsi que sur ses épaules.

SUPPORT JAMBES

Le rembourrage de protection pour genoux offre un support ferme et une stabilité supplémentaire, tout en permettant un mouvement ergonomique vers l'avant des genoux et la flexion des chevilles au cours du passage en position debout ou assise.

REPOSE-PIEDS AMOVIBLE

Le repose-pieds amovible permet la déambulation et la rééducation avec les pieds du patient directement au sol.



DOUBLE COMMANDE

Double commande sur le mât et la télécommande. La télécommande permet au personnel soignant de se déplacer et de rester proche du patient afin de maintenir un contact visuel tout au long de la procédure.

SYSTÈME DE PESÉE (EN OPTION)

Le système de pesée peut être utilisé pour peser des patients et suivre leur capacité à supporter leur poids lorsque le Sara Plus est utilisé sans le repose-pieds.

INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible	190 kg
Poids du lève-personne (avec batterie)	78,7 kg
Hauteur de rangement totale min.	1195 mm
Hauteur de levage min.	906 mm
Hauteur de levage max.	1497 mm
Largeur externe, avec pieds rapprochés	646 mm
Largeur externe, pieds écartés	1107 mm
Largeur interne, jambes fermées	534 mm
Largeur interne, pieds écartés	1002 mm
Espace pour les pieds (du sol au haut des pieds)	116 mm
Espace sous le châssis (entre le sol et le bas du châssis)	30 mm
Longueur totale du lève-personne	1033 mm
Rayon de rotation	1235 mm
Catégorie de protection du verticalisateur	IPX4
Classe de protection de la télécommande	IPX7
Batterie	24 V, 6 Ah

Voyant de charge de la batterie

Indicateur d'heures de fonctionnement - affiche la durée totale d'utilisation (en heures)

Arrêt d'urgence et bouton de descente d'urgence

Coupure automatique de l'alimentation en cas de descente sur un obstacle

Roues à faible friction avec freins sur les deux roulettes arrière

ACCESSOIRES

Une large gamme de harnais lavables, à usage unique et essuyables est disponible

Siège toilette

Repose-pieds étroit

Rallonge de repose-pieds

Large protège-genoux rembourré


Housse molletonnée du rembourrage de genoux

Sangles de bras

Sangles de jambes

En option : Pèse-personne intégré

ESPACE REQUIS

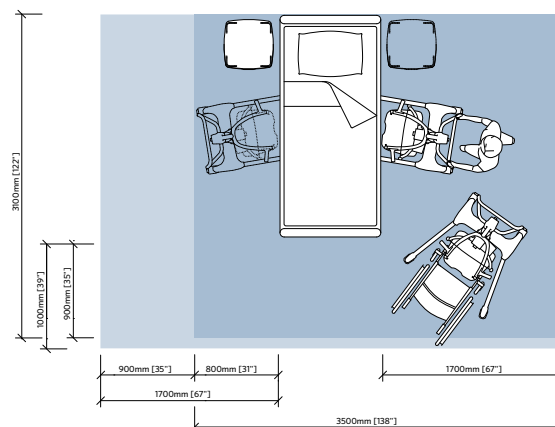

- La zone bleue indique la superficie de travail minimale requise pour que le personnel soignant puisse utiliser les aides mécaniques de manière ergonomique à partir d'un seul côté.
- La zone bleue claire indique l'extension nécessaire de la zone de travail pour faciliter les activités des deux côtés afin d'offrir un accès adéquat au patient, à l'aide mécanique et au personnel soignant.

Novembre 2019. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Sara® Plus est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Arjo AB • Hans Michelsengatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
 Arjo France SAS • 2, Avenue Alcide de Gasperi • CS 70133 • 59436 Roncq Cedex • France • +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG • Fabrikstrasse 8 • 4614 Hägendorf • Suisse • +41 (0)61 337 97 77
 Arjo Belgium sa • Evenbroekveld 16 • 9420 Erpe-Mere • Belgique • +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A00173.2.0.FR.FR

arjo