


Dezynfekcja za pomocą zintegrowanego spryskiwacza

Usunąć widoczne zanieczyszczenia

1

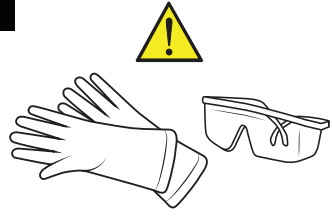

Założyć rękawice i okulary ochronne.

2




Wanna powinna być ustawiona w pozycji pionowej z wyłączonymi wszystkimi funkcjami.

3



Otworzyć odpływ. Umieścić wszystkie akcesoria na dnie.


4

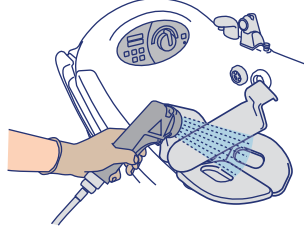

Spryskać wodą, aby usunąć widoczny osad.


Ustalić proporcję mieszania środka dezynfekującego

5

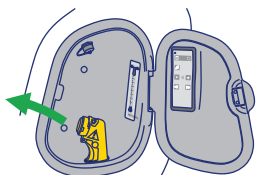


Podnieść dźwignię spryskiwacza dezynfekującego.

6




5 sekund
Aktywować przycisk dezynfekcji.

7

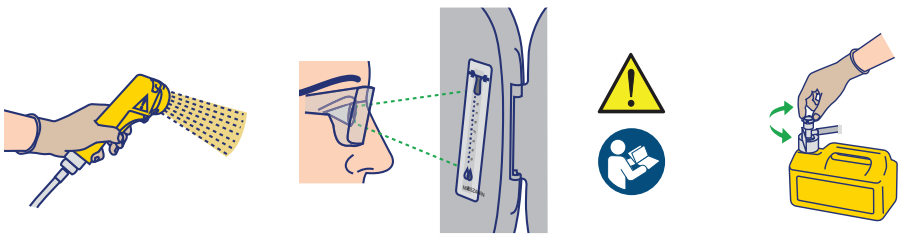

Rozpylać do wanny tak długo, aż przepływomierz pokaże prawidłową wartość mieszania zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby wyregulować pokrętkę na wężu ssącym.

8



Temperatura mieszania 20°C (68°F).

Oczyszczyć

9



Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym. Wyszorować odpływ przy pomocy szczotki.

10



Zamknąć odpływ.

11



Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.

12



Dokładnie wyszorować powierzchnie wewnętrzne i akcesoria.

W przypadku modelu Parker bez Air spa przejdź do kroku 24.

Kroki 13-23 tylko dla Air spa

13



Obniżyć wannę.

14



Umieścić dźwignię spryskiwacza dezynfekującego we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

15



Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Środek dezynfekcyjny musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

16



Zwolnić przełącznik oraz wyjąć końcówkę natryskującą.

17



Odłożyć rączkę rozpylacza.

18



5 sekund
Dezaktywować przycisk dezynfekcji.

19



Umieścić słuchawkę prysznicową we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

20



Aktywować przycisk prysznica.

21



Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Czysta woda musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

22



Wyjąć słuchawkę prysznicową.

23



Podnieść wannę do pozycji wyprostowanej.

Dalsze kroki na następnej stronie

24



Otworzyć odpływ.

25



Temperatura wody 25°C (77°F).

26



Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

27



Aktywować przycisk prysznica.

28



Nasączyć ścierkę środkiem dezynfekcyjnym. Przetrzeć wszystkie powierzchnie zewnętrzne.

Dezynfekcja

29



Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.

30



5 sekund
Aktywować przycisk dezynfekcji.

31



Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym.


32



Zamknąć odpływ.


Kroki 35-46 tylko dla Air spa

33

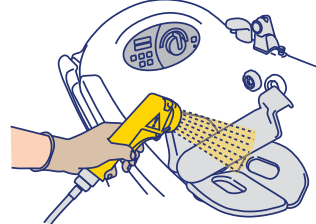


Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.

34

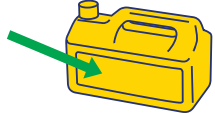


Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego pojemniku.

35




Obniżyć wannę.

36




Umieścić dźwignię spryskiwacza dezynfekującego we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

37

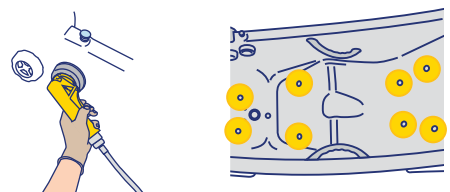


Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Środek dezynfekcyjny musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

38




Zwolnić przełącznik oraz wyjąć końcówkę natryskującą.

39




5 sekund
Dezaktywować przycisk dezynfekcji.

40




Odłożyć rączkę rozpylacza.

41

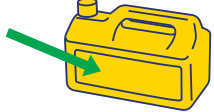


Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego pojemniku.

42

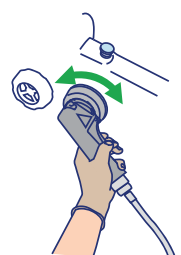


Umieścić słuchawkę prysznicową we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

43




Aktywować przycisk prysznica.

44

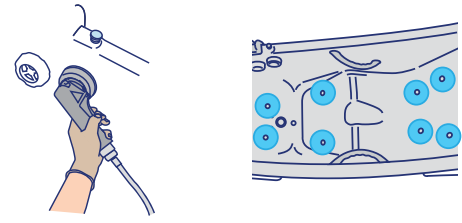


Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Czysta woda musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

45

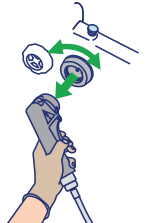

Wyjąć słuchawkę prysznicową.

46



Podnieść wannę do pozycji wyprostowanej.


Dalsze kroki na następnej stronie

47



Otworzyć odpływ.

48




Aktywować przycisk prysznica.

49




Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

50

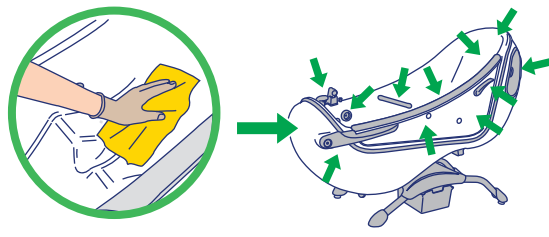

Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.

51

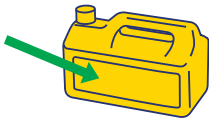

Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego pojemniku.



52



Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.

Kroki 53-54 tylko dla Air spa

53

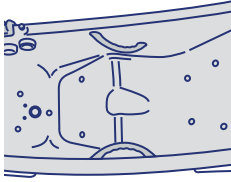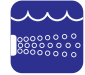

Nacisnąć dwa razy przycisk Air spa. Uruchomić z najwyższą intensywnością przez 30 sekund.

54



Nacisnąć raz, aby wyłączyć.

55




Pozostawić do wyschnięcia.

Dezynfekcja za pomocą butelki


Usunąć widoczne zanieczyszczenia

1




Założyć rękawice i okulary ochronne.

2

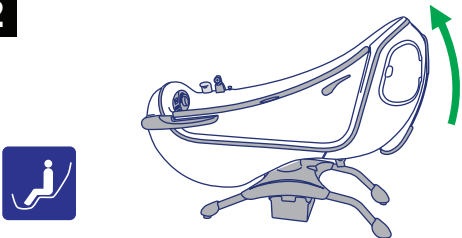


Wanna powinna być ustawiona w pozycji pionowej z wyłączonymi wszystkimi funkcjami.

3

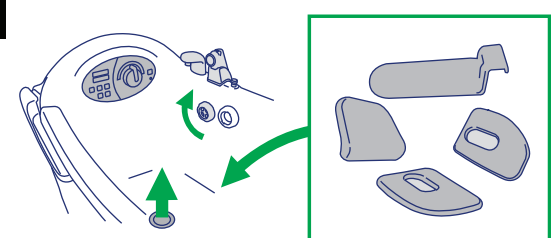

Otworzyć odpływ. Umieścić wszystkie akcesoria na dnie.


4

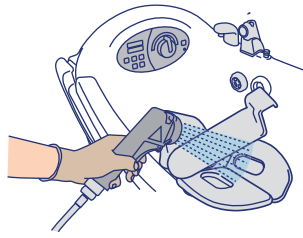

Spryskać wodą, aby usunąć widoczny osad.


Oczyścić

5




Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym. Wyszorować odpływ przy pomocy szczotki.

6

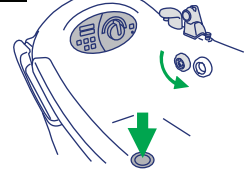


Zamknąć odpływ.

7

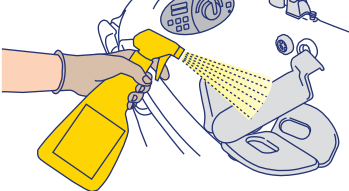


Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.

8

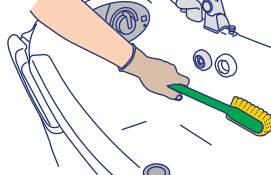


Dokładnie wyszorować powierzchnie wewnętrzne i akcesoria.

9

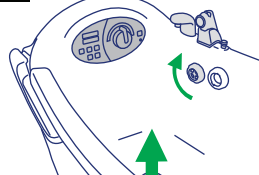


Otworzyć odpływ.

10

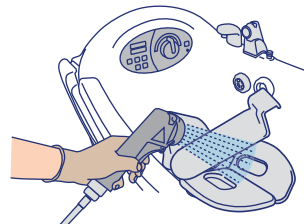


Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

11

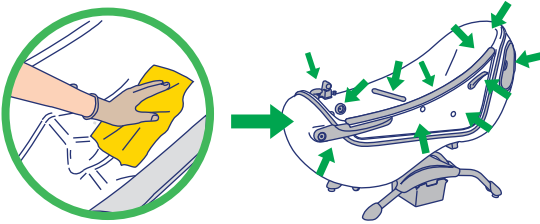

Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.


12

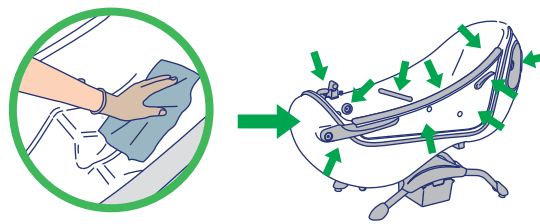

Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.


Dezynfekcja

13




Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym.

14

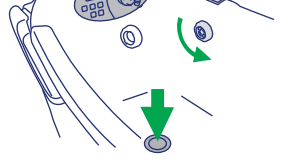


Zamknąć odpływ.

15

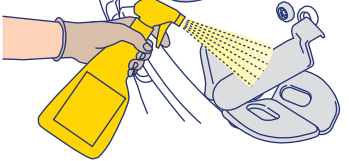


Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.

16

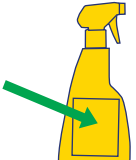


Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego pojemniku.

17

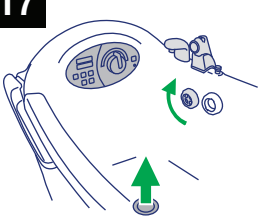


Otworzyć odpływ.

18

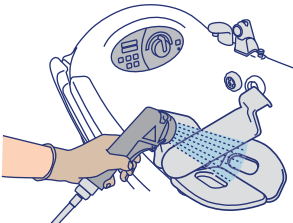


Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

19

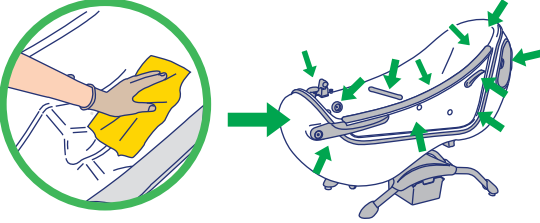


Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.

20

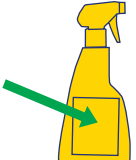


Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jego pojemniku.

21

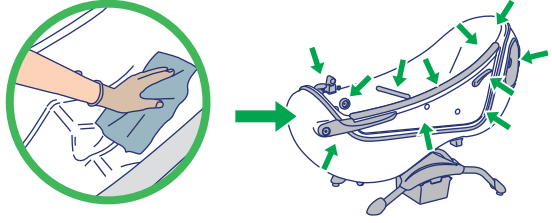

Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.

22

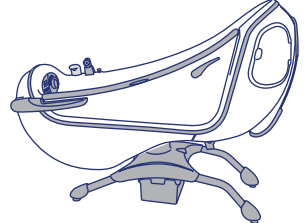

Pozostawić do wyschnięcia.