


Dusch- och desinficeringspanel

Duscha patienten

1




Aktivera bromsarna.

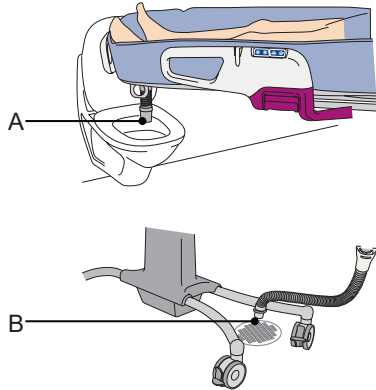

Flytta patienten till dusch- och desinficeringspanelen.
(A) – Placera avtappningshålet ovanför toaletten eller duschkaret, eller
(B) – Placera avtappningshålet ovanför golvbrunnen.
Lås bromsarna.

2

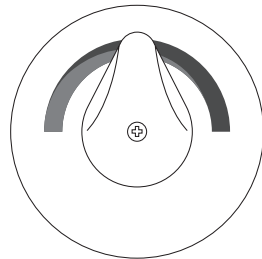


Ställ in önskad temperatur.

3




Skållningsrisk.

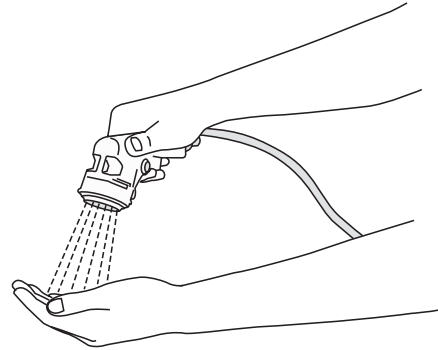

Lyft av duschhandtaget och rikta det bort från patienten. Känn på vattnet utan handske på handen.
Tryck på duschhandtagets avtryckare och justera flödet.

4

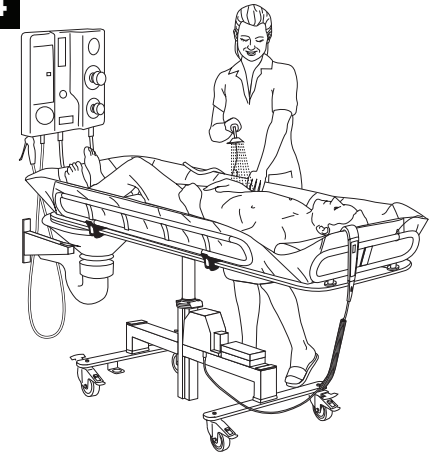

Vid dusch av patient.


Rengöring och desinficering av duschstol eller duschvagn

1



Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.

2

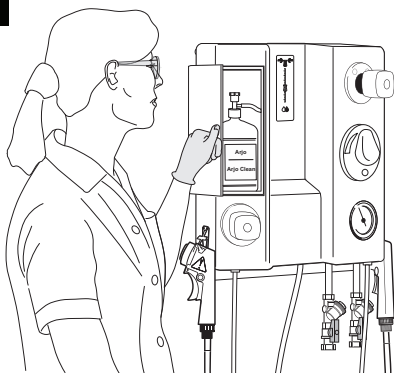


Öppna paneldörren och kontrollera mängden desinficeringsmedel i flaskan.

3




Desinficera inte i närheten av patienten.

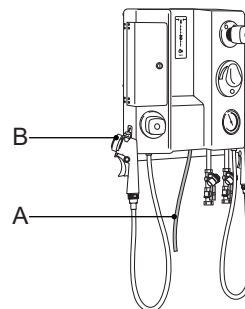


Kontrollera att slangen (A) är ansluten till uppsugningen. Ta loss desinficeringsprayhandtaget (B) från kroken.

4

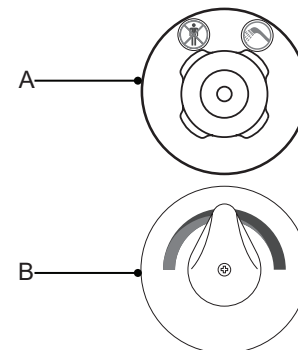


Öppna desinficeringsflödet till max (A). Ställ in en så låg temperatur som möjligt (B).

5

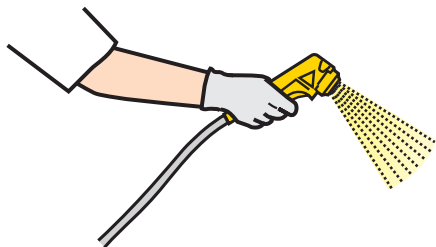

Spraya desinficeringsmedel på duschstolen eller duschvagnen.

6

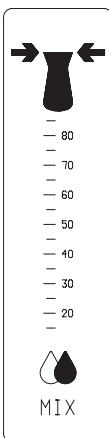

Kontrollera desinficeringsmedlets blandningsförhållande på flödesmätaren och justera vid behov (se bruksanvisning).

7



Desinficera duschstolen eller duschvagnen.

