

AUSILIO PER LA POSIZIONE ERETTA E IL TRASFERIMENTO

Sara® Stedy



Grazie a Sara Stedy e Sara Stedy Compact, un'assistente è in grado da solo di aiutare pazienti e residenti ad effettuare trasferimenti dalla posizione seduta alla posizione eretta nel corso della giornata.

GALLERIA DELLA MOBILITÀ ARJO



B

© Arjo 2019

B. Può camminare ma potrebbe aver bisogno di un deambulatore/stampelle per potersi appoggiare.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare Arjo.

- **Favorire la mobilitazione precoce**
Sara Stedy può supportare attività di mobilitazione precoce stimolando i pazienti/residenti ad assumere un ruolo attivo nei trasferimenti dalla posizione seduta a quella eretta.
- **Disponibile in due differenti dimensioni**
Sara Stedy consente ad un singolo assistente di aiutare i pazienti/residenti di svariate corporature e condizioni cliniche nei passaggi dalla posizione seduta a quella eretta.
- **Trasferimenti giornalieri semplificati**
Sara Stedy e Sara Stedy Compact sono dispositivi non elettrici.
- **Prodotto certificato DSDC grazie al design specificatamente progettato per le persone che vivono con demenza**
Sara Stedy è stato esaminato dal Dementia Services Development Centre dell'Università di Stirling ottenendo la certificazione DSDC secondo la classe 1B per i prodotti.



Caratteristiche principali

SARA STEDY

Progettato per pazienti/residenti con altezza compresa tra i 149 cm e i 193 cm e peso fino a 182 kg.

IMPUGNATURA A BARRA TRASVERSALE

Consente ai pazienti/residenti di sostenersi da soli tirandosi in modo attivo.

SEDUTA CON SUPPORTI DOPPI PIVOTANTI

La doppia seduta pivotante può essere estratta per consentire al paziente/residente di alzarsi, mentre durante il trasferimento offre una superficie inclinata per la seduta.

APPOGGIA-GINOCCHIA

La ginocchiera aiuta il paziente/residente ad alzarsi in piedi ed inoltre offre un sostegno per gli arti inferiori durante il trasferimento.

STAFFE DELLO CHASSIS AZIONATE A PEDALE

Facilmente regolabili per un accesso alle sedie di grandi dimensioni.



SARA STEDY COMPACT

Progettato per pazienti/residenti con altezza compresa tra i 138 cm e i 172 cm e peso fino a 182 kg.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

	Sara Stedy	Sara Stedy Compact
Carico di lavoro sicuro (SWL)	182 kg/400 lb	182 kg/400 lb
Peso sollevapazienti	29,4 kg/64,82 lb	28,3 kg/62,5 lb
Altezza min. totale per lo stoccaggio	1.050 mm/41 1/3 in	960 mm/37,8 in
Larghezza esterna con chassis chiuso	490 mm/19 1/2 in	490 mm/19 1/2 in
Larghezza esterna con chassis completamente aperto	880 mm/34 3/4 in	880 mm/34 3/4 in
Larghezza interna con chassis chiuso	360 mm/14 1/2 in	360 mm/14 1/2 in
Larghezza interna con chassis completamente aperto	750 mm/29 1/2 in	750 mm/29 1/2 in
Altezza staffe chassis (dal pavimento al punto più alto delle staffe dello chassis)	100 mm/3 7/8 in	100 mm/3 7/8 in
Spazio sotto le staffe dello chassis (dal pavimento alla base dello chassis)	30 mm/1 1/8 in	30 mm/1 1/8 in
Lunghezza totale sollevapazienti	920 mm/36 1/2 in	890 mm/35 in
Raggio di sterzata	1.040 mm/41 in	1.020 mm/40 1/8 in

Ruote a basso attrito, quelle posteriori con freni


Il Centro per lo sviluppo dei servizi per la demenza (DSDC) presso l'Università di Stirling ha condotto uno studio su questo prodotto ed ha valutato il suo design in relazione ai principi di progettazione orientati all'assistenza di persone che vivono con demenza e alla sua fruibilità in un ambiente inclusivo rispetto alla demenza. Per facilità di identificazione, l'idoneità del prodotto è classificata da un numero con una corrispondente spiegazione di utilizzo nella tabella di valutazione fornita. Il logo del prodotto certificato DSDC è assegnato in base al merito del singolo prodotto ed è applicato a colori. La certificazione non tiene conto della fabbricazione o dell'applicazione finale del prodotto. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo possibile per garantire che le valutazioni riflettano l'idoneità del prodotto e la sua applicazione al momento della stampa, DSDC non può essere ritenuto responsabile per l'applicazione del prodotto finale, le sue prestazioni o la sua interfaccia con altri prodotti o finiture. Affinché un ambiente possa essere considerato "inclusivo rispetto alla demenza" o "demenza friendly" occorre prestare particolare attenzione alle specifiche delle finiture circostanti, alle loro prestazioni (ad es. valore di riflettanza alla luce (LRV), antiscivolo e uso dei modelli) ed alla loro idoneità per l'uso previsto.

ACCESSORI

Disponibilità di una vasta gamma di corsetti lavabili, lavabili con un panno e monopaziente

Disinfettanti Arjo

REQUISITI DI SPAZIO

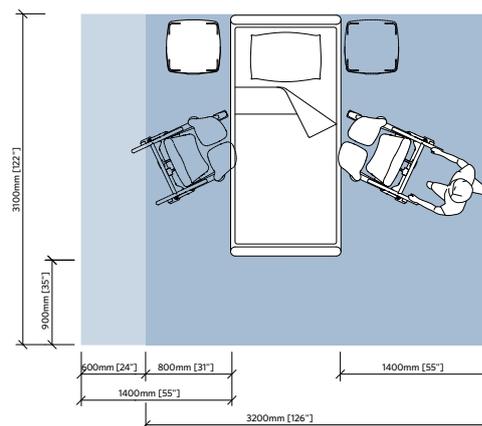

- L'area blu evidenzia lo spazio minimo necessario per un utilizzo ergonomico dell'ausilio da parte dell'assistente, operando da un lato.
- L'area azzurra evidenzia l'estensione di spazio necessaria per facilitare le attività da entrambi i lati, al fine di assicurare un accesso adeguato per il paziente, l'ausilio e l'assistente.

Novembre 2019. Arjo raccomanda di utilizzare solo componenti originali espressamente progettati per lo scopo e forniti da Arjo. Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti Arjo si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo Arjo.
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo S.p.A • Via Giacomo Peroni 400-402 • 00131 Roma • Italia • +39 0687426211

Arjo.A00170.2.0.IT.IT

arjo