

Sara[®] 3000



Die Sara 3000 ist eine Steh- und Aufrichthilfe, die speziell darauf ausgelegt ist, Patienten und Bewohnern zusätzliche Unterstützung zu bieten, wenn sie bis zu einem gewissen Grad in der Lage sind, selbstständig zu stehen.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



C

© Arjo 2019

C. Ist in der Lage, sein Gewicht auf mindestens einem Bein abzustützen.
Nutzt einen Rollstuhl zur Mobilität.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Einzelne Pflegekraft**

Mit der Sara 3000 kann eine einzelne Pflegekraft den Patienten/Bewohner in den aufrechten Stand bringen.

- **Sichere Transfers**

Unterstützte Transfers aus dem Sitzen in den Stand erfordern minimale körperliche Anstrengung seitens der Pflegekraft.

- **Verbesserte Mobilität**

Mithilfe der Sara 3000 wird die Aktivität während der täglichen Transfers aus dem Sitzen in den Stand gefördert. Durch häufiges Ermutigen zum Aufstehen können die sekundären Auswirkungen der Immobilität verringert werden.

- **Optionale Waage**

Eine optionale Waage erleichtert den Wiegevorgang.

Ausstattungsmerkmale

WAAGE (OPTIONAL)

Die optionale Personenwaage spart Zeit, da der Patient/Bewohner während des Transfers gewogen wird.

DUALES BEDIENFELD

Bedienfelder an der Säule und der Handbedienung. Die Pflegekraft kann die Handbedienung verwenden und so nahe am Patienten/Bewohner bleiben und während des gesamten Vorgangs guten Augenkontakt halten.



ZUGÄNLICHKEIT IM DESIGN

Der Zugang für den Pflegebedürftigen erfolgt, sobald das elektrisch angetriebene Fahrgestell geöffnet ist. Ein Sperrmechanismus auf der Rückseite der Lenkrollen sichert den Lifter während Aufricht- und Stehvorgängen.

FUSSBRETT

Die Fußplatte bietet eine sichere Plattform für die Füße des Patienten/Bewohners, während die Kniestütze die Unterschenkel stabilisiert, um das Stehen und Sitzen zu ermöglichen.

PRODUKTINFORMATIONEN


Max. sichere Arbeitslast (SAL)	200 kg
Liftergewicht (einschl. Batterie)	62 kg
Min. Höhe bei Lagerung	1180 mm
Minimale Hubhöhe	920 mm
Maximale Hubhöhe	1710 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	625 mm
Äußere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1000 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	525 mm
Innere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	805 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	110 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	40 mm
Gesamtlänge des Lifters	1040 mm
Wenderadius	1035 mm
Schutzart Lifter	IPX4
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 4 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler – zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	

ZUBEHÖR

Großes Angebot an Körpergurten und patientenspezifischen Gurten (Flites) verfügbar

Optional: Integrierte Waage

PLATZBEDARF

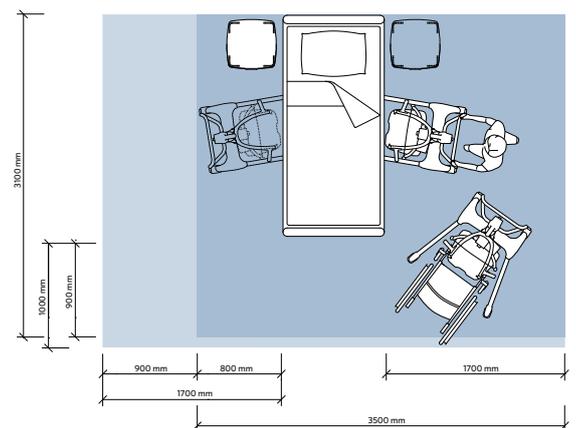

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft die technischen Hilfsmittel auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblau gefärbte Bereich zeigt die zusätzlich benötigte Fläche, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz zum Arbeiten und Bewegen für Bewohner/Patient, technisches Hilfsmittel und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.