
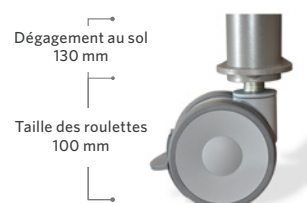


Fauteuil de relaxation Wellness Nordic®

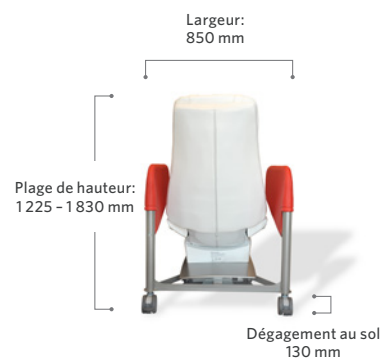

Aider les personnes atteintes de troubles cognitifs à se relaxer grâce à une musique apaisante et à une stimulation tactile peut avoir un effet bénéfique sur leur bien-être et leur qualité de vie.

Le fauteuil de relaxation entièrement automatisé de Wellness Nordic combine ces fonctions avec un mouvement de balancement qui offre une expérience multisensorielle unique et apaisante.

- Système audio intégré avec musique MusiCure®
- 3 programmes automatiques prédéfinis offrant une stimulation multisensorielle
- Imitation cuir doux et facile à nettoyer
- Accoudoirs pivotants
- Housse amovible contre l'incontinence
- Socle à roulettes pour une utilisation aisée avec les solutions de levage d'Arjo
- En option: couverture lourde et coussin en forme de « U »

Couleurs et options

Le fauteuil de relaxation **Wellness Nordic** est disponible en deux couleurs: noir ou blanc et avec des éléments contrastants de couleur au choix (accoudoirs et housse contre l'incontinence) disponibles en blanc, rouge ou noir.

Couleur principale

Noir
Blanc

Couleurs des éléments contrastants

Blanc	Rouge	Noir
Blanc	Rouge	Noir

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Alimentation électrique	230 V CA/50 Hz
Consommation d'énergie	90W
Environnement de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Réaction au feu	EN1021-1 & 1021-2

MUSIQUE ET VIBRATIONS

Type	1 système à 1 haut-parleur unidirectionnel
Impédance	8Ω
Taille du cône du haut-parleur	Gamme complète, 700 mm x 2
Amplificateur du haut-parleur	14 W (7 W + 7 W), 1 kHz
Amplificateur de vibration	14 W, 70 Hz
Conception blindée	Non
Terminal d'entrée externe	Mini jack stéréo, 3,5 mm

TÉLÉCOMMANDE

Gamme de fonctionnement	Environ 1 000 m
Récepteur IR	Des 2 côtés du fauteuil
Batteries	2 x AAA

PROGRAMMES DE PRÉRÉGLAGE

Durée: 20 min
 - Le dossier est à moitié incliné au début du programme
 - La position à moitié inclinée est maintenue pendant toute la durée du programme
 - Retour à la position assise à la fin du programme
 - Musique de relaxation MusiCure automatique
 - Stimulation tactile dans le dos

Relax

Durée: 20 min
 - Abaissement du dossier en 5 étapes
 - Retour à la position assise à la fin du programme
 - Vitesse de basculement variable
 - Musique stimulante MusiCure automatique
 - Stimulation tactile dans le dos

Refresh

Durée: 120 min
 - Le dossier est en position relevée pendant tout le programme
 - Vitesse de basculement constante
 - Pas de musique

Confort

DIMENSIONS HORS-TOUT (PLATEAU COMPRIS)

Longueur, position relevée	1 435 mm
Hauteur, position relevée	1 225 mm
Longueur, complètement articulé	1 830 mm
Hauteur, complètement articulé	835 mm (limitée par les accoudoirs)
Largeur maximale (plateau)	850 mm
Longueur du dossier	850 mm
Longueur, section d'assise	530 mm
Longueur, repose-pieds	500 mm
Largeur, section d'assise	665 mm
Hauteur de siège, partie arrière	530 mm
Hauteur de siège, partie avant	585 mm
Poids du produit, plateau compris	74,4 kg

Poids du produit, fauteuil uniquement (y compris matelas, coussin, télécommande)

46 kg

Type de roulettes	Pivotante, à frein individuel
Taille des roulettes	100 mm
Dégagement au sol	130 mm
Capacité maximale admissible	130 kg - 286 lb

MATÉRIAU

Toile enduite	Cuir de chlorure de polyvinyle (cuir synthétique)
Matériau tampon	Uréthane
Accoudoirs et housse contre l'incontinence	Stamskin TOP®, à traitement antibactérien, contre les odeurs et antifongiques Sanitized® PL 2432 (PES)

EN OPTION ACCESSOIRES

Couverture en fibre lourde	3,7 kg 1 250 mm x 1 000 mm
Housse hygiénique	1 250 mm x 1 000 mm
Coussin en forme de « U »	Disponible en rouge

Février 2018 Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo. Wellness Nordic Relax Chair est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.
 © Arjo, 2018

Chez Arjo, nous nous engageons à améliorer la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite et atteintes de problèmes de santé liés à l'âge. Avec des produits et des solutions permettant une manutention ergonomique des patients, l'hygiène personnelle, la désinfection, le diagnostic et la prévention efficace des escarres et de la thrombo-embolie veineuse, nous aidons les professionnels de tous les environnements de soins à procurer un niveau de soins toujours plus sûrs et dignes. Tout ce que nous faisons, nous le faisons « with people in mind ».

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13
 Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.com

arjo

01.DM.02.1.BE.FR.1.ARJO • August 2018