

PASSIEVE TILLIFT VOOR ZORG IN KRAPPE RUIMTES

# Maxi Twin<sup>®</sup> Compact



De Maxi Twin Compact is een kleinere versie van de Maxi Twin verrijdbare tillift en is speciaal bedoeld voor krappe ruimtes in zorginstellingen.

## DE MOBILITEITSWIJZER VAN ARJO



D



E

© Arjo 2019

**D.** Niet in staat het eigen gewicht op de voeten te dragen.  
Kan zitten met goede ondersteuning.

**E.** Kan moeilijk zelfstandig zitten, is veelal bedlegerig en kan alleen kort in een speciale stoel met veel ondersteuning zitten.

Neem contact op met Arjo voor meer informatie.

- **Compacte afmetingen**

Dankzij de compactere afmetingen ten opzichte van de Maxi Twin biedt de tillift toegang tot krappe ruimtes die anders moeilijk bereikbaar zijn.

- **Optillen vanaf de vloer**

Het hoge tilbereik maakt optillen vanaf de vloer mogelijk.

- **Wendbaarheid**

Het ontwerp met dubbele mast zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht van de zorgvrager.

- **Precisietransfers**

Met het elektrische kanteljuk kan de zorgvrager eenvoudig worden gepositioneerd, waardoor handmatig herpositioneren wordt beperkt.

- **Transfer naar een auto**

Na een beoordeling van de omgeving en het type auto kan de Maxi Twin Compact worden gebruikt voor transfers naar en vanuit een auto.

# Belangrijkste kenmerken

## ONTWERP MET DUBBELE MAST

Het ontwerp met dubbele mast zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht van de zorgvrager. Het open mastontwerp biedt ook extra beenruimte tussen de twee masten.

## ERGONOMISCHE TRANSFERS

Het mastontwerp van de Maxi Twin heeft praktische positioneringshendels voor gebruik door zorgverleners.

## COMPACTE AFMETINGEN

Door zijn compacte afmetingen (lengte, hoogte en breedte) biedt de tillift toegang tot krappe ruimtes die anders moeilijk bereikbaar zijn.



## ELEKTRISCH KANTELJUK

Het elektrische kanteljuk minimaliseert handmatig tillen en verplaatsen en verbetert de nauwkeurigheid bij het positioneren van de zorgvrager.



De tillift kan worden gebruikt voor transfers naar en vanuit een auto.

## PRODUCTINFORMATIE

Max. veilige tilbelasting	160 kg	350 lb
Gewicht tillift (met tiljuk en accu)	48 kg	103 lb
Maximale tilhoogte	1375 mm	54 1/8 in
Minimale tilhoogte	290 mm	11 3/8 in
Tilbereik	1080 mm	42 1/2 in
Min. hoogte	1125 mm	44 1/4 in
Externe breedte gesloten onderstel	660 mm	26 in
Externe breedte open onderstel	1105 mm	43 1/2 in
Interne breedte gesloten onderstel	520 mm	20 1/2 in
Interne breedte open onderstel	965 mm	38 in
Vrije ruimte onderstel (van vloer tot bovenkant onderstel)	115 mm	4 1/2 in
Vrije ruimte onder het onderstel (van vloer tot onderkant onderstel)	30 mm	1 1/4 in
Lengte tillift	1100 mm	43 in
Draaicirkel	1310 mm	51 1/2 in
Beschermingsklasse tillift	IP24	
Beschermingsklasse afstandsbediening	IPX7	
Accu	24 V, 2,5 Ah NiMH	

Acculaadindicator

Noodstopknop en schakelaar voor omlaag brengen bij systeemuitval

Automatische uitschakeling indien de lift bij het omlaag brengen een obstakel raakt

Zwenkwielen met lage frictie, de achterste twee voorzien van rem


## ACCESSOIRES

Groot assortiment speciale tilbanden en disposable tilbanden (Flites)

Arjo-desinfectiemiddelen

## BENODIGDE RUIMTE

De ruimtevereisten in de afbeelding gelden voor een Maxi Move passieve tillift. De Maxi Twin Compact neemt nog minder ruimte in beslag.

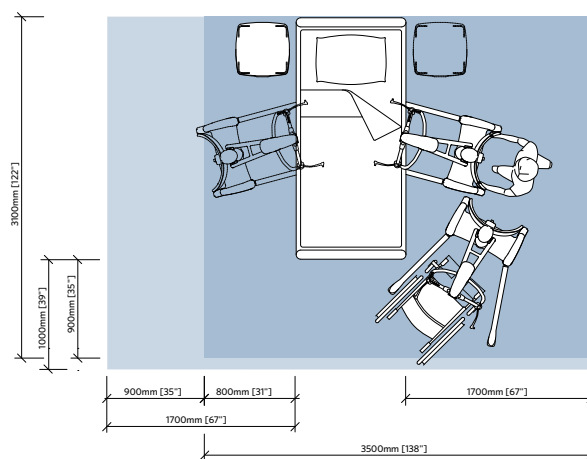

Het blauwe gebied markeert de minimale werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om op een ergonomisch verantwoorde manier vanaf één kant met de verrijdbare tillift te werken.

Het lichtblauwe gebied markeert de benodigde extra werkruimte die de zorgverlener nodig heeft om aan beide zijden te kunnen werken met de verrijdbare tillift en de zorgvrager goed te kunnen bereiken.