

Carino®



Patenterad
böjd ram och
svängbara
benstöd

Carino® är utformad för att minska antalet förflyttningar vid assisterad duschning och hygienrutiner och gör det möjligt för en ensam vårdpersonal att utföra dagliga hygienrutiner som bland annat tvätt, toalettbesök och fotvård.

Designad med tanke på Barbara och Carl



Ställbar i höjd

Den justerbara höjden kombinerad med en patenterad svängd ram gör att patienten kan sitta i en bekväm position med stöd, samtidigt som vårdpersonalen alltid kan arbeta i en ergonomisk position.

Underlättar effektiva duschrutiner

Patienten kan förbli sittande i Carino under förflyttning till och från sovrummet och vid duschning, toalettbesök och andra hygienrutiner, vilket minskar antalet förflyttningar.

Personcentrerad vård

Med Carino kan duschning och andra hygienrutiner utföras av en ensam vårdpersonal, vilket underlättar en mer personlig vård.

Viktiga funktioner

BÖJD RAM

Patenterad böjd ram som ger stöd och en bekväm sittande position i alla höjdlägen.

FÄLLBARA ARMSTÖD

SVÄNGBARA BENSTÖD

Patenterade benstöd som kan öppnas för intima hygienrutiner.

ROTERANDE FOTPLATTOR

Fälls in under hygienstolen när de inte används.

HUVUDKUDD

FULLÄNGDS RYGGSTÖD


NÖDSTOPP



TILLBEHÖR

Ryggekudde
Nackkudde
Sittdyna
Bäcken med lock
Toalettinlägg
Säkerhetsbälte
Batteriladdare och batteri
Desinficeringsmedel för ytrengöring

UTRYMMESKRAV

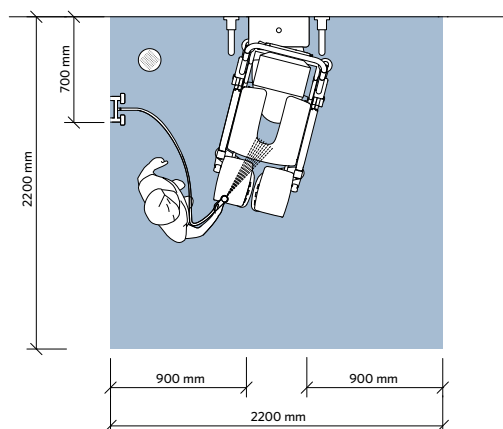

Arbetsyta som krävs för att underlätta förflyttningar och hygienrutiner och underlätta åtkomligheten för patienten, vårdpersonalen och utrustningen.

PRODUKTINFORMATION

Säker arbetslast (SWL)	140 kg
Vikt	42 kg
Minsta längd, lägsta läge	881 mm
Maxlängd, högsta position	1 310 mm
Totalbredd	630 mm
Underrede, bredd	624 mm
Chassi, bredd mellan ben	424 mm
Chassi, längd	857 mm
Minsta höjd för ryggstöd, lägsta läge	1 240 mm
Ryggstöds maxhöjd i översta läget	1 555 mm
Säteshöjd, lägsta/högsta position	450 mm/1 050 mm
Lyfthöjd (säte)	600 mm

Mer detaljerad information hittar du på www.arjo.com