

Moderne
Krankenhausmöbel,
die Patienten und
Pflegepersonal
unterstützen

LANGLEBIGE UND MODERNE KRANKENHAUSMÖBEL

Betttisch & Nachtschrank (Server & Bedside Cabinet)



Hochwertige Möbel für wichtige und tägliche Anforderungen

Modern und elegant, mit sauberen Linien und abgerundeten Profilen, sind diese Produkt für die Menschen konzipiert und hergestellt, die sie am häufigsten benutzen.

Der Bettisch (Server) hat eine zweiteilige Tischplatte, die dem Patienten gestattet, einen Teil des Tisches in mehreren Winkeln z.B. zum Lesen anzukippen. Diese klappbare Tischplatte ist sehr praktisch. Der kleinere Seitentischabschnitt kann nicht verstellt werden und bietet eine praktische Oberfläche für Gegenstände, wie zum Beispiel Getränke.

Der zur einfachen Bedienung entworfene Einhandbetrieb erlaubt die Verstellung des Tisches von 735 mm bis 1100 mm und rastet automatisch ein, was jederzeit eine stabile Position gewährleistet. Wird z. B. das Bett unabsichtlich angehoben, hebt sich auch die Tischplatte, um eine Einklemmung etc. zu vermeiden.




Der Nachtschrank (Bedside Cabinet) hat zwei große Schubladen, die leicht von dem Bediener zu erreichen sind.

Praktisch und flexibel

Der Nachtschrank verfügt standardmäßig über Taschen- oder Handtuchhaken beidseits, die leicht zugänglich sind, eine abschließbare Schublade zum Schutz der Privatsphäre und eine integrierte Flaschenhalterung in der unteren Schublade, die bis zu drei 1,5-Liter-Flaschen hält.

Optionale Begrenzungsbügel (Railing) geben zusätzliche Stabilität für Gegenstände auf der Oberseite und unterstützen auch beim Bewegen des Schrankes und des Tisches.

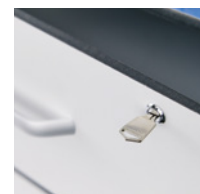

Stabil, langlebig und einfach zu reinigen

Das Schubladenfutter des Nachtschranks ist glatt und aus wasserfestem Kunststoff gefertigt. Beide Schubladen können für vollen Zugang und einfache Reinigung werkzeugfrei entfernt werden.

Alle Nachtschrank-Modelle sind mit vier Doppelaufrollen, davon jeweils zwei mit Bremsen, ausgestattet. Die Doppelaufrollen des Betttisches bieten hohe Mobilität für eine einfache und genaue Positionierung.

Die Oberflächen sind aus hochwertigem glattem und nicht absorbierendem HPL (High Pressure Laminate = Hochdruckschichtstoffplatten) gefertigt. HPL ist, neben seiner Langlebigkeit im täglichen Gebrauch sowie Beständigkeit gegenüber Chemikalien, Feuchtigkeit, Flecken und Schmutz für seine einfache Reinigungsfähigkeit bekannt.



Farben und Optionen



Einfarbig

Hellgrau bietet neutrale Ästhetik.



Farbliche Akzente

Die ausgewählte Farbe ist auf dem oberen Seitenabschnitt des Kipptisches, dem Nachtschrankregal und auf der Oberseite hervorgehoben.



Holzdekor

Auswahl von holzartigen Dekors.



Arjo Blau



Lila



Hellblau



Hellgrau



Eiche weiß



Rotbuche



Walnuss

Bettische sind in 2 Modellen erhältlich:



Optionale Begrenzungsbügel (Railing) für den Nachtschrank und den Bettisch (für den Bettisch (Server) ohne Kippfunktion nicht erhältlich).



Februar 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. © Arjo, 2019

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des täglichen Lebens von Menschen mit eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Mit Produkten und Lösungen für einen ergonomischen, sicheren Transfer von Pflegebedürftigen und ihrer hygienischen Versorgung, Desinfektion und Diagnose, sowie eine wirksame Prophylaxe von Dekubitus und venöser Thromboembolie, helfen wir Mitarbeitern im Gesundheitswesen, den Standard einer sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich anzuheben. Bei allem, was wir tun, stets „with people in mind“.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
 Arjo Deutschland GmbH · Peter-Sander-Straße 10 · 55252 Mainz-Kastel · Deutschland · +49 6134-186 0
 Arjo AG · Fabrikstrasse 8/Postfach · 4614 Hügendorf · Schweiz · +41 (0) 61 337 97 77
 Arjo Austria GmbH · Lemböckgasse 49A · 123 Wien · Österreich · +43 (0) 866 56

www.arjo.com

arjo

Arjo.A000059.1.0.DE.DE