

BAIGNOIRE À HAUTEUR RÉGLABLE

# Arjo Classic Line<sup>®</sup> 2



La nouvelle baignoire Classic Line 2 fait partie d'une solution de bain complète qui améliore la sécurité du résident et du personnel soignant ainsi que le bien-être du résident. Compatible avec les lève-personnes de transfert et les lève-personnes d'hygiène d'Arjo, ce système d'hygiène permet aux résidents de différents niveaux de mobilité d'accéder à leur cycle de bain.

## GALERIE DES RÉSIDENTS ARJO

Associée à un lève-personne de transfert ou un lève-personne de bain, cette baignoire est conçue pour Albert, Barbara, Carl, Doris et Emma.



## Fiabilité et sécurité au cœur du produit

La Classic Line 2 est dotée de multiples dispositifs de sécurité afin d'offrir au résident une expérience de bain relaxante et sûre, grâce notamment à une triple protection anti-brûlure, un affichage de la température de l'eau, un arrêt et une descente d'urgence et un verrouillage du panneau de commande. La baignoire comprend un système de désinfection intégré en option et un système de rinçage systématique à l'eau, ce qui contribue à protéger le résident contre les infections croisées.

## Des avantages accrus pour le bien-être

Sa conception semblable à celle d'une baignoire domestique contribue à une expérience de bain confortable et familière. Les fonctionnalités en option, dont l'AirSpa™, peuvent encore contribuer à améliorer l'expérience globale du bain.

## Permet une utilisation avec un seul soignant

Compatible avec les lève-personnes de transfert et les lève-personnes de bain Arjo, la Classic Line 2 permet à un seul soignant d'assurer une routine de bain simplifiée pour les résidents à mobilité fonctionnelle variable. Cette baignoire à hauteur réglable permet au personnel soignant de laver le résident dans une position de travail ergonomique et sûre et de se concentrer sur les soins à apporter au résident.

# Principales caractéristiques

## TRIPLE PROTECTION ANTI-BRÛLURE

Arrête l'écoulement de l'eau si la température dépasse les niveaux de sécurité.

## DESCENTE D'URGENCE (EN OPTION)

En cas de panne de courant, la baignoire peut être abaissée pour sortir le résident du bain en toute sécurité.

## THÉRAPIE AIRSPA (EN OPTION)

Le système de thérapie AirSpa™ souffle de l'air d'intensité variable à travers 10 jets placés stratégiquement, ce qui a un effet relaxant et massant sur l'utilisateur.

## RINÇAGE SYSTÉMATIQUE À L'EAU

Toutes les 24 heures, de l'eau circule dans la tuyauterie, ce qui l'empêche de stagner et réduit la possibilité de développement bactériologique.

## FACES LATÉRALES INCURVÉES VERS L'INTÉRIEUR

Les faces incurvées vers l'intérieur offrent un espace supplémentaire pour les genoux du personnel soignant, ce qui permet de s'approcher au plus près du résident.

## SYSTÈME INTÉGRÉ DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION (EN OPTION)

Permet au personnel soignant de nettoyer et de désinfecter la baignoire et tout dispositif de transfert après utilisation.



## HAUTEUR RÉGLABLE

Permet à un seul soignant de laver le résident dans une position de travail ergonomique et sûre.

### INFORMATIONS PRODUIT

Capacité maximale admissible, CMA (patient + eau)	415 kg
Poids maximal du patient	182 kg
Poids total, conditionnement non compris	141kg
Longueur totale (externe)	2185 mm
Largeur totale (externe)	780 mm
Longueur totale (interne)	1885 mm
Largeur totale (point intérieur le plus large)	665 mm
Hauteur min. du bord de la baignoire	730 mm
Hauteur max. du bord de la baignoire	1 030 mm
Capacité d'eau jusqu'au trop-plein	300l
Temps de remplissage jusqu'au niveau de remplissage automatique, à une pression dynamique de 3000 kPa (eau chaude 80 °C)	4 min 40 s
Temps de remplissage jusqu'au niveau de trop-plein, à une pression dynamique de 3000 kPa (eau chaude 80 °C)	7 min 40 s
Durée de vidange à partir du niveau de trop-plein	8 min 12 s en position basse ou 6 min en position haute
Pression statique maximale de l'eau	6 bar (600 kPa, 87 psi)
Pression d'eau de fonctionnement minimale	1 bar (100 kPa, 14,5 psi)
Catégorie IP conforme à IEC 60529	IPX4

### COMBINAISONS DE LÈVE-PERSONNES ARJO

Alenti, Calypso, Miranti, Bolero, Maxi Move\* et Maxi Sky\*

\*Sans grande barre de suspension

### CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Hauteur réglable
- 3 niveaux de protection anti-brûlure
- Mitigeur thermostatique
- Affichage de la température de l'eau de remplissage de la douche et de la baignoire
- Rinçage systématique à l'eau
- Arrêt d'urgence
- Verrouillage des fonctions du panneau de commande
- Trop-plein
- Poignées
- Support de pieds/réducteur de baignoire

### CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES


- Système de nettoyage et désinfection intégré
- Thérapie AirSpa™ (10 buses/2 niveaux d'intensité)
- Descente d'urgence
- Couleur spéciale RAL

### ACCESSOIRES/CONSOMMABLES

- Coussin de tête
- Habillage humide et habillage sec
- Liquides de désinfection

### EXIGENCES EN TERMES D'ESPACE

La zone bleue indique la surface de travail requise pour faciliter les activités de transfert et d'hygiène et offrir un accès adéquat au résident, à l'équipement et au soignant d'un côté.

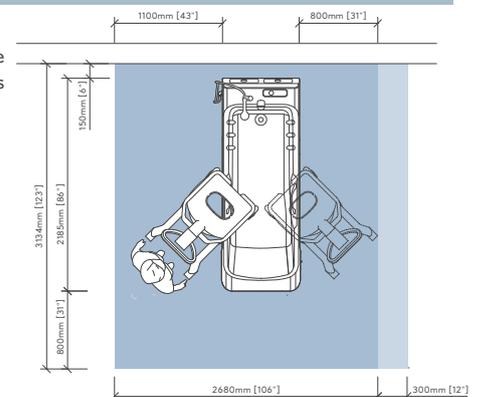

Janvier 2020. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. Arjo Classic Line® 2 est un dispositif médical de classe I, fabriqué par Arjo. Il est destiné aux soins d'hygiène assistés dans des environnements de soins. Lisez attentivement la notice d'utilisation.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
 Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 · 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13  
 Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80

Arjo.A002571.0.BE.FR

**arjo**