

Nosidło Wipeable Standing C-Hook Sling firmy Arjo



Czyszczenie
przez
wytarcie

Zmywalne nosidło Arjo mocowane jest za pomocą haka i służy do wspomagania wstawania i stania. Nie wymaga ono prania, przez co jest łatwe w użyciu i czyszczeniu oraz oszczędza czas między kolejnymi użyciami.

Korzyści nowego nosidła

Możliwość częstego stosowania

Nosidło jest doskonałą alternatywą dla placówek służby zdrowia, które nie chcą tracić czasu na częste pranie.

Korzystając z tego zmywalnego nosidła opiekunowie mogą przenosić kolejnych pacjentów z minimalną przerwą na czyszczenie i dezynfekcję, co polega na przetarciu nosidła przed zmianą użytkownika. Nosidło jest zawsze dostępne do użycia z podnośnikiem.


Zapobieganie zakażeniom krzyżowym

Produkt jest pozbawiony tradycyjnych szwów — posiada tylko szwy zgrzewane, zaś korpus, pas i haki mocujące C-hooks wykonane są z nieporowatego materiału. Ułatwia to czyszczenie i dezynfekcję ściereczką, znacznie zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego.

Większa efektywność kosztowa

Koniec z gubieniem lub uszkodzaniem nosideł w procesie prania.

Zgodność z protokołem dezynfekcji przyczynia się także do zmniejszania kosztów związanych z zakażeniem krzyżowym i zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną (HAI).

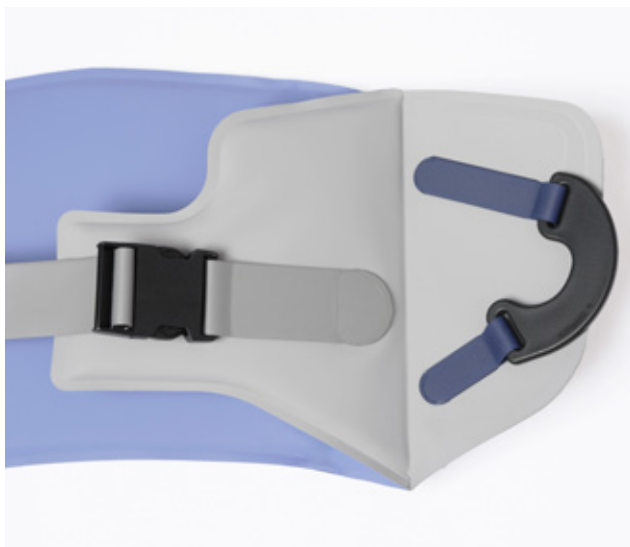

Najważniejsze udogodnienia

BEZPIECZNE I WYGODNE DOPASOWANIE

Materiał nosidła zaprojektowano tak, by w połączeniu z ruchem urządzenia Sara Plus podczas wstawiania z pozycji siedzącej utrzymywał nosidło na miejscu i zapewniał pacjentowi komfort.

ROZMIAR OZNACZONY KOLOREM

Wszystkie nosidła oznaczono kolorami, aby ułatwić wybór odpowiedniego rozmiaru.

NIEPOROWATY MATERIAŁ

Korpus, pas i haki mocujące nosidła są wykonane z nieporowatego materiału, a tym samym całkowicie zmywalne.

GŁADKIE POWIERZCHNIE DLA PACJENTA

Wnętrze nosidła nie zawiera tradycyjnych szwów, pasów ani innych podobnych elementów, a powierzchnia skierowana w stronę ciała pacjenta jest gładka.

ZGRZEWANE SZWY

Brak ściągów i zgrzewane szwy nosidła mają ograniczać potencjalne przedostawanie się płynów i brudzenie nosidła.

HAK MOCUJĄCY C-HOOK


Zapewnia łatwą integrację z urządzeniem Sara Plus

ZINTEGROWANY PAS

Pas i nosidło są trwale połączone, aby zapobiec ich rozłączeniu i zgubieniu pasa.

WKŁĘŚŁY KSZTAŁT

Wklęsły kształt tylnej części nosidła daje dostęp do pacjenta podczas rozbierania i zabiegów higienicznych.

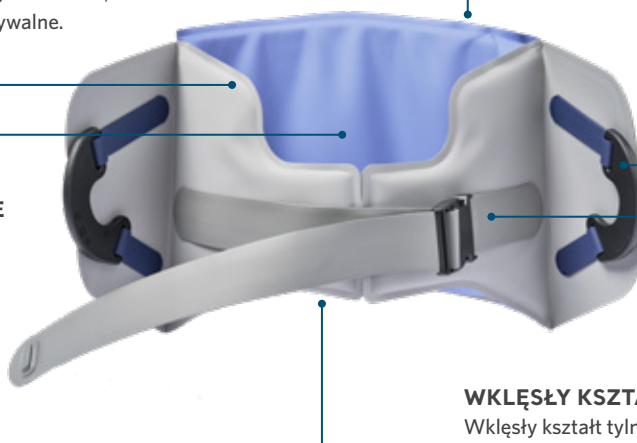

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Informacje ogólne

Kompatybilne podnośniki	Sara® Plus
Bezpieczne obciążenie robocze (BOR)	200 kg

Rozmiar (numer artykułu)

Rozmiar (numer artykułu)	Rozmiar w talii w cm
Mały, S (KKA6000-S-L2)	64-84 cm
Średni, M (KKA6000-M-L2)	76-104 cm
Duży, L (KKA6000-L-L2)	88-124 cm
Bardzo duży, XL (KKA6000-XL-L2)	108-160 cm

Czyszczenie/dezynfekcja

Nosidło można przecierać następującymi środkami czyszczącymi/dezynfekującymi:

Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Czwartorzędowe sole amonowe, alkohol izopropylowy, fenol, wybielacz (podchloryn sodu)*, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru.

*Po wielokrotnym kontakcie z wybielaczem nosidło może się odbarwiać i lekko lepić.