

CORSETTO CON GANCIO A "C" LAVABILE CON UN PANNO DESTINATO AD AUSILIO MOBILE ATTIVO PER LA POSIZIONE ERETTA E LA DEAMBULAZIONE SARA PLUS DI ARJO

Corsetto con gancio a "C" lavabile con un panno per la posizione eretta Arjo



Si lava semplicemente con un panno

Senza alcuna necessità di lavaggio in lavatrice, progettato per essere lavato e disinfettato semplicemente con un panno tra un paziente/residente e l'altro, il corsetto con gancio a "C" lavabile per la posizione eretta Arjo è facile da utilizzare, da pulire e riduce al minimo i tempi di fermo tra un utilizzo e l'altro.

I vantaggi del design

Maggiore efficienza operativa

Un'ottima alternativa per le strutture sanitarie che preferiscono evitare il processo di lavaggio in lavatrice e il tempo necessario per la sua gestione.

Con questo corsetto lavabile con un panno, gli assistenti possono utilizzare il corsetto da un paziente/residente all'altro riducendo al minimo i tempi, grazie alla possibilità di pulire e disinfettare il corsetto semplicemente passandovi un panno inumidito tra un utilizzo e l'altro. Il corsetto è sempre accessibile con il sollevapazienti.


Prevenire le infezioni crociate

Il prodotto è fabbricato solo con cuciture termosaldate e non cucite, e il corpo, la cintura e i ganci a "C" del corsetto sono realizzati in materiale non poroso, che lo rende efficiente da pulire e decontaminare con un panno inumidito, riducendo notevolmente il rischio di contaminazione crociata.

Maggiore convenienza economica

Mai più corsetti persi o danneggiati a causa del processo di lavaggio in lavatrice.

La conformità al protocollo di disinfezione contribuisce inoltre a ridurre i costi legati alla contaminazione crociata e alle infezioni associate all'assistenza sanitaria (HAI).

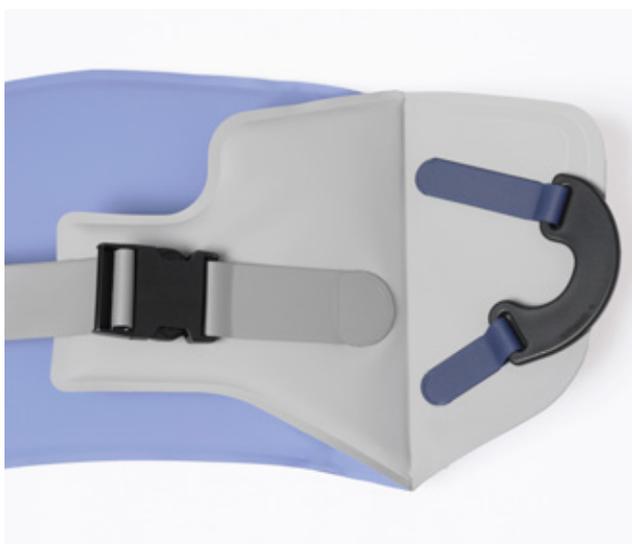

Caratteristiche principali

VESTIBILITÀ COMODA E SICURA

Il materiale del corsetto, combinato con il movimento di Sara Plus è progettato per mantenere il corsetto nella posizione corretta durante il processo di passaggio dalla posizione seduta a quella eretta, per supportare il comfort del paziente.

TAGLIE CON CODIFICA A COLORI

Tutti i corsetti sono codificati a colori per facilitare la scelta della taglia più adatta.

MATERIALE NON POROSO

La struttura, la cintura e i ganci a "C" del corsetto sono realizzati in materiale non poroso, quindi completamente lavabili a secco.

SUPERFICIE DI CONTATTO CON IL PAZIENTE/ RESIDENTE LISCIA

L'interno del corsetto è privo di cuciture e altri componenti per creare una superficie liscia a contatto con il corpo dell'assistito.

CUCITURE TERMOSALDATE

Le cuciture termosaldate, non cucite, impediscono l'ingresso di liquidi e la contaminazione del corsetto.

GANCIO A "C"


Per un'integrazione semplice con Sara Plus

CINTURA FISSATA AL CORSETTO

La cintura e il corsetto sono fissati l'una all'altro per evitare che i due elementi possano staccarsi e la cintura vada persa.

FORMA CONCAVA

La forma concava nella parte posteriore del corsetto consente l'accesso al paziente per svestirlo e per eseguire le operazioni di igiene personale.

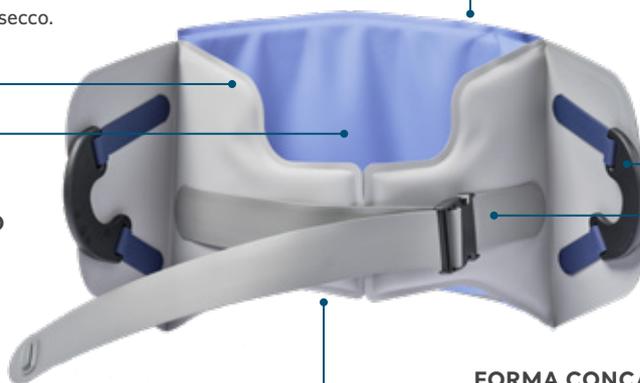

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche generali	
Sollevapazienti compatibili	Sara® Plus
Carico di Lavoro Sicuro (SWL)	200 kg

Taglia (codice articolo)	Girovita in cm
Small (KKA6000-S)	64-84 cm
Medium (KKA6000-M)	76-104 cm
Large (KKA6000-L)	88-124 cm
Extra Large (KKA6000-XL)	108-160 cm

Pulizia/Disinfezione	
Il corsetto può essere pulito e disinfettato con i seguenti tipi di agenti detergenti/disinfettanti:	Ammonio quaternario, Alcol isopropilico, Acido fenolico, Candeggina (ipoclorito di sodio)*, Acido peracetico, Perossido di idrogeno.
Consultare le "Istruzioni per l'uso" per ulteriori informazioni.	

*Il corsetto può mostrare alcuni segni di scolorimento e diventare leggermente appiccicoso dopo un'esposizione ripetuta alla candeggina.