

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

ALPHA TRANCELL DELUXE

AKTIV TRYKAFLASTNING



...with people in mind

Alpha Trancell® Deluxe systemet giver optimal klinisk og omkostningseffektiv aktiv trykaflastning i en brugervenlig pakke. Ved hjælp af en klinisk testet 10 minutters cyklus og en omhyggeligt kalibreret trykregulering på pumpen, er **Alpha Trancell Deluxe** helmadras, topmadras og siddepude effektive hjælpemidler til forebyggelse af tryksår og ved behandling af overfladiske vævsskader.

Madras (topmadras)


- 20 fuldt altenerende (aktive) modulære celler
- Slidstærkt polyurethan (PU)
- Funktion til lyntømning af madras
- Transportfacilitet
- Fastgørelsesstropper

Madras (helmadras)

- Som ovenstående med yderligere indbygget skummadrass

Pumpe

- Manuel trykregulering med enkel indstilling
- Let og kompakt
- Minimale lyd- og vibrationsniveauer
- Kraftig holdbar indkapsling
- Tænd/sluk
- Strømindikator
- Indikatoren Vent lyser indtil madrassen er helt fyldt op
- Audiovisuel alarm ved strømsvigt
- Audiovisuel alarm ved lavt tryk
- Indbygget batteribackup ved alarmer
- Færre fordybninger, for bedre hygiejne
- Kroge til montering på sengegavl
- Snap-lock slangeforbindelser til sikker fastgørelse
- Quick-guide monteret på pumpen

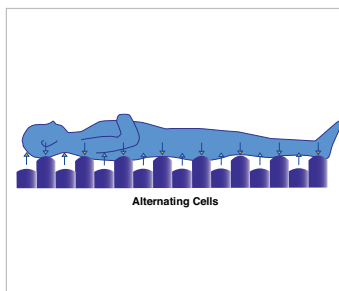

Produktspecifikationer	Topmadras	Helmadrass	Siddepude	Pumpe
Bestillingskode	ATD002DAR	ATD001DAR	ATD003DAR	ALT04
Dimensioner	2040 x 860 x 114 mm	2040 x 860 x 210 mm	455 x 470 x 50 mm	248 x 160 x 116 mm
Vægt				2,7 kg
Cyklus				10 minutter
Strøm				220-224 V, 50 Hz, 14 VA
Elektrisk sikkerhed				IEC60601-1-UK/Euro, IEC60601-1 - ROW
Maksimal plejemodtagervægt	120 kg	120 kg	90 kg	-
Cellemateriale	Polyuretan	Polyuretan	Polyuretan	-
Betræk	Polyuretan PU-beklædt polyester	Polyuretan PU-beklædt polyester	Polyuretan PU-beklædt polyester	-
Garanti	2 år	2 år	1 år	2 år

ArjoHuntleigh er en afdeling af Arjo Ltd Med. AB.

Kun ArjoHuntleigh originaledele, der er konstrueret specifikt til dette formål, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af ArjoHuntleigh. Det er vores politik løbende at fremme udvikling, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage tekniske ændringer uden varsel.

® og ™ er varemærker ejet af ArjoHuntleigh-virksomhedsgruppen.

© ArjoHuntleigh, 2011

ARJOHUNTLEIGH

GETINGE GROUP

www.ArjoHuntleigh.dk

ArjoHuntleigh A/S

Vassingerødvej 52

3540 Lyngø

Denmark

Tel.: +45 4913 8486

Fax: +45 4913 8487

e-mail: info.dk@arjohuntleigh.com

GETINGE GROUP er en førende global leverandør af produkter og systemer, der bidrager til kvalitetsforbedring og omkostningseffektivitet inden for sundhedssektoren. Vi driver virksomhed under de tre mærker **ArjoHuntleigh**, **GETINGE** og **MAQUET**. **ArjoHuntleigh** fokuserer på plejemodtagermobilitet og sårbehandlings-løsninger. **GETINGE** leverer løsninger til infektionskontrol til hospitaler og forureningsbeskyttelse til sundhedsskolen. **MAQUET** er specialiseret i løsninger, behandlinger og produkter til kirurgiske indgreb til intensivafdelinger.